
HOGGI[®]



BINGO Evolution Ersatzteilkatalog

de

Index

1	Modellidentifikation und Grundausstattung	
1.1	Modellidentifikation über das Typenschild	4
1.2	Grundausstattung	4
2	Ersatzteile	
2.1	Straßengestell, Lenkbar	5
2.2	Straßengestell, Starr	6
2.3	Straßengestell für Zusatzgeräte	7
2.4	Straßengestell, Trike	8
2.5	Straßengestell, Mini	9
2.6	Sitzeinheit	10
2.7	Sitzeinheit Mini	11
2.8	Lenkrahmen	12
2.9	Starr Rahmen	13
2.10	Lenkrahmen für Zusatzgeräte	14
2.11	Trike Rahmen	15
2.12	Lenkrahmen Mini	16
2.13	Frontstrebe, starr	17
2.14	Frontstrebe mit Federung	18
2.15	Federvarianten	19
2.16	Hinterrahmen	20
2.17	Bremse	21
2.18	Schiebebügel	22
2.19	Schiebebügel (Tabelle)	23
2.20	Sitzlager Gr. 1 und 2	24
2.21	Sitzlager Gr. 2XL	25
2.22	Sitzlager Mini	26
2.23	Transportsicherung	27
2.24	Transportsicherung Mini	28
2.25	Lenkradgabel	29
2.26	Bereifungsvarianten	30
2.27	Trike Vorderrad	31
2.28	Trommelbremse	32
2.29	Sitzbasis	33
2.30	Auslösung Kantelung	34
2.31	Auslösung Kantelung Mini	35
2.32	Sitzfläche	36
2.33	Sitzfläche Mini	37
2.34	Hüftpelotte	38
2.35	Oberschenkelführung	39
2.36	Kniewinkelanlage 90°	40
2.37	Kniewinkelanlage, winkelverstellbar	41
2.38	Kniewinkelanlage (Tabelle)	42
2.39	Kniewinkelanlage Mini	43
2.40	Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85-170° (neue version)	44
2.41	Kniewinkelanlage fest 90° (neue version)	45
2.42	Fußbrettträger mit einstellbaren Winkel	46
2.43	Fußbrettträger mit einstellbaren Winkel, Verriegelung	47
2.44	Fußbrett	48
2.45	Rückenbasis	49
2.46	Rückenbasis OT	50

Index

2	Ersatzteile	
2.47	Rückenbasis OT Plus _____	51
2.48	Seitenpelotten _____	52
2.49	Seitenpelotten Aluminium _____	53
2.50	Rückeneinschub _____	54
2.51	OT Rückeneinschub _____	55
2.52	Rückenbasis Mini _____	56
2.53	Rückeneinschub Mini _____	57
2.54	Polster _____	58
2.55	Thoraxpelotte _____	59
2.56	Thoraxpelotte Mini _____	60
2.57	Abduktionskeil, abschwenkbar und abnehmbar _____	61
2.58	Abduktionskeil, fest _____	62
2.59	Zubehöraufnahme _____	63
2.60	Zubehöraufnahme Mini _____	64
2.61	Haltebügel _____	65
2.62	Therapietisch _____	66
2.63	Therapietisch, höhenverstellbar _____	67
2.64	Lenkstop _____	68
2.65	Fahrbremse für Begleitperson _____	69
2.66	Verdeck _____	70
2.67	Kopfstützen _____	71

Modellidentifikation

Das **Straßengestell-Typenschild**, ist auf der rechten Seitenstrebe innen angebracht.

Das **Sitzeinheit-Typenschild**, ist auf der Rückseite der Rückenbasis angebracht.

Bitte geben Sie bei **Ersatzteilbestellungen** die **Seriennummer** an, um eine reibungslose Lieferung zu gewährleisten:

The image displays three HOGGI BINGO Evolution typenschilder (type labels) arranged vertically. Each label contains the following information:


- Farbcode**: 3234-1000-024 (top label), 3234-2000-024 (middle and bottom labels)
- Artikelnummer**: 3234-1000-024 (top label), 3234-2000-024 (middle and bottom labels)
- Größe**: 3234-1000-024 (top label), 3234-2000-024 (middle and bottom labels)
- Seriennummer**: 201535174 (top label), 201535175 (middle and bottom labels)
- CE-Kennzeichnung**: CE (top label), CE (middle and bottom labels)
- Typenbezeichnung / Produktname**: BINGO Evolution (top label), BINGO Evolution (middle and bottom labels)
- Maximales Benutzergewicht / Maximale Zuladung**: 60 kg (top label), 50 kg (middle and bottom labels)
- Hersteller**: HOGGI (top label), HOGGI (middle and bottom labels)
- Herstellungsort**: HOGGI (top label), HOGGI (middle and bottom labels)
- Herstellungsjahr**: 2015 (top label), 2015 (middle and bottom labels)

Additional information on the labels includes the HOGGI logo, company name (HOGGI GmbH), address (Eulerstraße 27, D-56235 Ransbach-Baumbach), and 'MADE IN GERMANY'. The labels also feature a barcode and a CE mark.

Die **Grundausrüstung** beinhaltet:


- Bingo EVO Reha-Kinderwagen (Straßengestell und Sitzeinheit)
- Vorder- und Hinterräder mit Luft- oder PU-Bereifung
- Polsterauflage (IPS)
- Oberschenkelführung
- Kniewinkelanlage,
- Fußbretthalter und Fußbrett

Straßengestell, lenkbar

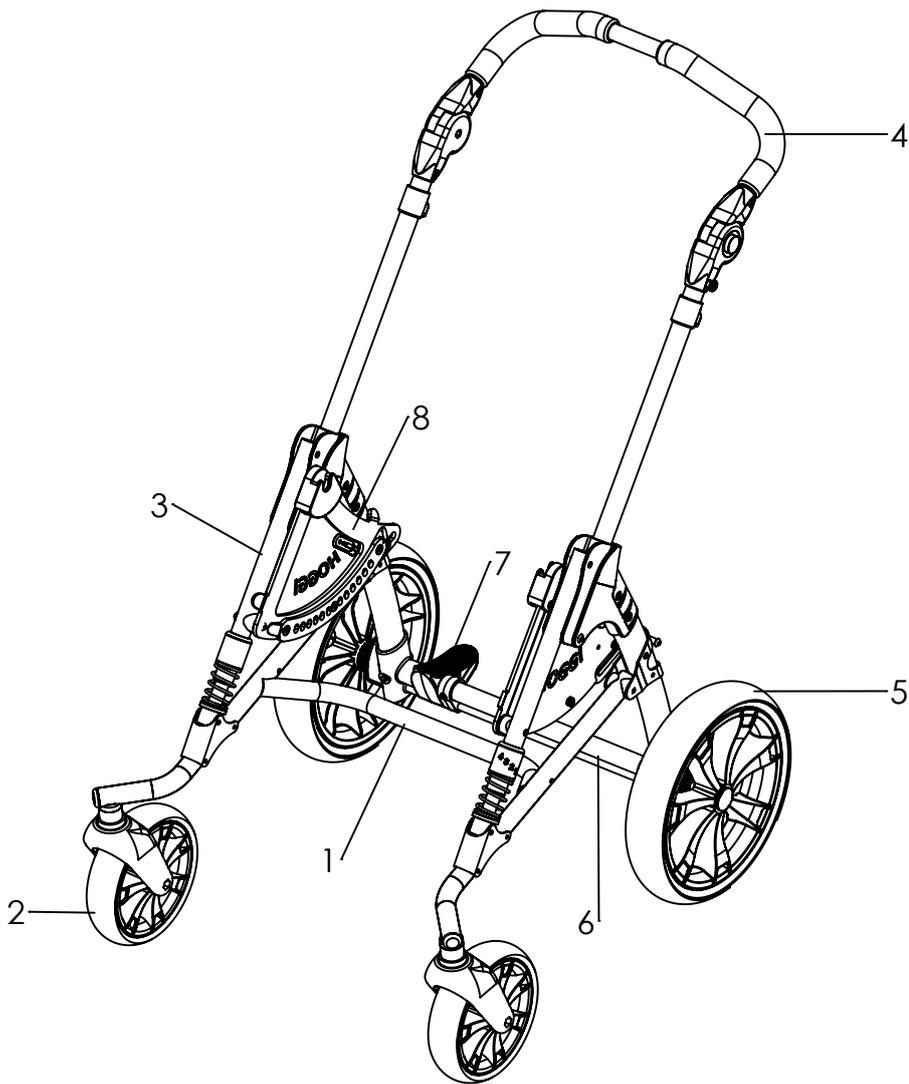


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1-8	3232-1011-032	Straßengestell lenkbar Mini	
	3232-1000-xxx	Straßengestell lenkbar Gr. 1	
	3234-1000-xxx	Straßengestell lenkbar Gr. 2	
	3235-1000-xxx	Straßengestell lenkbar Gr. 2XL	
1	3232-1100E-xxx	Lenkrad-Rahmen Gr. 1	12
	3234-1100E-xxx	Lenkrad-Rahmen Gr. 2	
2	12xx-	Vorderräder	30
3	3231-1300E-xxx	Frontstreben	17
	3231-7400E-xxx	Federung	18
4	3231-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 1	22
	3233-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 2	
	3235-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 2XL	
5	12xx-	Hinterräder	30
6	3231-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 1	20
	3233-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 2	
7	3201-1301E-xxx	Bremse Gr. 1	21
	3203-1301E-xxx	Bremse Gr. 2	
8	3230-1510E-032	Sitzlager Mini links	26
	3230-1520E-032	Sitzlager Mini rechts	
	3231-1510E-xxx	Sitzlager Gr.1 und 2 links	24
	3231-1520E-xxx	Sitzlager Gr.1 und 2 rechts	
	3235-1510E-xxx	Sitzlager Gr.2XL links	25
	3235-1520E-xxx	Sitzlager Gr.2XL rechts	

Straßengestell, starr

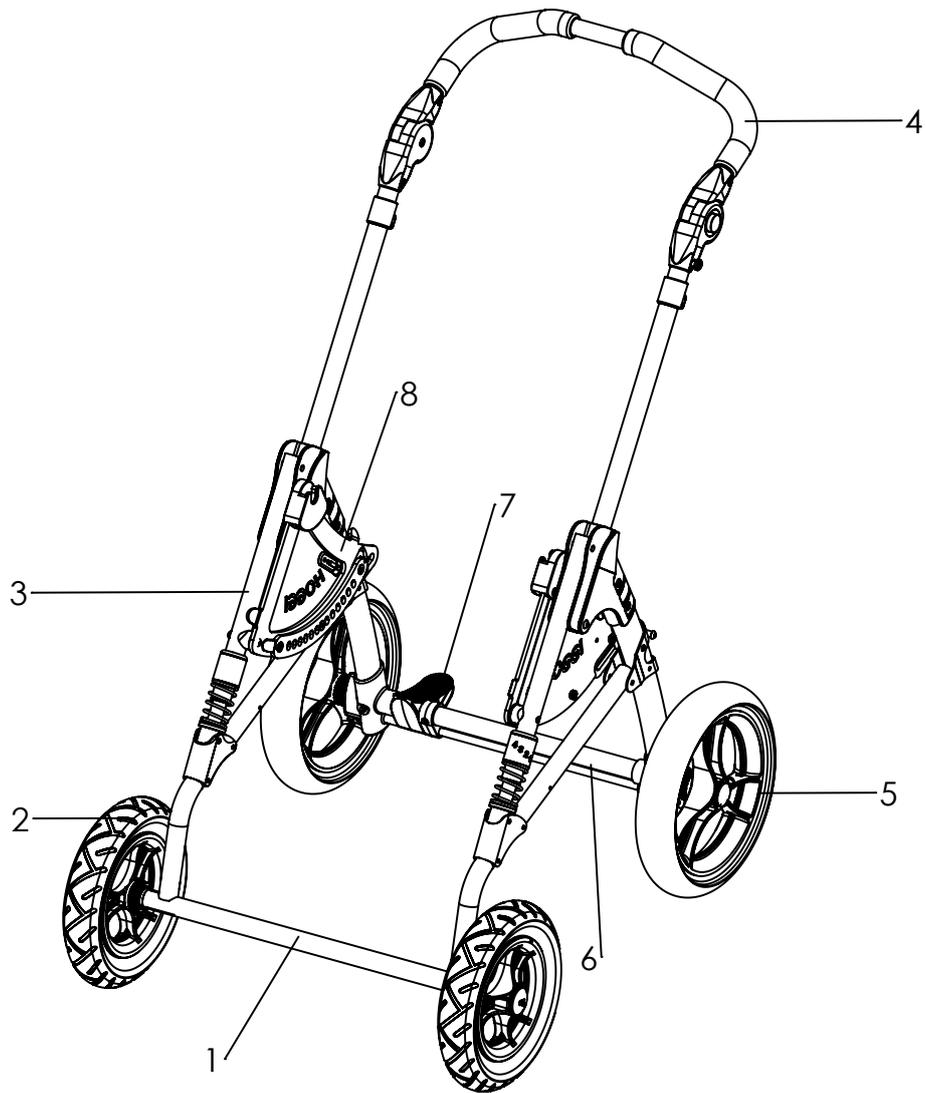


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1-8	3231-1011-032	Straßengestell starr Mini	
	3231-1000-xxx	Straßengestell starr Gr. 1	
	3233-1000-xxx	Straßengestell starr Gr. 2	
1	3231-1100E-xxx	Starr-Rahmen Gr. 1	13
	3233-1100E-xxx	Starr-Rahmen Gr. 2	
2	12xx-	Vorderräder	30
3	3231-1300E-xxx	Frontstreben	17
	3231-7400E-xxx	Federung	18
4	3231-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 1	22
	3233-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 2	
5	12xx-	Hinterräder	30
6	3231-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 1	20
	3233-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 2	
7	3201-1301E-xxx	Bremse Gr. 1	21
	3203-1301E-xxx	Bremse Gr. 2	
8	3231-1510E-xxx	Sitzlager links	24
	3231-1520E-xxx	Sitzlager rechts	
	3230-1510E	Sitzlager Mini links	26
	3230-1520E	Sitzlager Mini rechts	

Straßengestell für Zusatzgeräte

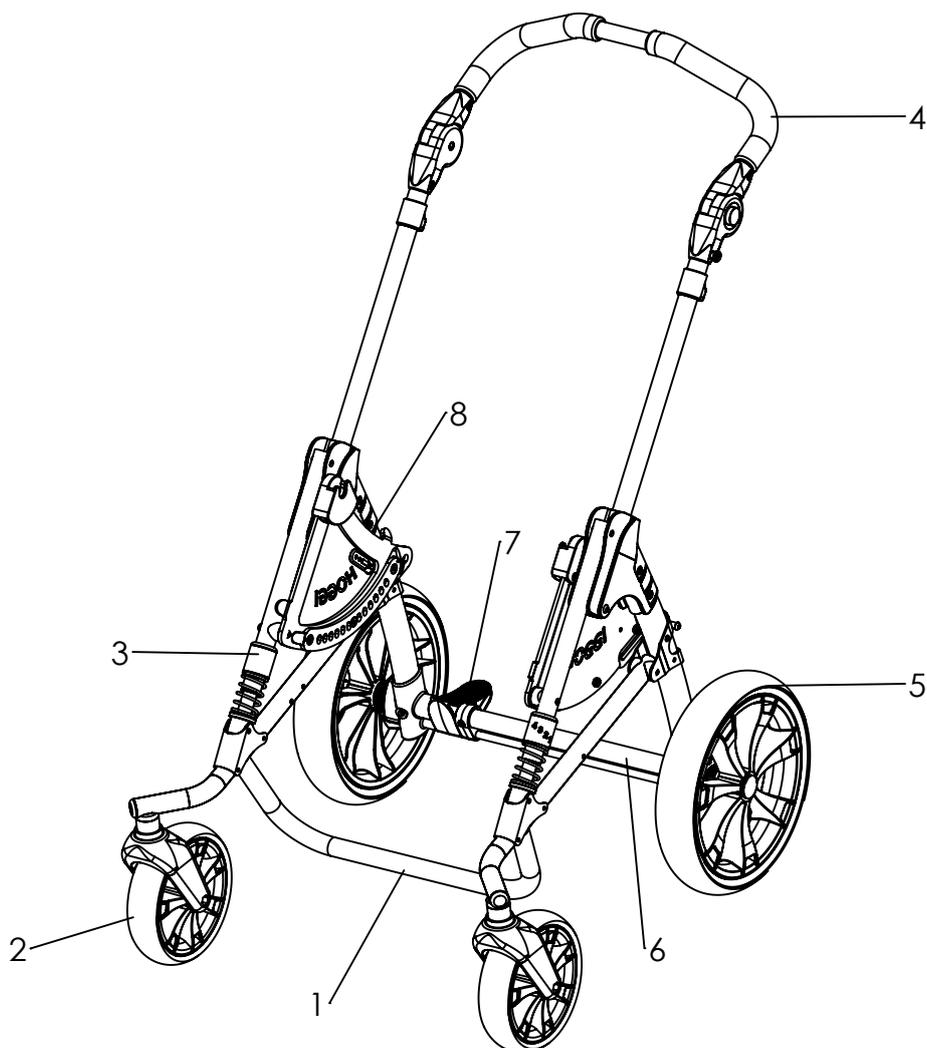


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1-8	3238-1011-032	Straßengestell für Zusatzgeräte Mini	
	3238-1000-xxx	Straßengestell für Zusatzgeräte Gr. 1	
	3239-1000-xxx	Straßengestell für Zusatzgeräte Gr. 2	
	3239-1006-xxx	Straßengestell für Zusatzgeräte Gr. 2XL	
1	3238-1100E-xxx	Straßengestell für Zusatzgeräte Gr. 1	14
	3239-1100E-xxx	Straßengestell für Zusatzgeräte Gr. 2	
2	12xx-	Vorderräder	30
3	3231-1300E-xxx	Frontstreben	17
	3231-7400E-xxx	Federung	18
4	3231-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 1	22
	3233-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 2	
5	12xx-	Hinterräder	30
6	3231-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 1	20
	3233-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 2	
7	3201-1301E-xxx	Bremse Gr. 1	21
	3203-1301E-xxx	Bremse Gr. 2	
8	3230-1510E-032	Sitzlager Mini links	26
	3230-1520E-032	Sitzlager Mini rechts	
	3231-1510E-xxx	Sitzlager Gr.1 und 2 links	24
	3231-1520E-xxx	Sitzlager Gr.1 und 2 rechts	
	3235-1510E-xxx	Sitzlager Gr.2XL links	25
	3235-1520E-xxx	Sitzlager Gr.2XL rechts	

Straßengestell Trike

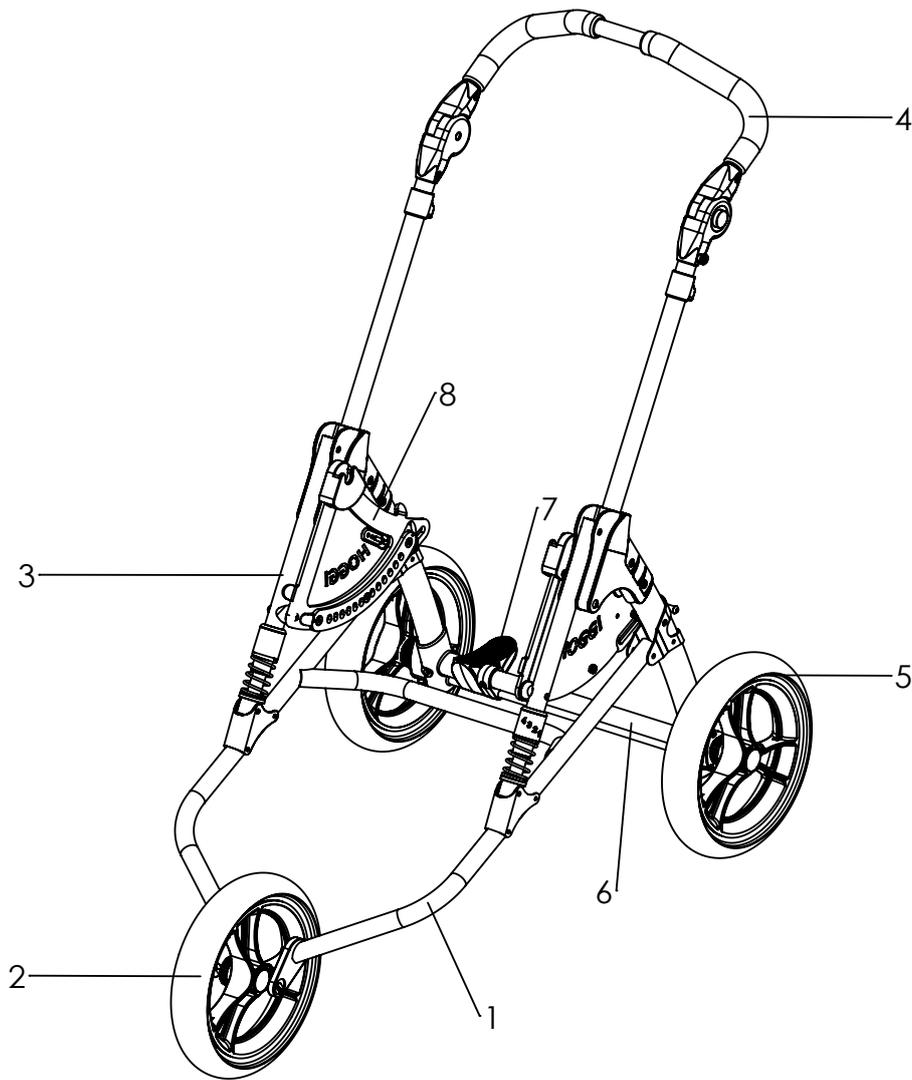


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1-8	3236-1011-032	Straßengestell Trike Mini	
	3236-1000-xxx	Straßengestell Trike Gr. 1	
	3237-1000-xxx	Straßengestell Trike Gr. 2	
1-3	3236-1100E-xxx	Trike-Rahmen Gr. 1	15
	3237-1100E-xxx	Trike-Rahmen Gr. 2	
2	12xx-	Vorderräder	31
3	3231-1300E-xxx	Frontstreben	17
	3231-7400E-xxx	Federung	18
4	3231-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 1	22
	3233-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 2	
5	12xx-	Hinterräder	30
6	3231-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 1	20
	3233-1200E-xxx	Hinterrahmen Gr. 2	
7	3201-1301E-xxx	Bremse Gr. 1	21
	3203-1301E-xxx	Bremse Gr. 2	
8	3230-1510E-xxx	Sitzlager Mini links	26
	3230-1520E-xxx	Sitzlager Mini rechts	
	3231-1510E-xxx	Sitzlager Gr. 1, links	24
	3231-1520E-xxx	Sitzlager Gr. 1, rechts	

Straßengestell Mini

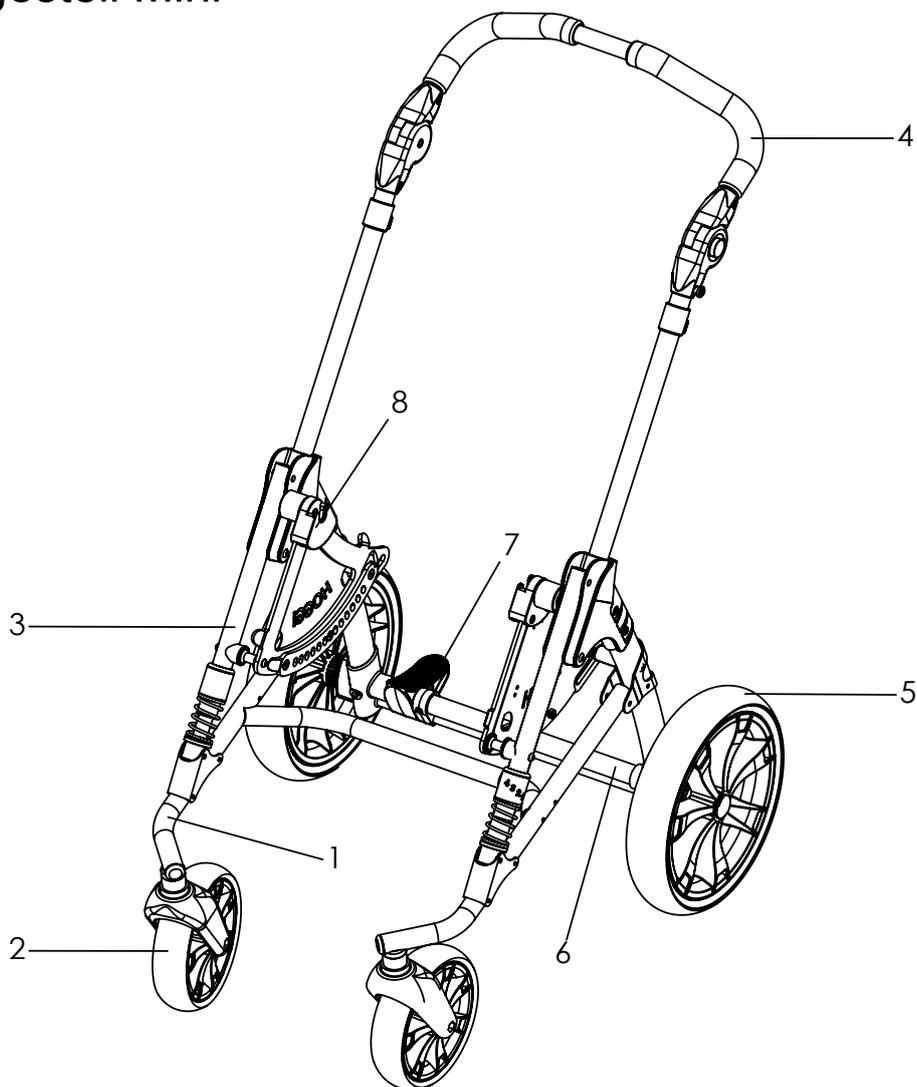


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1-8	3230-1000-032	Straßengestell lenkbar (Invertrahmen) Mini	
1	3230-1100E-032	Lenkradrahmen (Invertrahmen) Mini	16
2	12xx-	Vorderräder	30
3	3231-1300-032	Frontstrebe Federung	17
	3231-7400E-032	Federung	18
4	3231-1400-032	Schiebebügel Gr. 1	22
5	12xx-	Hinterräder	30
6	3231-1200E-032	Hinterrahmen	20
7	3201-1301E-032	Bremse Gr. 1	21
8	3230-1510E-xxx	Sitzlager Mini, links	26
	3230-1520E-xxx	Sitzlager Mini, rechts	

Ersatzteile

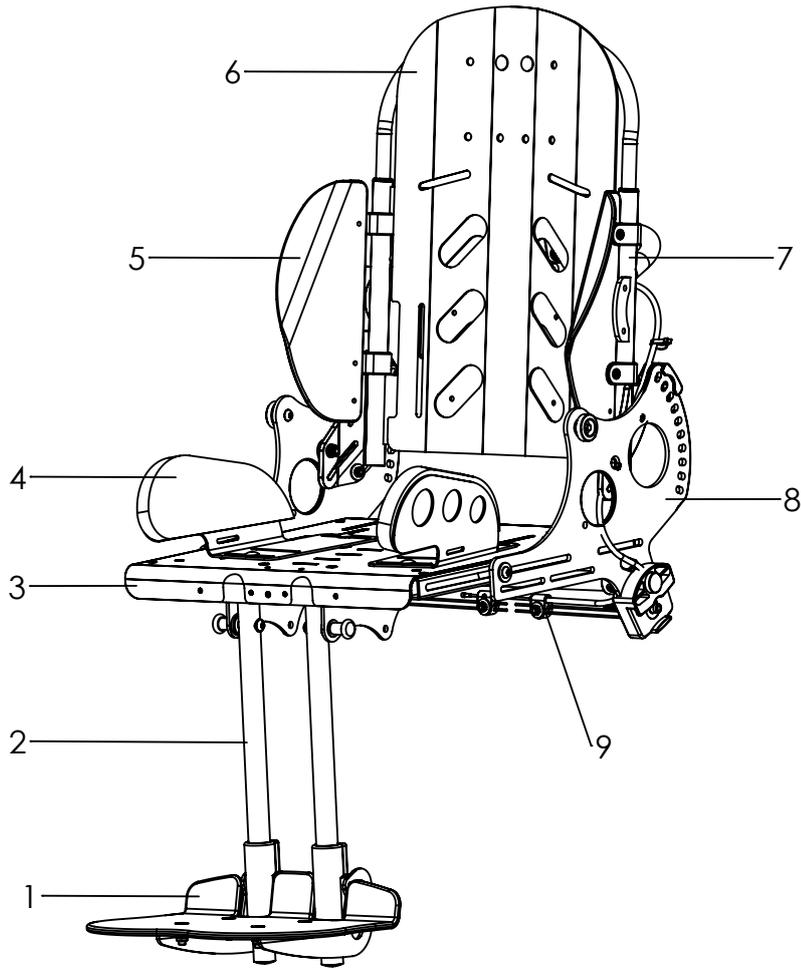


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1-9	3232-2000-xxx	Sitzeinheit, Gr. 1	
	3234-2000-xxx	Sitzeinheit, Gr. 2	
	3235-2000-xxx	Sitzeinheit, Gr. 2XL	
1	323X-2XXXE	Fußbank	44
2	323X-2X00E-xxx	Kniewinkelanlage	40
3	323X-2200-xxx	Sitzfläche	36
4	323X-2900E-xxx	Oberschenkelführung	39
	323X-2600E-xxx	Hüftpelotten	38
5	323X-27XX	Seitenpelotten	48
6	323X-2800E-xxx	Rückeneinschub	49
7	323X-2300E-xxx	Rückenbasis	47
8	323X-2100E-xxx	Sitzbasis	33
9	3231-1900E	Auslösung Kantelung	34

Ersatzteile

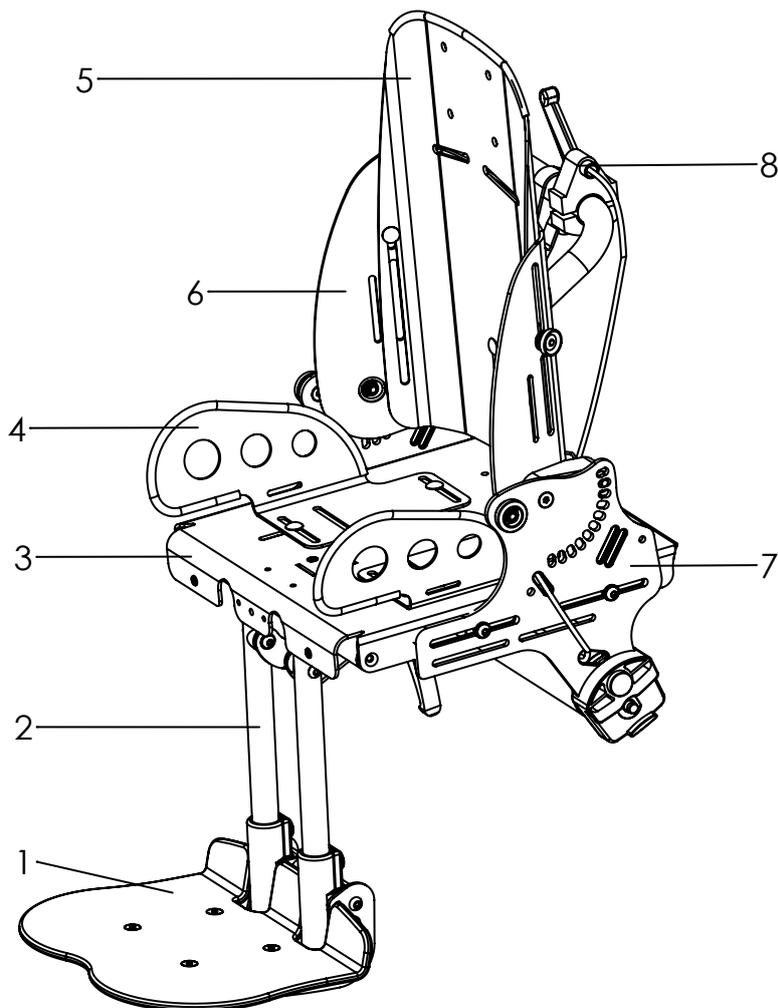

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Seite
1-6	3230-2000-032	Sitzeinheit Mini	
1	323X-2XXXE	Fußbank	44
2	3230-2400-032	Kniewinkelanlage	43
3	3230-2200E-032	Sitzfläche Mini	37
4	3230-290X-032	Oberschenkelführung Mini	39
	3230-2600E-032	Hüftpelotten Mini	38
5	3230-2302E-032	Rückeneinschub Mini	51
6	3230-2301E-032	Rückenbasis Mini	50
7	3230-2100E-032	Sitzbasis Mini	33
8	3230-1900E	Auslösung Kantelung, Mini	35


Ersatzteile

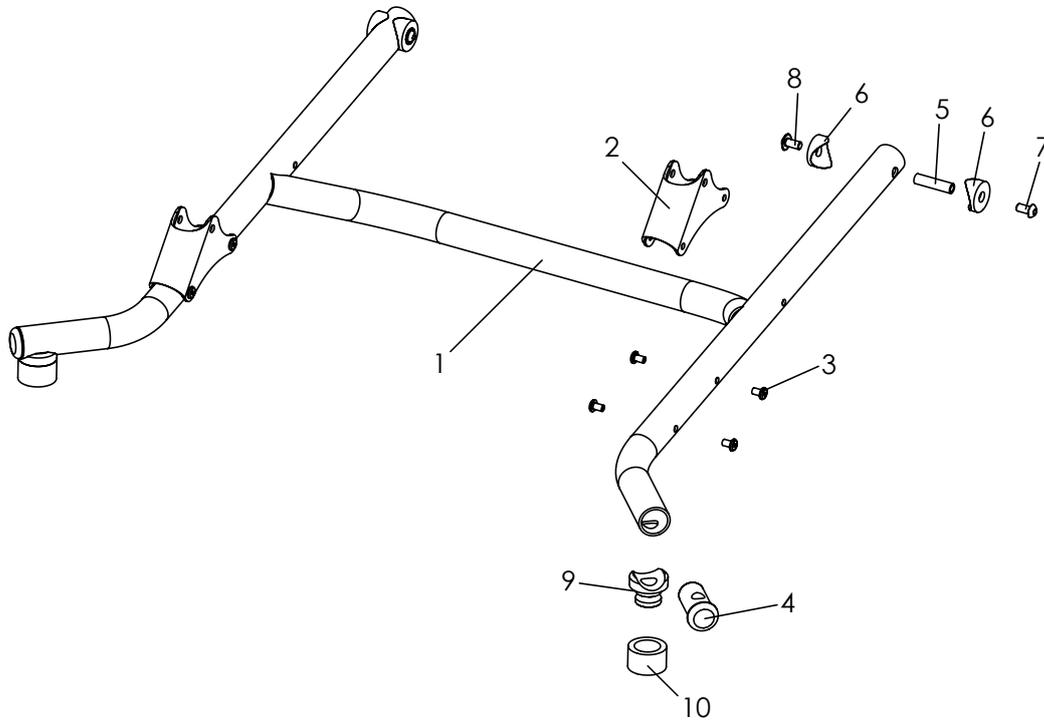

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3232-1100E-xxx	Lenkradrahmen Gr. 1, komplett	1	St
	3234-1100E-xxx	Lenkradrahmen Gr. 2, komplett	1	St
1-4	3232-1110E-xxx	Lenkradrahmen Gr. 1	1	St
	3234-1110E-xxx	Lenkradrahmen Gr. 2	1	St
2	3231-1120-xxx	Frontstrebenlager	2	St
3	1069-0004	Blindniete schwarz, F4,8x10	8	St
4	3202-1130	Kloben	2	St
5	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	St
6	1111-0012	Kehlscheibe 25x8,4x3	4	St
7*	1029-6001	Linsenschraube Tufflock M6x12, bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz Tufflock, M6x12, bei Rahmenfarbe 032	2	St
8	1030-0612	Linsen- Flanschkopfschraube M6x12	2	St
9	3202-1140	Distanzbuchse	2	St
10	3202-1151	Abdeckring Schaumstoff	2	St

*Schrauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!


Ersatzteile

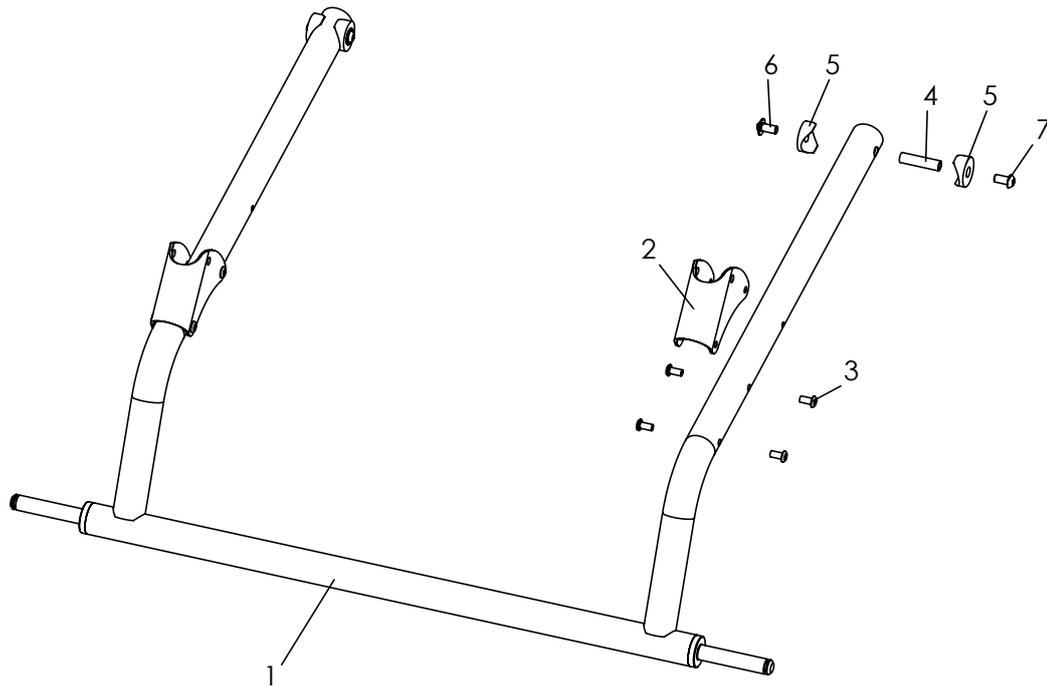

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3231-1100E-xxx	Starr-Rahmen Gr. 1, komplett	1	St
	3233-1100E-xxx	Starr-Rahmen Gr. 2, komplett	1	St
1-3	3231-1110E-xxx	Starr-Rahmen Gr. 1	1	St
	3233-1110E-xxx	Starr-Rahmen Gr. 2	1	St
2	3231-1120-xxx	Frontstrebenlager	2	St
3	1069-0004	Blindniete schwarz, F4,8x10	8	St
4	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	St
5	1111-0012	Kehlscheibe 25x8,4x3	4	St
6	1030-0612	Linsen-Flanschkopfschraube M6x12	2	St
7*	1029-6001	Linsenschraube Tufflock M6x12, bei Rahmfarbe 024	2	St
	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz Tufflock, M6x12, bei Rahmfarbe 032	2	St

**Schrauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!*


Ersatzteile

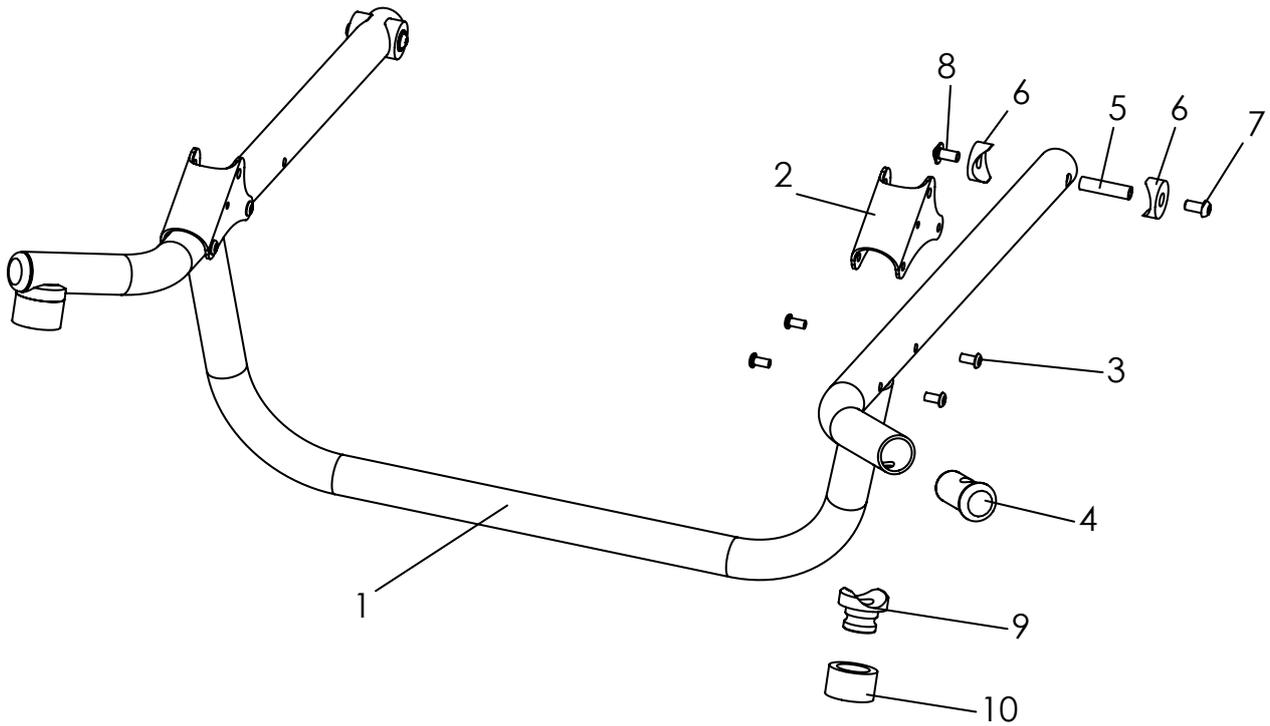

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3238-1100E-xxx	Lenkradrahmen für Zusatzgeräte Gr. 1	1	ST
	3239-1100E-xxx	Lenkradrahmen für Zusatzgeräte Gr. 2	1	ST
1-4	3238-1110E-xxx	Lenkradrahmen für Zusatzgeräte Gr. 1	1	ST
	3239-1110E-xxx	Lenkradrahmen für Zusatzgeräte Gr. 2	1	ST
2	3231-1120-xxx	Frontstrebenlager	2	ST
3	1069-0004	Blindniete schwarz, F4,8x10	8	ST
4	3202-1130	Kloben	2	ST
5	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	ST
6	1111-0012	Kehlscheibe 25x8,4x3	4	ST
7*	1029-6001	Linsenschraube Tufflock M6x12, bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz Tufflock, M6x12, bei Rahmenfarbe 032	2	St
8	1030-0612	Linsen- Flanschkopfschraube M6x12	2	St
9	3202-1140	Distanzbuchse	2	St
10	3202-1151	Abdeckring Schaumstoff	2	St

*Schrauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!


Ersatzteile

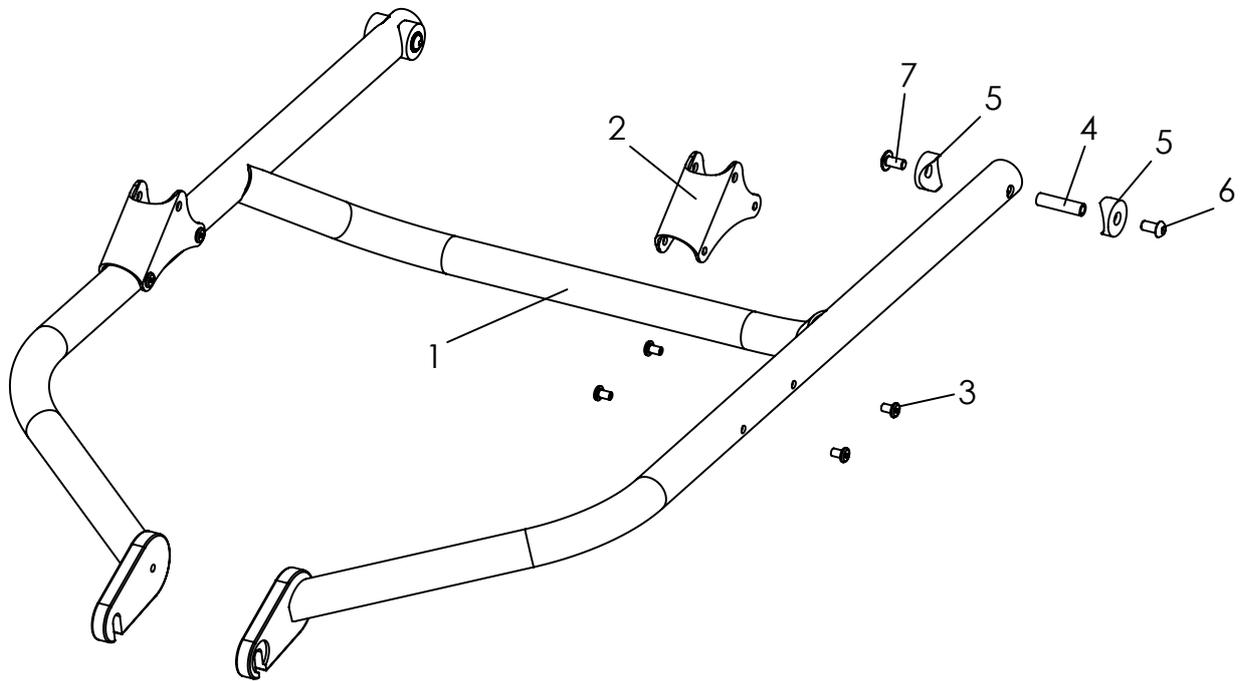

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3236-1100E-xxx	Trike-Rahmen Gr.1, komplett	1	St
	3237-1100E-xxx	Trike-Rahmen Gr. 2, komplett	1	St
1-3	3236-1110E-xxx	Trike-Vorderrahmen Gr. 1	1	St
	3237-1110E-xxx	Trike-Vorderrahmen Gr. 2	1	St
2	3231-1120	Frontstrebenlager	2	St
3	1069-0004	Blindniete schwarz, F4,8x10	8	St
4	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	St
5	1111-0012	Kehlscheibe 24x8,4x3	4	St
6*	1029-6001	Linsenschraube Tufflock M6x12, bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz Tufflock, M6x12, bei Rahmenfarbe 032	2	St
7	1030-0612	Linsen-Flanschkopfschraube M6x12	2	St

**Schrauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!*


Ersatzteile

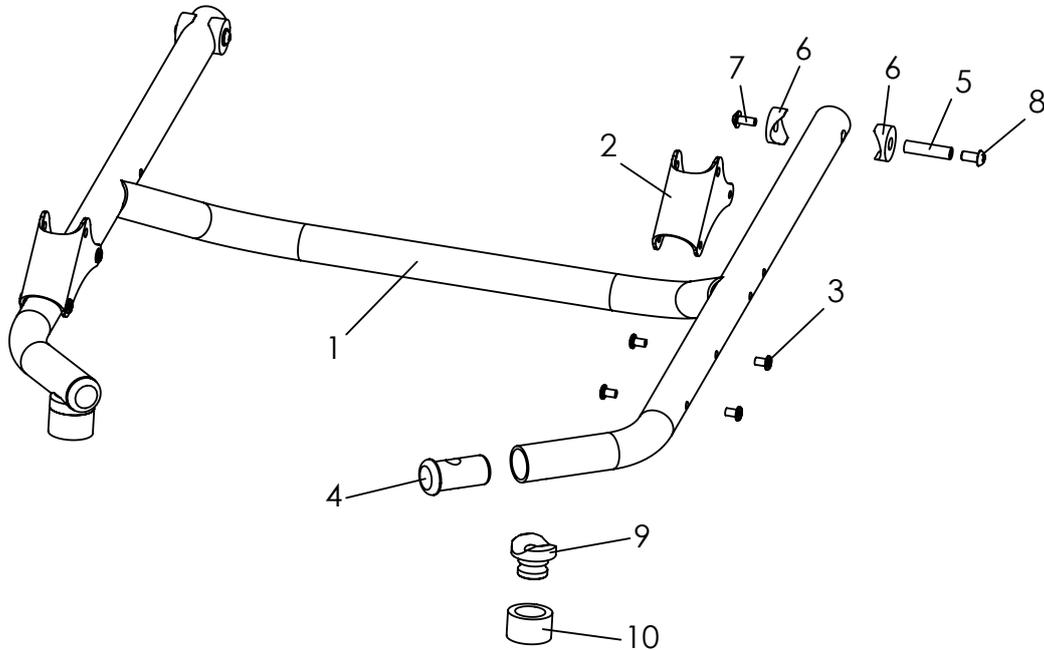

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3230-1100E-032	Lenkradrahmen Mini	1	St
1-4	3230-1110E-032	Lenkrahmen Mini	1	St
2	3231-1120-032	Frontstrebenlager	2	St
3	1069-0004	Blindniete F4,8x10	8	St
4	3202-1130	Kloben	2	St
5	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	St
6	1111-0012	Kehlscheibe 24x8,4x3	4	St
7	1030-0612	Linsen-Flanschkopfschraube M6x12	2	St
8*	1029-6001	Linsenschraube Tufflock M6x12, bei Rahmfarbe 024	2	St
	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz Tufflock, M6x12, bei Rahmfarbe 032	2	St
9	3202-1140	Distanzbuchse	2	St
10	3202-1151	Abdeckring	2	St

**Schrauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!*


Ersatzteile

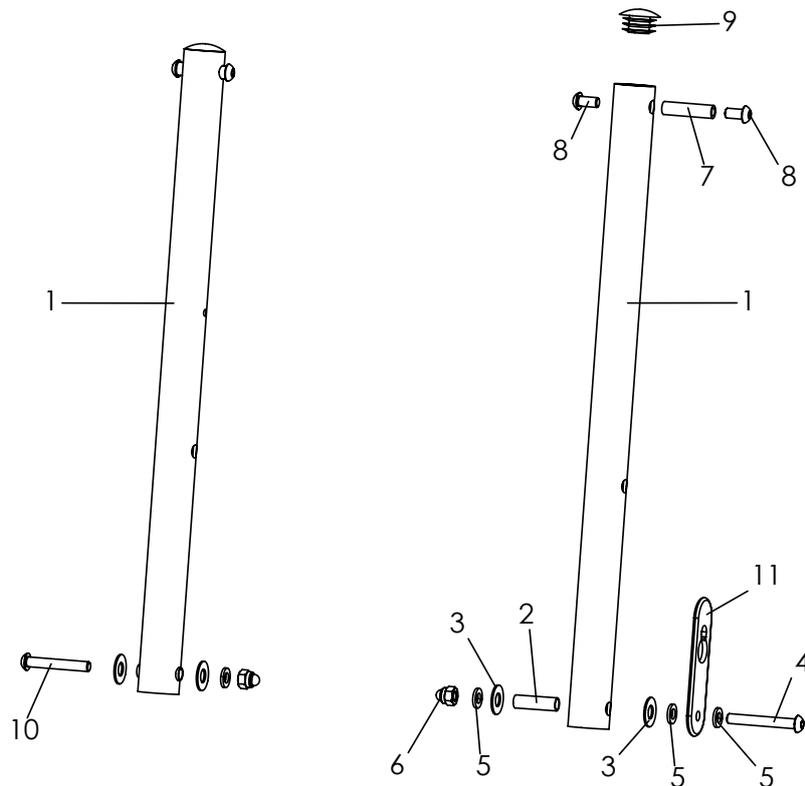

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3231-1300E-xxx	Frontstreben, Komplett	1	Paar
1	3231-1310-xxx	Frontstrebe	2	St
2	1114-0025	Buchse verz 8x0,8x27	2	St
3	1113-0003	PA Scheibe schwarz	4	St
4	1029-0645	Linsenschraube M6x45, für linke Strebe, (nur in silber)	2	St
5	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
6	1044-0006	Hutmutter selbstsichernd M6	2	St
7	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x32	2	St
8	1029-0612	Linsenschraube M6x12, bei Rahmenfarbe 024	4	St
	1029-0612-033	Linsenschraube schwarz M6x12, bei Rahmenfarbe 032		
9	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25	2	St
10*	1029-0640	Linsenschraube M6x40, für rechte Strebe bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1029-0640-033	Linsenschraube schwarz M6x40, für rechte Strebe, bei Rahmenfarbe 032	2	St
11	3231-1431	Fanglasche für Auffaltsicherung, linke Strebe*	1	St
	3235-1431	* Bei Gr.2XL Fanglasche Lang	1	St

*Scharauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!

Ersatzteile

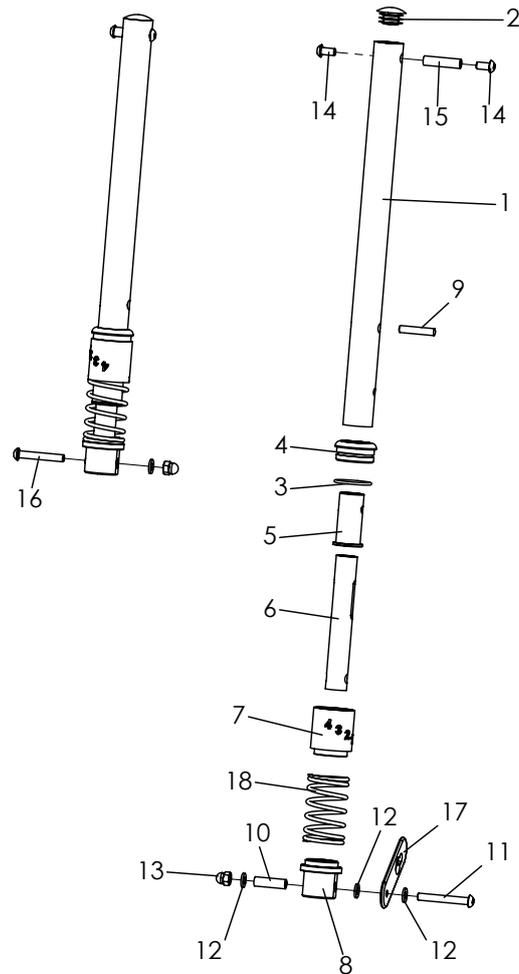


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-16	3231-7400E-xxx	Federung Bingo Evolution, komplett	1	Set
1	3231-7431-xxx	Frontstrebe Federung	2	St
2	1141-0009	Lamellenstopfen SFL 25	2	St
3	1150-0012	O-Ring 8x3	2	St
4	3231-7436	Abschlussbuchse	2	St
5	3231-7435	Führungsbuchse Federung	2	St
6	3231-7433-006	Führungsrohr Federung	2	St
7	3231-7434	Federlager oben	2	St
8	3231-7432	Federlager unten	2	St
9	1071-0630	Zylinderstift 6x30	2	St
10	1114-0025	Buchse verz 8x0,8x27	2	St
11	1029-0645	Linsenschraube M6x45, für linke Strebe, (nur in silber)	1	St
12	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
13	1044-0006	Hutmutter M6	2	St
14*	1029-0612	Linsenschraube M6x12, bei Rahmenfarbe 024	4	St
	1029-0612-033	Linsenschraube schwarz M6x12, bei Rahmenfarbe 032		
15	1114-0027	Gewindebuchse 8xM6x12	2	St
16*	1029-0640	Linsenschraube M6x40, für rechte Strebe bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1029-0640-033	Linsenschraube schwarz M6x40, für rechte Strebe, bei Rahmenfarbe 032	2	St
17	3231-1431	Fanglasche für Auffaltsicherung, linke Strebe	1	St
	3235-1431	Bei Gr.2XL Fanglasche Lang	1	St
18	1131-901X	Druckfeder Set	1	Set

Für richtige Feder Siehe nächste Seite!

*Scharauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!

Ersatzteile

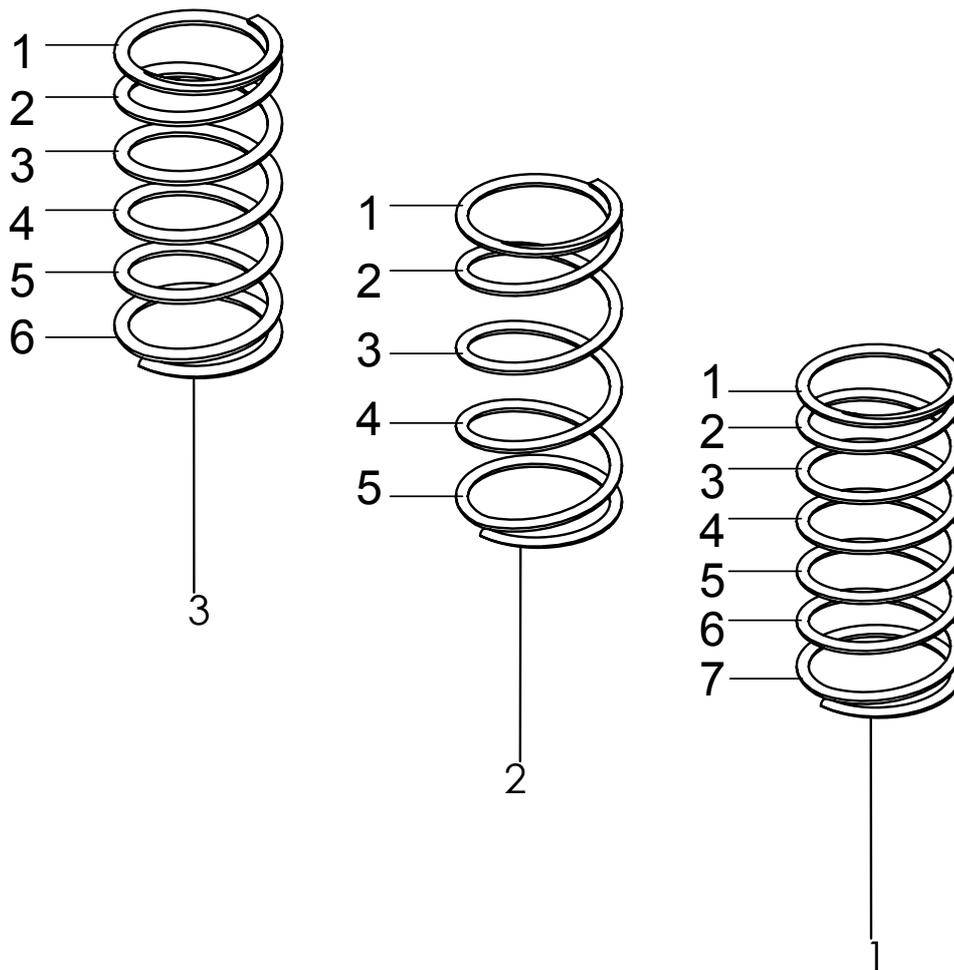


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1131-9017E-022	Federsatz, zuladung bis 15kg, Standardfarbe, signal weiss	1	Set
	1131-9017E-xxx	Federsatz, zuladung bis 15kg, Farbe passend zu Sitzpolster	1	Set
2	1131-9018E-022	Federsatz, zuladung bis 25kg, Standardfarbe, signal weiss	1	Set
	1131-9018E-xxx	Federsatz, zuladung bis 25kg, Farbe passend zu Sitzpolster	1	Set
3	1131-9019E-022	Federsatz, zuladung ab 25kg, Standardfarbe, signal weiss	1	Set
	1131-9019E-xxx	Federsatz, zuladung ab 25kg, Farbe passend zu Sitzpolster	1	Set

bei Bestellung **xxx** durch Farbcode ersetzen!

338	339	340	344	345
Sand / Eisengrau	Türkis / Eisengrau	Pink / Eisengrau	Schwarz Karo / Eisengrau	Rot / Eisengrau


1131-9018E	Federsatz, zuladung bis 25kg, gelb	1	Set
1131-9019E	Federsatz, zuladung ab 25kg, rot	1	Set

Ersatzteile

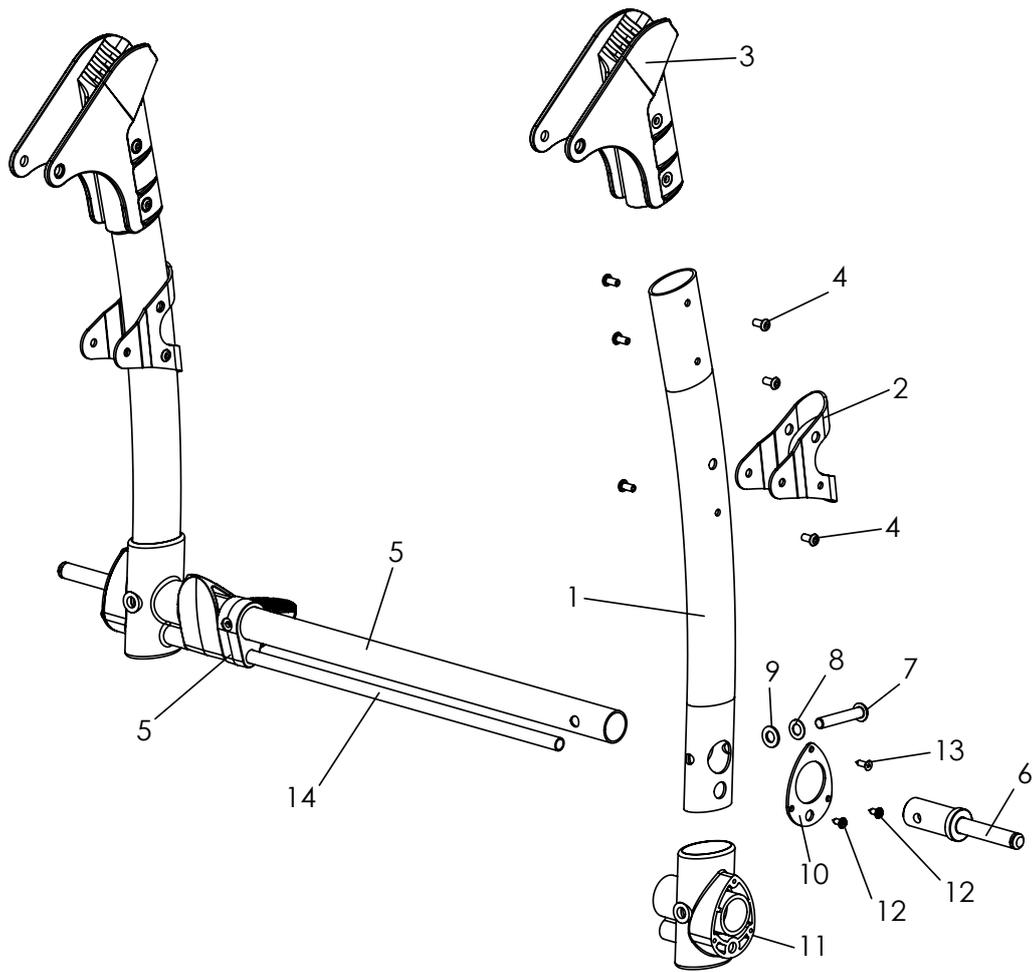


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-13	3231-1200E-xxx	Hinterrahmen, Gr. 1, komplett	1	St
	3233-1200E-xxx	Hinterrahmen, Gr. 2, komplett	1	St
1-4	3231-1211E-xxx	Seitentrebe, komplett	2	St
1	3231-1211-xxx	Seitenstrebe hinten	2	St
2	3231-1212-xxx	Gelenkbandage	2	St
3	3231-1213	Hinterrahmengelenk	2	St
4	1069-0004	Blindniete schwarz, F4,8x10	12	St
5	3201-1220E-xxx	Achsrohr mit Bremsstangelager Gr. 1	1	St
	3203-1220E-xxx	Achsrohr mit Bremsstangelager Gr. 2	1	St
6*	3201-1240	Achsstummel	2	St
7	1029-0845	Linsenschraube M8x45	2	St
8	1052-0008	Federscheibe B8	2	St
9	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
10-12	3201-1280E	Verbinder mit Verbindungselementen	2	St
10	3201-1281	Verstärkerplatte	2	St
11	3201-1280	Verbinder	2	St
12	1039-0001	Kunststoffschraube Flansch	2	St
13	1039-0006	Kunststoffschraube Senk	1	St
14	320X-1301-xxx	Bremse (Siehe nächste Seite!)	1	St
*6-9	3201-1240E	Achsstummel als Ersatzteil	1	St

Ersatzteile

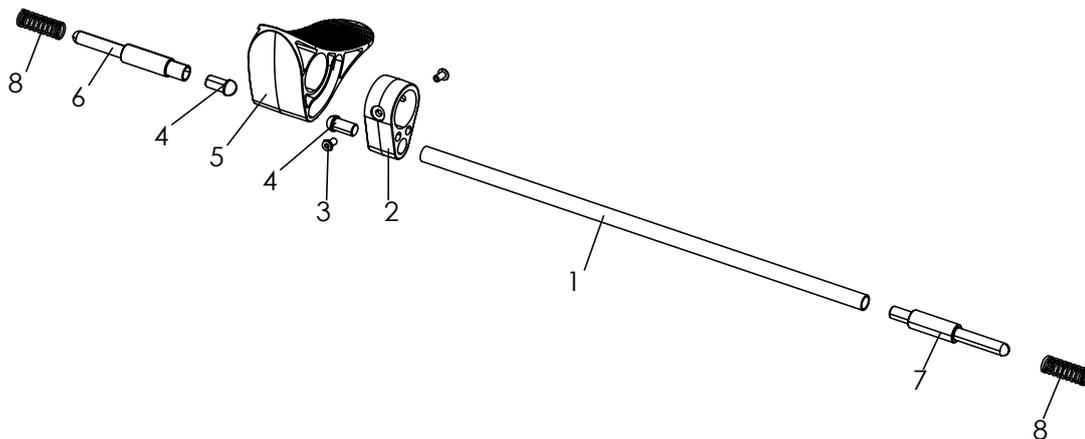

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3201-1301E-xxx	Bremse Gr. 1, Komplett	1	St
	3203-1301E-xxx	Bremse Gr. 2, Komplett	1	St
1	3201-1330-xxx	Bremsstange Gr. 1	1	St
	3203-1330-xxx	Bremsstange Gr. 2	1	St
2	3201-1320	Bremsstangenlager	1	St
3	1062-0408	Blindniete F4x8	2	St
4	3201-1340	Gleitstopfen	2	St
5	3201-1310	Bremspedal	1	St
6	3201-1360	Riegel rechts	1	St
7	3201-1350	Riegel links	1	St
8	1131-0034	Druckfeder D-180Q	2	St

Ersatzteile

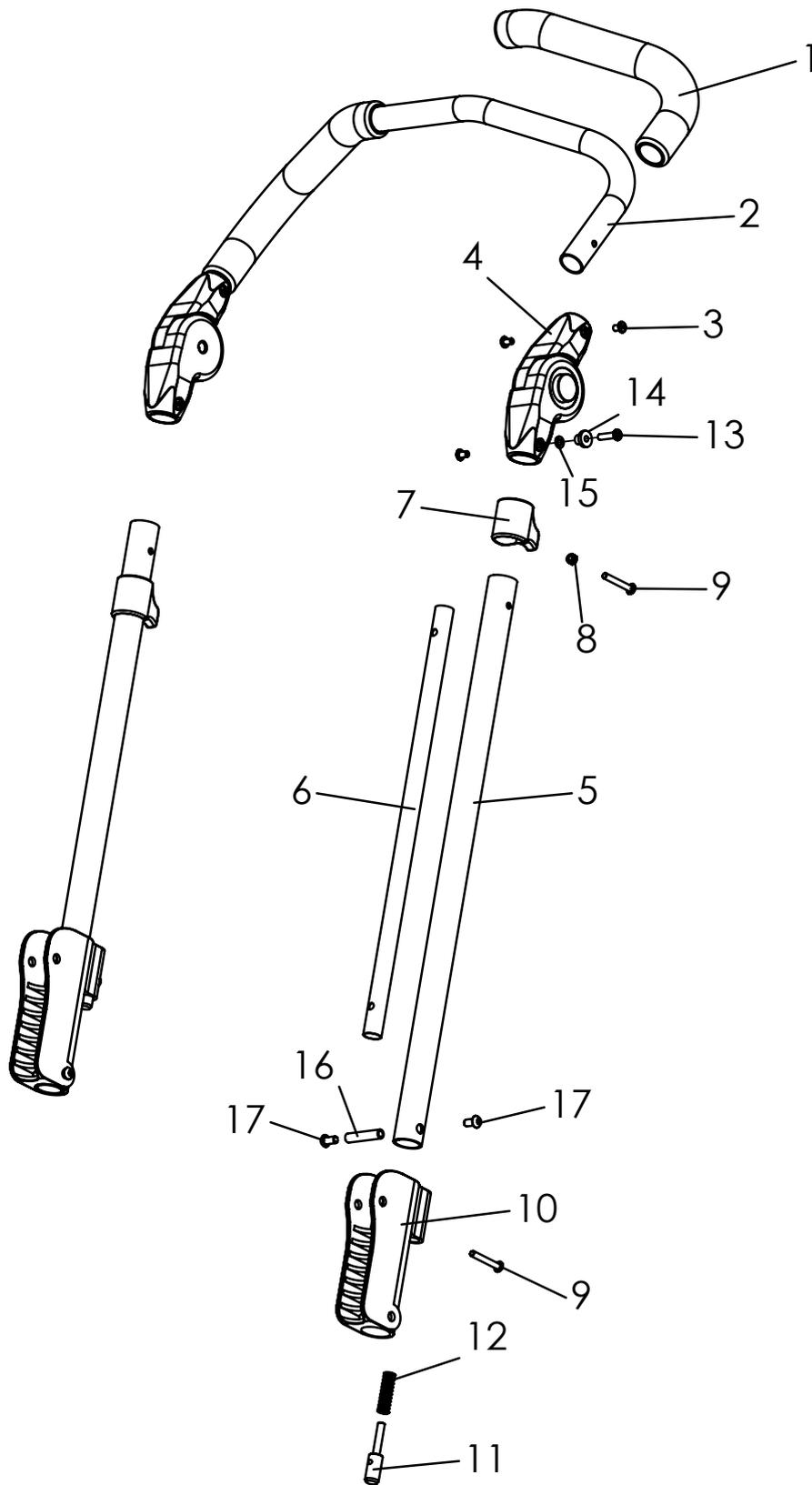


Ersatzteile

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-17	3231-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 1	1	St
	3233-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 2	1	St
	3235-1400E-xxx	Schiebebügel Gr. 2XL	1	St
1	1143-0001	Griffüberzug, schwarz	2	St
2+3	3201-1420E-xxx	Schiebebügeloberteil Gr. 1 mit Verbindungselemnte	1	St
	3203-1420E-xxx	Schiebebügeloberteil Gr. 2 mit Verbindungselemnte	1	St
	3233-1420E-xxx	Schiebebügeloberteil Gr. 2XL mit Verbindungselemnte	1	St
2	3201-1420-xxx	Schiebebügeloberteil Gr. 1	1	St
	3203-1420-xxx	Schiebebügeloberteil Gr. 2	1	St
	3233-1421-xxx	Schiebebügeloberteil Gr. 2XL	1	St
3*	1069-0003	Blindniete F5x8 schwarz, bei Rahmenfarbe 032	7	St
	1062-0508	Blindniete F5x8 silber, bei Rahmenfarbe 024	7	St
4	1129-0009	Rastergelenk	1	Paar
5	3231-1412-xxx	Schiebebügelunterteil Gr. 1 und 2	2	St
	3235-1412-xxx	Schiebebügelunterteil Gr. 2XL	2	St
6	3231-1415	Zugrohr Gr. 1 und 2	2	St
	3235-1415	Zugrohr Gr. 2XL	2	St
7	3231-1414	Auslöser	2	St
8	1042-0005	Sechskantmutter, selbstsichernd M5	2	St
9	1034-0535	Torxschraube M5x35	4	St
10	3231-1411	Schiebebügelgelenk	2	St
11	3231-1413	Falt-Sicherungsriegel	2	St
12	1131-0043	Druckfeder D-143F	2	St
13	1062-0520	Blindniete F5x20	1	St
14	3231-1432	Isolierhülse	1	St
15	1051-0005	Scheibe A5,3	1	St
16	1114-0028	Gewindebuchse 8xM6x38	2	St
17*	1029-0612	Linsenschraube M6x12, silber, bei Rahmenfabe 024	4	St
	1029-0612-033	Linsenschraube M6x12, schwarz, bei Rahmenfarbe 032	4	St

**Nieten und Schrauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!*


Ersatzteile

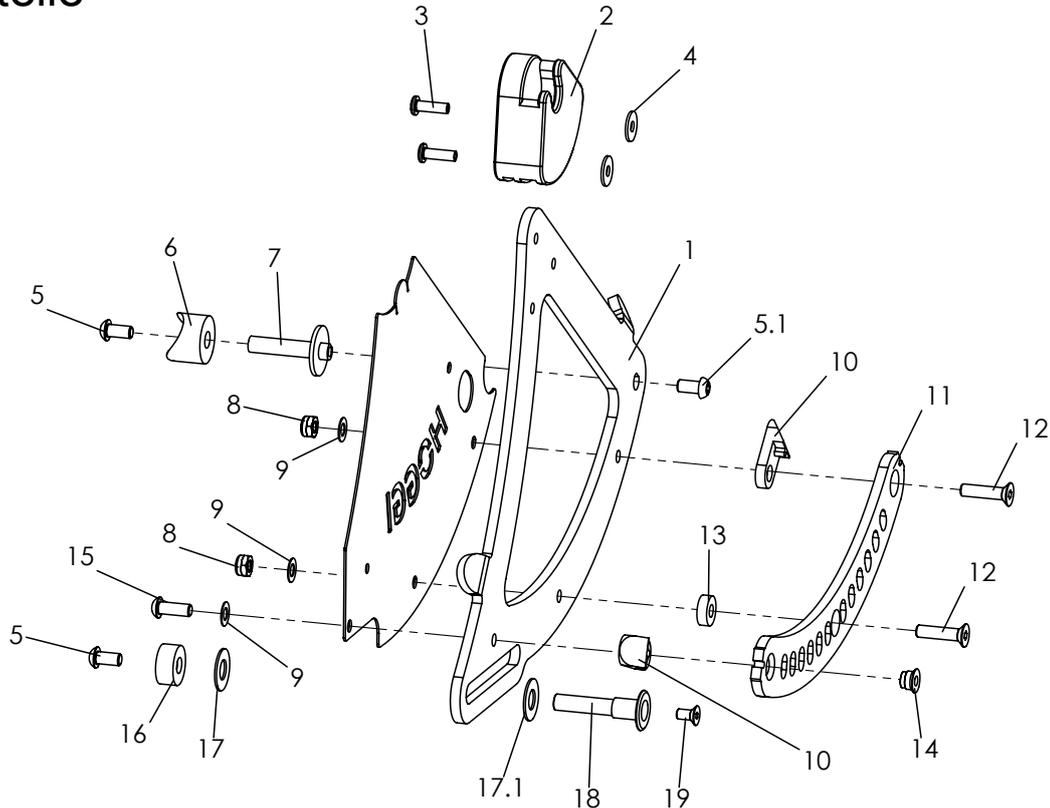

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-21	3231-1510E-xxx	Sitzlager, links Gr. 1 und 2, komplett, abgebildet	1	St
	3231-1520E-xxx	Sitzlager, rechts Gr. 1 und 2, komplett, abgebildet	1	St
1-4	3231-1511E-xxx	Sitzlagerplatte, links mit Kantellager	1	St
	3231-1512E-xxx	Sitzlagerplatte, rechts mit Kantellager	1	St
1	3231-1511-xxx	Sitzlagerplatte links	1	St
	3231-1512-xxx	Sitzlagerplatte rechts	1	St
2	3231-1516	Kantellager	1	St
3	1062-0516	Blindniete F5x16	2	St
4	1055-0005	Scheibe A5,3	2	St
5*	1029-0612	Linsenschraube silber M6x12, bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1029-0612-033	Linsenschraube schwarz M6x12, bei Rahmenfarbe 032	2	St
5.1*	1029-6001	Linsenschraube silber M6x12 Tufflock, bei Rahmenfarbe 024	1	St
	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz M6x12 Tufflock, bei Rahmenfarbe 032	1	St
6	1111-0013	Kehlscheibe 24x8,4x10	1	St
7	3231-1515	Lagerachse Frontstrebe	1	St
8	1042-0006-033	Sechskantmutter selbstsichernd schwarz M6	2	St
9	1052-0006-033	Federscheibe schwarz B6	3	St
10	3231-1514	Riegelrampe	2	St
11	3231-1525-006	Kantelkufe links	1	St
	3231-1526-006	Kantelkufe rechts	1	St
12	1024-0625-033	Senkschraube M6x25, schwarz	2	St
13	1113-0051	Distanzstück 15x6,4x5	1	St
14	3231-1527	Gewindeinsatz	1	St
15	1029-0616-033	Linsenschraube M6x16 schwarz	1	St
16	3231-1518	Distanzlager Führungswelle	1	St
17	1113-0056	Scheibe PA natur 10,5x21x0,8	1	St
17.1	1113-0068	Scheibe PA natur 10,0x18,0x0,8 DIN	1	St
18	3231-1517	Führungswelle Sitzlager	1	St
19	1024-0510	Senkschraube M5x10	1	St

*Scharauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!


Ersatzteile

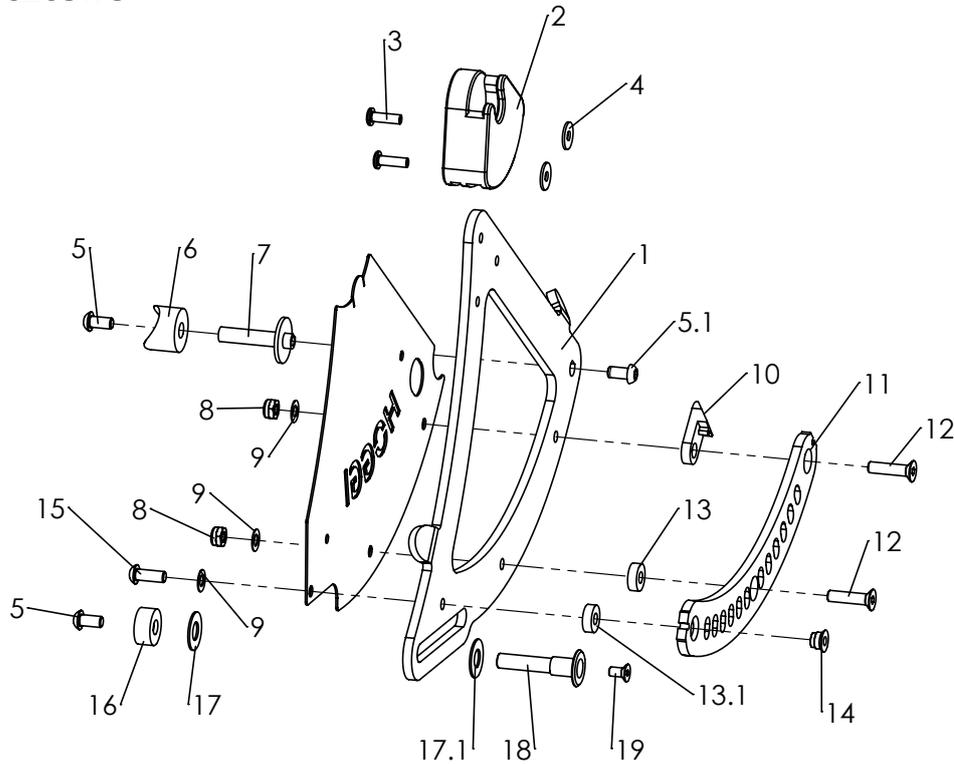

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-21	3235-1510E-xxx	Sitzlager links komplett, abgebildet nur für Gr.2XL	1	St
	3235-1520E-xxx	Sitzlager, rechts, komplett, nur für gr. 2XL	1	St
1-4	3231-1511E-xxx	Sitzlagerplatte, links mit Kantellager	1	St
	3231-1512E-xxx	Sitzlagerplatte, rechts mit Kantellager	1	St
1	3231-1511-xxx	Sitzlagerplatte links	1	St
	3231-1512-xxx	Sitzlagerplatte rechts	1	St
2	3231-1516	Kantellager	1	St
3	1062-0516	Blindniete F5x16	2	St
4	1055-0005	Scheibe A5,3	2	St
5*	1029-0612	Linsenschraube silber M6x12, bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1029-0612-033	Linsenschraube schwarz M6x12, bei Rahmenfarbe 032	2	St
5.1*	1029-6001	Linsenschraube silber M6x12 Tufflock, bei Rahmenfarbe 024	1	St
	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz M6x12 Tufflock, bei Rahmenfarbe 032	1	St
6	1111-0013	Kehlscheibe 24x8,4x10	1	St
7	3231-1515	Lagerachse Frontstrebe	1	St
8	1042-0006-033	Sechskantmutter selbstsichernd schwarz M6	2	St
9	1052-0006-033	Federscheibe schwarz B6	3	St
10	3231-1514	Riegelrampe	2	St
11	3231-1525-006	Kantelkufe links	1	St
	3231-1526-006	Kantelkufe rechts	1	St
12	1024-0625-033	Senkschraube M6x25, schwarz	2	St
13	1113-0051	Distanzstück 15x6,4x5	1	St
13.1	1113-0031	Distanzstück 8,4x15x5	1	St
14	3231-1527	Gewindeeinsatz	1	St
15	1029-0616-033	Linsenschraube M6x16 schwarz	1	St
16	3231-1518	Distanzlager Führungswelle	1	St
17	1113-0056	Scheibe PA natur 10,5x21x0,8	1	St
17.1	1113-0068	Scheibe PA natur 10,0x18,0x0,8 DIN	1	St
18	3231-1517	Führungswelle Sitzlager	1	St
19	1024-0510	Senkschraube M5x10	1	St


**Scharauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!*

Ersatzteile

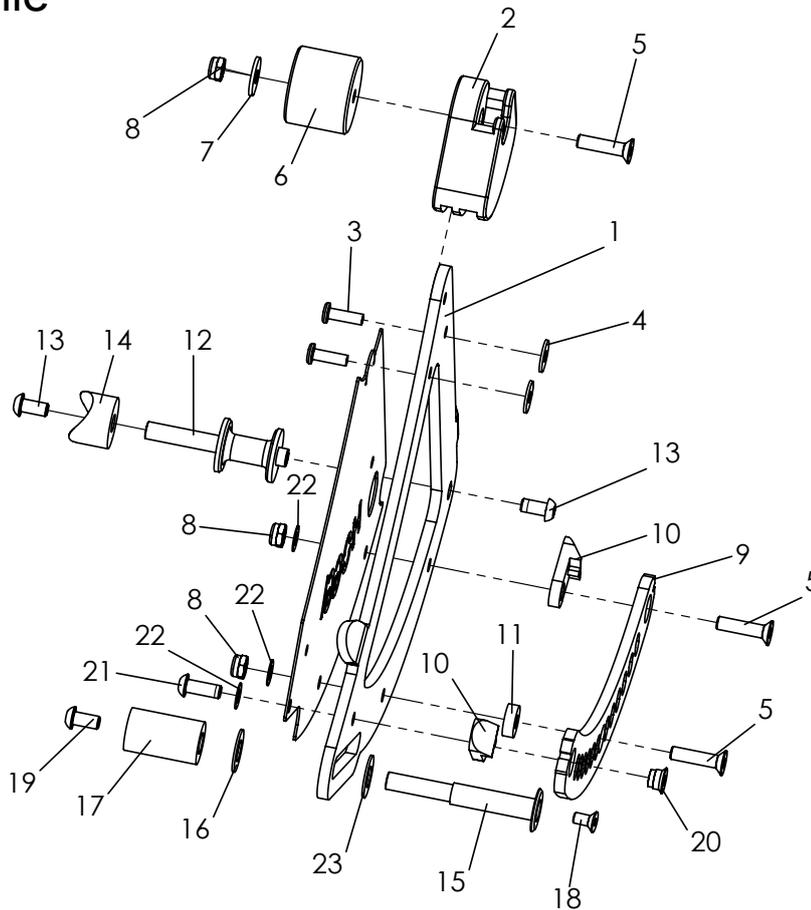


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-23	3230-1510E-032	Sitzlager Mini, links, komplett, abgebildet	1	St
	3230-1520E-032	Sitzlager Mini, rechts, komplett	2	St
1-4	3230-1511E-032	Sitzlager Mini links, mit Kantellager	1	St
	3230-1512E-032	Sitzlager Mini rechts, mit Kantellager	1	St
1	3231-1511-032	Sitzlagerplatte, links	1	St
	3231-1512-032	Sitzlagerplatte, rechts	1	St
2	3230-1516	Kantellager Mini	1	St
3	1062-0516	Blindniet F5x16	2	St
4	1055-0005	Scheibe A5,3	2	St
5	1024-0625-033	Senkschraube schwarz M6x25	3	St
6	3230-1519	Distanzstück mini	1	St
7	1055-0006	Scheibe A6,4	1	St
8	1042-0006-033	Sechskantmutter selbstsichernd schwarz M6	3	St
9	3231-1525-006	Kantelkufe links, eloxiert	1	St
	3231-1526-006	Kantelkufe rechts, eloxiert	1	St
10	3231-1514	Riegelrampe	2	St
11	1113-0051	Scheibe PA 6,4x15x5 natur	1	St
12	3230-1515-033	Lagerachse Frontstrebe Mini schwarz	1	St
13	1029-6001-033	Linsenschraube schwarz, Tufflock M6x12	2	St
14	1111-0013	Kehlscheibe PA schw 24x8.4x10	1	St
15	3230-1517-008	Führungswelle Sitzlager Mini verzinkt	1	St
16	1113-0056	Scheibe PA natur 10,5x21,0x0,8 mm	1	St
17	3230-1518-007	Distanzlager Führungswelle mini schwarz	1	St
18	1024-0510	Senkschraube M5x10	1	St
19	1029-0612-033	Linsenschraube schwarz M6x12	1	St
20	3231-1527	Gewindeeinsatz	1	St
21	1029-0616-033	Linsenschraube M6x16	1	St
22	1052-0006-033	Federscheibe B 6	3	St
23	1113-0068	Scheibe PA natur 10,0x18,0x0,8	1	St

Ersatzteile

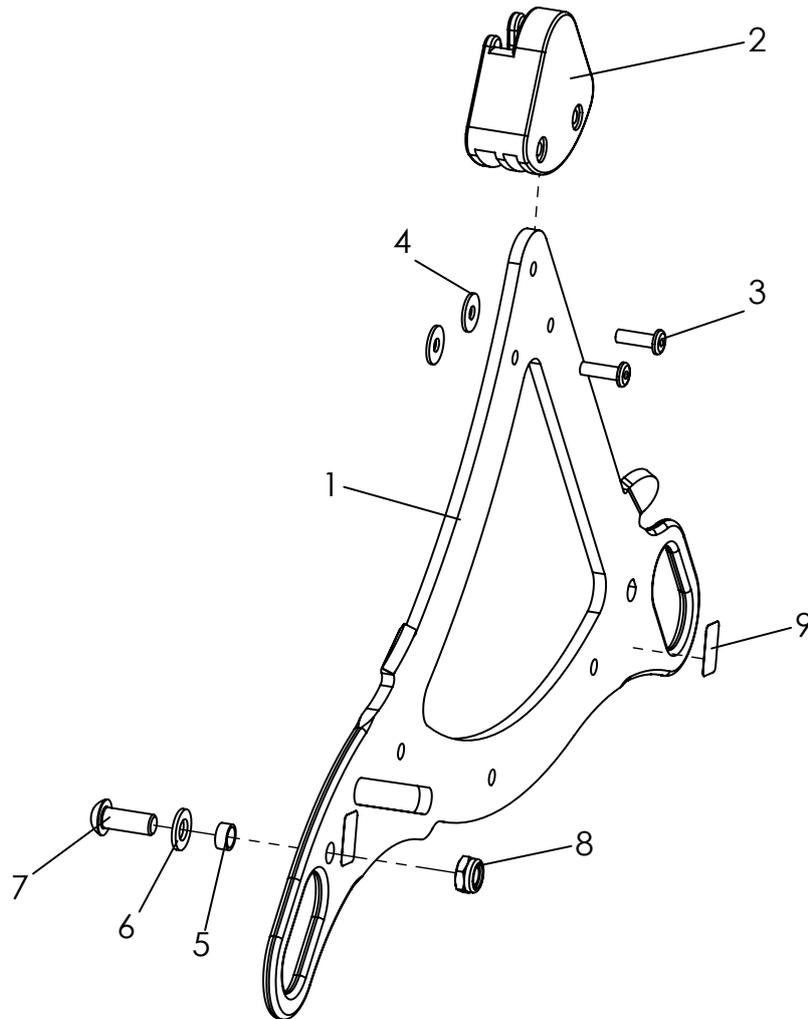


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3231-7300E-xxx	Transportsicherung	1	Set
1-4	3231-7312E-xxx	Sitzlagerplatte mit Zurrösen, mit Kantellager, rechts	1	St
	3231-7311E-xxx	Sitzlagerplatte mit Zurrösen, mit Kantellager, links	1	St
2	3231-1516	Kantellager	2	St
3	1062-0516	Blindniete F5x16	4	St
4	1055-0005	Scheibe A5,3	4	St
5	3201-7350	Gleitbuchse	2	St
6	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
7	1029-0820	Linsenschraube M8x20	2	St
8	1042-0008	Sechskantmutter selbstsichernd M8	2	St
9	1914-0007	Aufkleber mit Hakensymbol	1	St

Ersatzteile

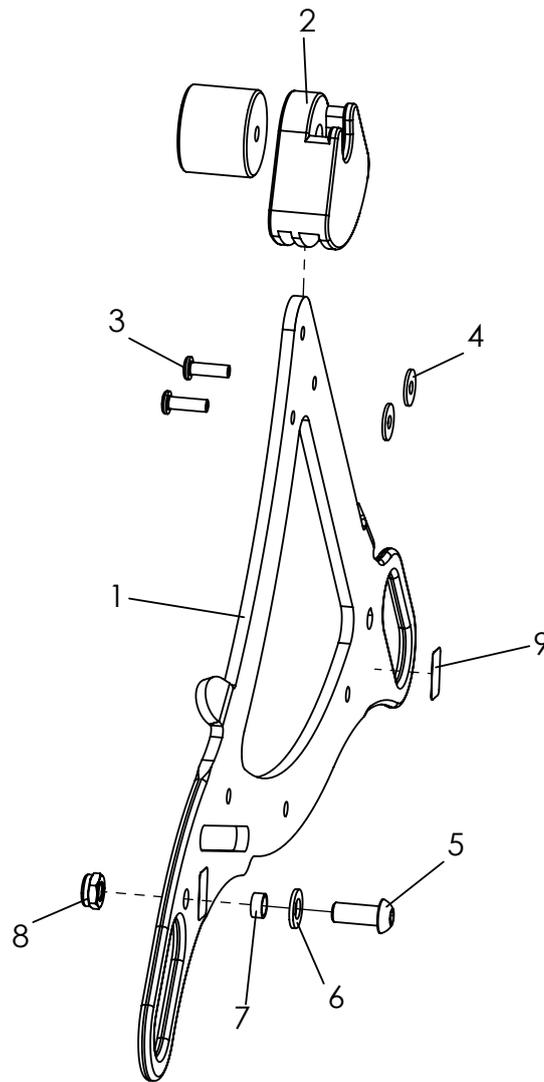


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3230-7300E-032	Transportsicherung, Mini	1	St
1-4	3231-7311E-032	Sitzlagerplatte mit Zurrösen, links	1	St
	3231-7312E-032	Sitzlagerplatte mit Zurrösen, rechts	1	St
2	3230-1516	Kantellager, Mini	2	St
3	Standard	Blindniete F5x16	4	St
4	1055-0005	Scheibe A5,3	4	St
5	1029-0820	Linsenschraube M8x20	2	St
6	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
7	3201-7350	Gleitbuchse	2	St
8	1042-0008	Sechskantmutter selbstsichernd M8	2	St
9	1914-0007	Aufkleber mit Hakensymbol	1	St

Ersatzteile

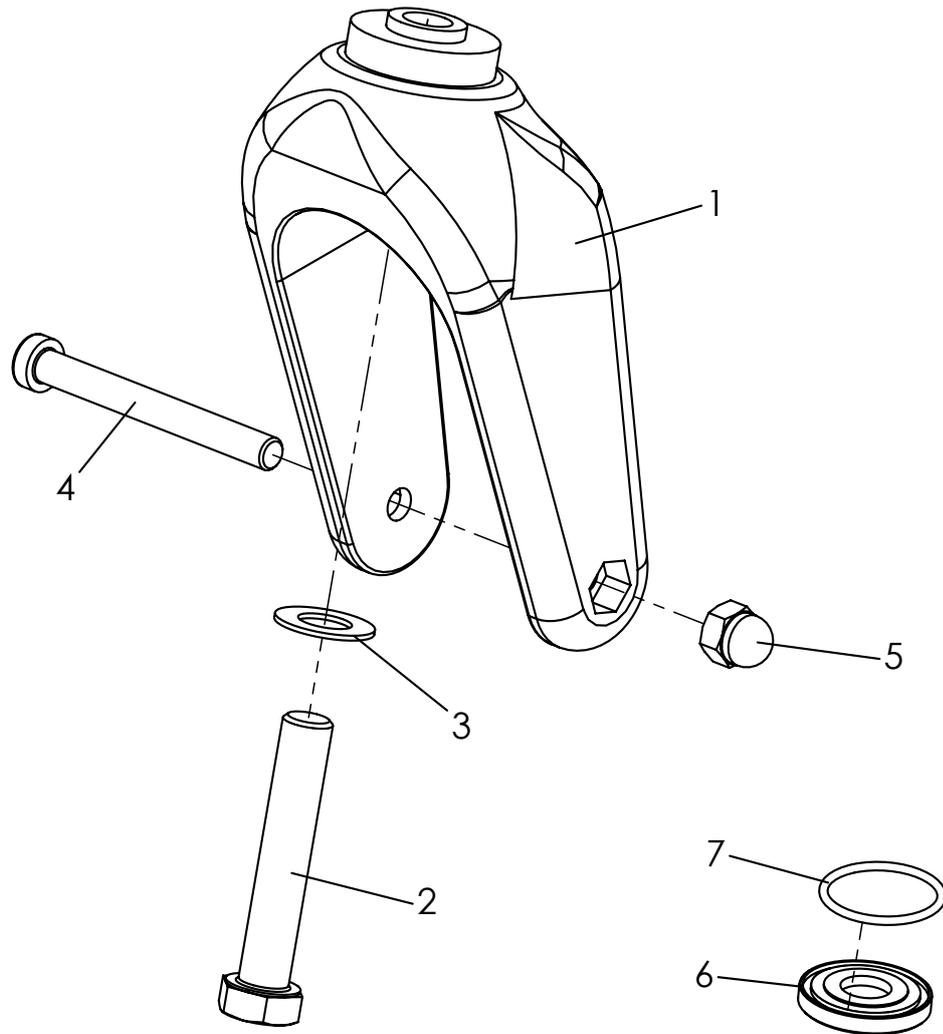

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	1281-0007E	Lenkradgabel mit Verbindungselementen	1	St
1	1281-0007	Lenkgabel LG-K-200-15/12-HOG	1	St
2	1029-1265	Linsenschraube M12x65	1	St
3	1052-0012	Federscheibe B12	1	St
4	1022-0875	Zylinderschraube niedriger Kopf M8x75	1	St
5	1044-0008	Hutmutter M8	1	St
6-7	3202-7120E	Abdichtung für 2 Lenkgabeln	1	Set
6	3224-1174-008	Dichtscheibe für Lenkgabel	2	St
7	1150-0018	O-Ring, 26x2	2	St

Ersatzteile

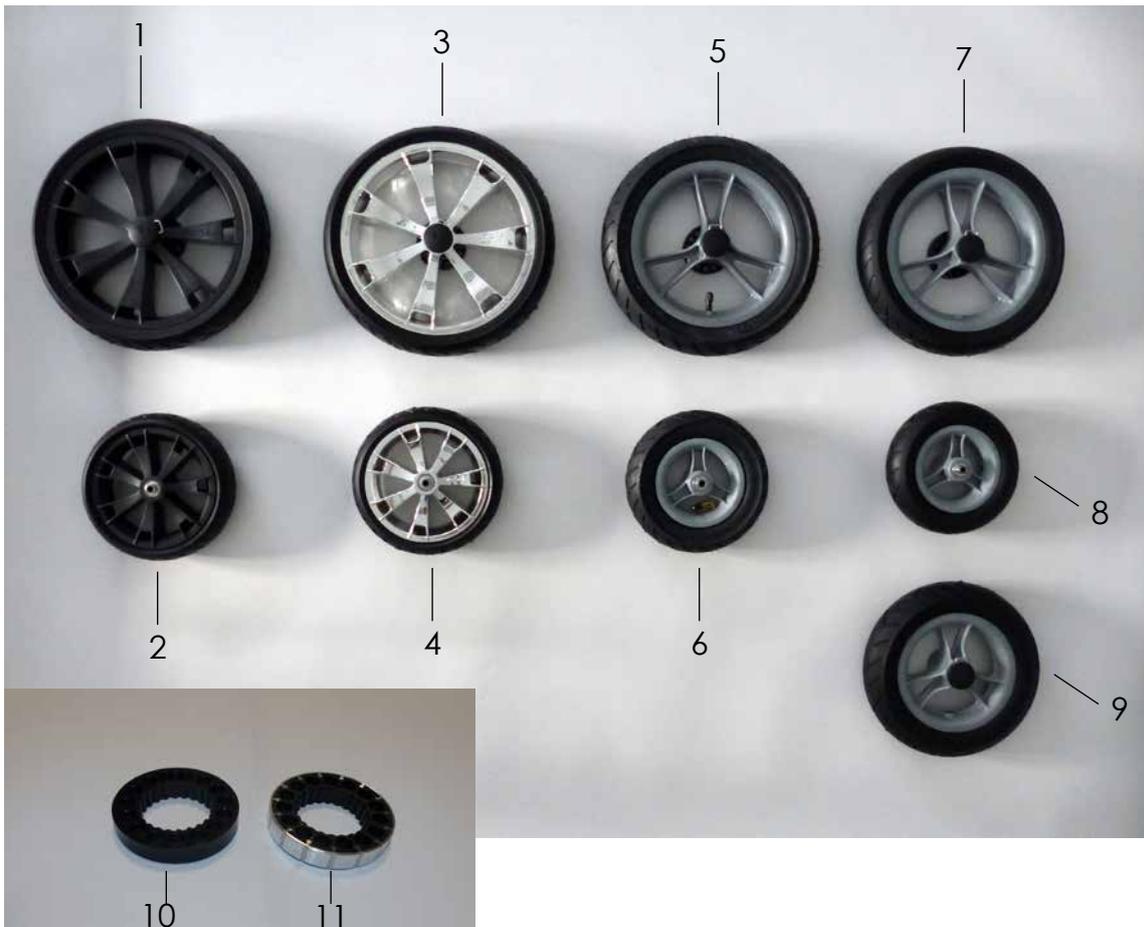

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	1221-3063	PU-Rad 300x60, Felge Schwarz	2	St
	1221-3064	PU-Rad 300x60, Felge Schwarz, mit Bremsscheibe für Fahrbremse	2	St
2	1221-2049	PU-Rad 200x48, Felge Schwarz	2	St
3	1221-3061	PU-Rad 300x60, Felge Verchromt	2	St
	1221-3062	PU-Rad 300x60, Felge Verchromt, mit Bremsscheibe für Fahrbremse	2	St
4	1221-2048	PU-Rad 200x48, Felge Verchromt	2	St
5	1211-2961	Luftrad 290x60, Felge grau	2	St
	1211-2962E	Luftrad 290x60, Felge grau, mit Bremsscheibe für Fahrbremse	2	St
6	1211-1950	Luftrad 190x50, Felge grau	2	St
7	1221-2961	PU-Rad 290x60, Felge grau	2	St
	1221-2962	PU-Rad 290x60, Felge grau, mit Bremsscheibe für Fahrbremse	2	St
8	1221-1950	PU-Rad 190x50, Felge grau	2	St
9	1211-0019	Luftrad 250x250, Felge grau (Starrerrahmen vorne)	2	St
	1221-0019	PU-Rad 250x250, Felge grau (Starrerrahmen vorne)	2	St
10	1204-0002	Bremsscheibe Kunststoff	2	St
11	1204-0005	Bremsscheibe mit Aluring	2	St
	1200-0001	Decke für Luftrad 290x60	1	St
	1200-0002	Decke für Luftrad 190x50	1	St
	1201-0001	Schlauch für Luftrad 290x60	1	St
	1201-0002	Schlauch für Luftrad 190x50	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-3	1211-0020	Luftrad R290/60, grau, Trike-Vorderrad	1	St
	1221-0020	PU-Rad R290/60, grau Trike-Vorderrad	1	St
2	1209-0011	Distanzring, Kunststoff schwarz	1	St
3	1090-0002	Rillenkugellager 6201	1	St
2-4	1211-0026	Luft-Rad R290/60, 5-Speichen schwarz, Trike-Vorderrad	1	St
	1221-0038	PU-Rad R290/60, 5-Speichen schwarz, Trike-Vorderrad	1	St
5	1205-0004	Schnellspanner VR, 128mm	1	St
6	3206-1160	Druckbuchse L23	1	St
7	3206-1150	Druckbuchse L19	1	St
8	3206-1140	Achse	1	St

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-24	1219-0029E	Luft-Bereifung auf Fün Speichen, für Trommelbremse Strg. Starr	1	Set
	1229-0029E	PU-Bereifung auf Fün Speichen, für Trommelbremse Strg. Starr	1	Set
	1219-0030E	Luft-Bereifung auf Fün Speichen, für Trommelbremse Strg. Lenkbar	1	Set
	1229-0030E	PU-Bereifung auf Fün Speichen, für Trommelbremse Strg. Lenkbar	1	Set
	1219-0031E	Luft-Bereifung auf Fün Speichen, für Trommelbremse Strg. Trike	1	Set
	1229-0031E	PU-Bereifung auf Fün Speichen, für Trommelbremse Strg. Trike	1	Set
1	3201-1271	Kloben verzinkt	2	St
2	1205-0041	Bremsanker aus Stahl links, Trommelbrems Räder, einbau rechte Seite	1	St
	1205-0042	Bremsanker aus Stahl rechts, Trommelbrems Räder, einbau links Seite	1	St
3	1051-0012	Scheibe A 13	2	St
4	1043-0012	Sechskantmutter BM12	2	St
5	3201-1242	Achsbolzen	2	St
6	1029-0635	Linsenschraube M6x35	2	St
7	1114-0052	Gewindebuchse 8xM6x23	2	St
8	1030-0614	Linsen-Flanschkopfschraube M6x14	2	St
9	1219-0032	Luft-Rad 310X55 auf 5-Speichen schwarz, mit T-Bremse links	1	Set
	1219-0033	Luft-Rad 310X55 auf 5-Speichen schwarz, mit T-Bremse rechts	1	Set
	1229-0025	PU-Rad 290x60 auf 5-Speichen schwarz, mit T-Bremse links	1	Set
	1229-0026	PU-Rad 290x60 auf 5-Speichen schwarz, mit T-Bremse rechts	1	Set
10	1049-0065	BILOC-Mutter mit Klemmteil verz. DIN 934-8 VM12	2	St
11	1209-0004	Nabenabdeckkappe KN-S-32/12	2	St
12	1211-0017	Lufrad 190x50 auf 3-Speichen schwarz, für vorne, Strg. Lenkbar	2	St
	1221-0017	PU-Rad 190x50 auf 3-Speichen schwarz, für vorne, Strg. Lenkbar	2	St
	1211-0025	Lufrad 250x50, 5-Speichen schwarz mit Ssv, für vorne, Strg.Starr	2	St
	1221-0036	Pu-Rad 250x50, 5-Speichen schwarz mit Ssv, für vorne, Strg.Starr	2	St
	1211-0024	Lufrad 290x60, 5-Speichen schwarz mit Ssv, für vorne, Strg.Trike	1	St
13	1209-0030	Bremshebel 36° manuell rastend 22 mm	2	St
14-16	1209-0001	Bowdenzugset 1,5m Set mit Endkappen	2	Set
17	1089-0004	Kabelbinder schwarz, TY 525 MXR, 4,75-5 x 180 lang	2	St
18	1149-0001	Bowdenzugführung D 25 (AT)	2	St
19	1050-0006	Scheibe A6,4	2	St
20	1149-0003	Bowdenzugführung d 6,4 / 8 mm, schwarz	4	St
21	1062-0516	Blindniet F5x16	2	St
22	1051-0005	Scheibe A5,3	6	St
23	1029-0616	Linsenschraube M6x16	2	St
24	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St

Ersatzteile

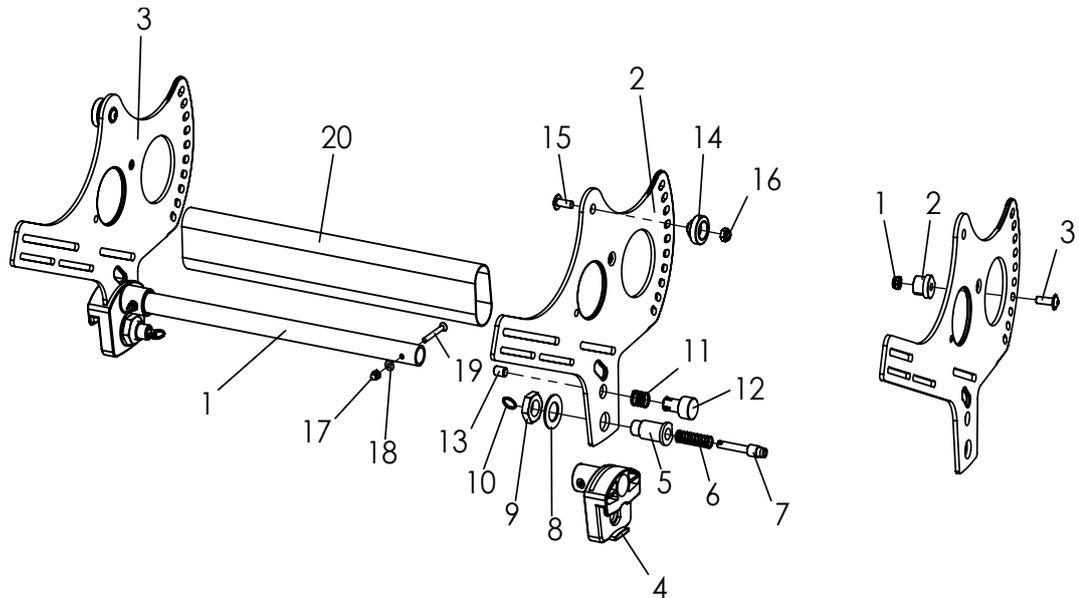


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
	3230-2100E-032	Sitzbasis Mini, komplett	1	St
1-18	3232-2100E-xxx	Sitzbasis Gr. 1, komplett	1	St
	3234-2100E-xxx	Sitzbasis Gr. 2, komplett	1	St
	3235-2100E-xxx	Sitzbasis Gr. 2XL, komplett	2	St
1	3230-2119-xxx	Querstrebe Sitz Mini	1	St
	3231-2119-032	Querstrebe Sitz Gr. 1	1	St
	3233-2119-xxx	Querstrebe Sitz Gr. 2	1	St
	3230-2121-007	Seitenplatte Sitzbasis Mini, links	1	St
2	3231-2121-007	Seitenplatte Sitzbasis, links Gr. 1 und 2	1	St
	3235-2121-007	Seitenplatte Sitzbasis, links Gr. 2XL	1	St
	3230-2122-007	Seitenplatte Sitzbasis Mini, rechts	1	St
	3231-2122-007	Seitenplatte Sitzbasis, rechts Gr. 1 und 2	1	St
	3235-2122-007	Seitenplatte Sitzbasis, rechts Gr. 2XL	1	St
4	3231-2114	Kantelführung	2	St
5	3231-2115	Riegelgehäuse Sitz	2	St
6	1131-0070	Druckfeder D-162	2	St
7	3240-2422	Riegel	2	St
8	1052-0016	Federscheibe B16	2	St
9	1040-0016	Sechskantmutter BM 16 x 1.5	2	St
10	1129-0036	Schlüsselring SP 16x1,6	2	St
11	1131-0065	Druckfeder D-117	1	St
12	3231-2124	Sperrknopf	1	St
13	1031-0820	Gewindestift M8x20	1	St
14	3231-2113	Kantelwelle	2	St
15	1030-0616	Linsen-Flanschkopfschraube M6x16	2	St
16	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
17	1044-0004	Hutmutter M4	2	St
18	1051-0004	Scheibe A4,3	2	St
19	1024-0430	Senkschraube M4x30	2	St
20	3230-2140	Abdeckung für Kantellung Mini	1	St
	3231-2140	Abdeckung für Kantellung Gr. 1	1	St
	3233-2140	Abdeckung für Kantellung Gr. 2	1	St
1-3	<i>Begrenzung Rückenneigung</i>	<i>Bei Gr. 2XL, vierte Loch von unten montieren</i>		
1	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
2	3240-1180	Klemmkolben	2	St
3	1030-0618	Linsen-Flanschkopfschraube M6x18	2	St

Ersatzteile

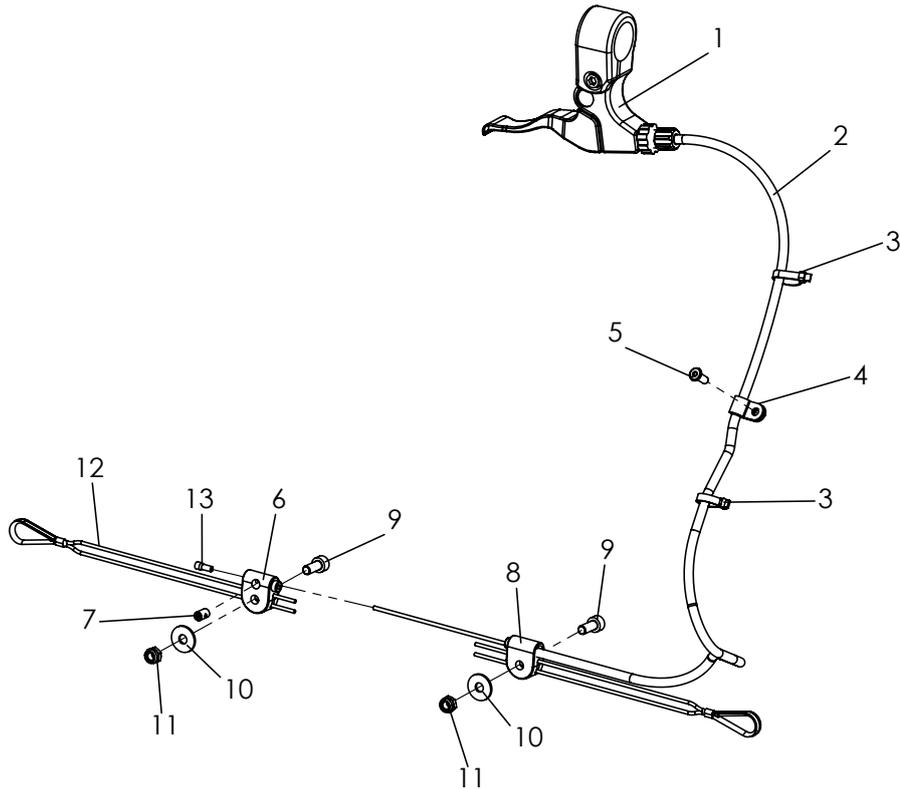


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
2-13	3231-1900E	Auslösung Kantelung	1	St
1	1209-0017	Bremshebel klemme geteilt 22mm schwarz	1	St
2	1209-0029	Bowdenzug 67cm	1	St
3	1089-0007	Kabelbinder 3,3 x 145	2	St
4	1119-0003	Kabelschelle D6,4 mm PA natur	1	St
5	1062-0410	Blindniete F4x10	1	St
6	3243-1932	Nippellager	1	St
7	1099-0004	Schraubnippel 1100, D5x8	1	St
8	3243-1931	Bowdenlager	1	St
9	1021-0512	Zylinderschraube M5x12	2	St
10	1055-0005	Scheibe A5,3	2	St
11	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	2	St
12	1129-1001	Universal-Auslösedrahtseil mit Kausche	2	St
13	1209-0007	Endkappe Aluminium	1	St

Ersatzteile

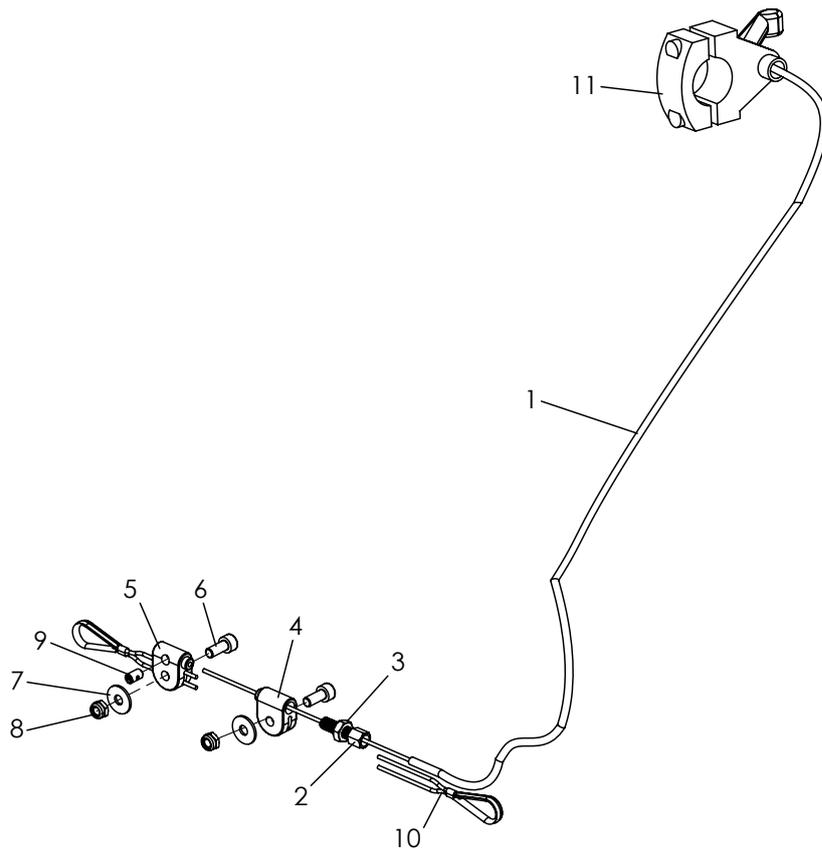


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3230-1900E	Auslösung kantelung	1	St
1	1209-0029	Bowdenzug Bingo Evo Mini auf 60cm kürzen	1	St
2	1099-0003	Stellschraube M6x20/30	1	St
3	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	1	St
4	3007-1931	Bowdenlager vorbereitet für Stellschraube	1	St
5	3243-1932	Nippellager	1	St
6	1021-0512	Zylinderschraube M5 x 12	2	St
7	1055-0005	Scheibe A5,3	2	St
8	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	2	St
9	1099-0004	Schraubnippel 1100, D5x8	1	St
10	3230-1129	Universal-Auslösedrahtseil mit Kauschen	2	St
11	1209-0036	Auslösehebel D22	1	St

Ersatzteile

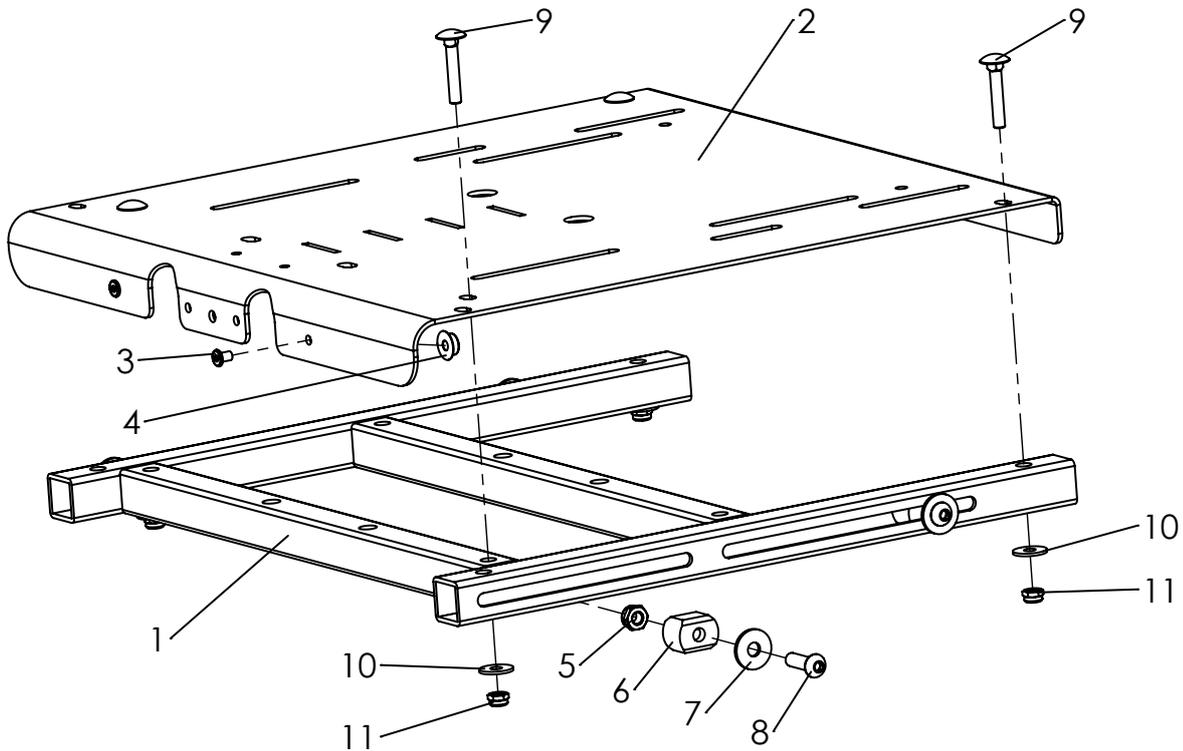


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3232-2200E-xxx	Sitzfläche mit Verbindungselementen, Gr.1	1	St
	3234-2200E-xxx	Sitzfläche mit Verbindungselementen, Gr.2	1	St
	3235-2200E-xxx	Sitzfläche mit Verbindungselementen, Gr.2XL	1	St
1	3231-2250-xxx	Anpassungs-Sitzrahmen Gr.1	1	St
	3233-2250-xxx	Anpassungs-Sitzrahmen Gr.2	1	St
	3235-2250-xxx	Anpassungs-Sitzrahmen Gr.2XL	1	St
2-4	3232-2221E-xxx	Sitzblech Gr.1	1	St
	3234-2221E-xxx	Sitzblech Gr.2	1	St
	3236-2221E-xxx	Sitzblech Gr.2XL	1	St
3	1061-0406	Blindnit F4x6	4	St
4	1533-0005	Druckknopf Kugelteil	4	St
5	1042-0006	Sechskantmutter, selbssichernd M6	4	St
6	3231-2262	Klemmkloben	4	St
7	1055-0006	Scheibe A6,4 silber <i>bei Rahmenfarbe 024</i>	4	St
	1055-0006-033	Scheibe A6,4 schwarz <i>bei Rahmenfarbe 032</i>	4	St
8	1029-0620	Linsenschraube M6x20 silber <i>bei Rahmenfarbe 024</i>	4	St
	1029-0620-033	Linsenschraube M6x20 schwarz <i>bei Rahmenfarbe 032</i>	4	St
9	1026-0530	Flanschrundschraube M5x30	4	St
10	1055-0005	Scheibe A5,3	4	St
11	1042-0005	Sechskantmutter, selbssichernd M5	4	St

Ersatzteile

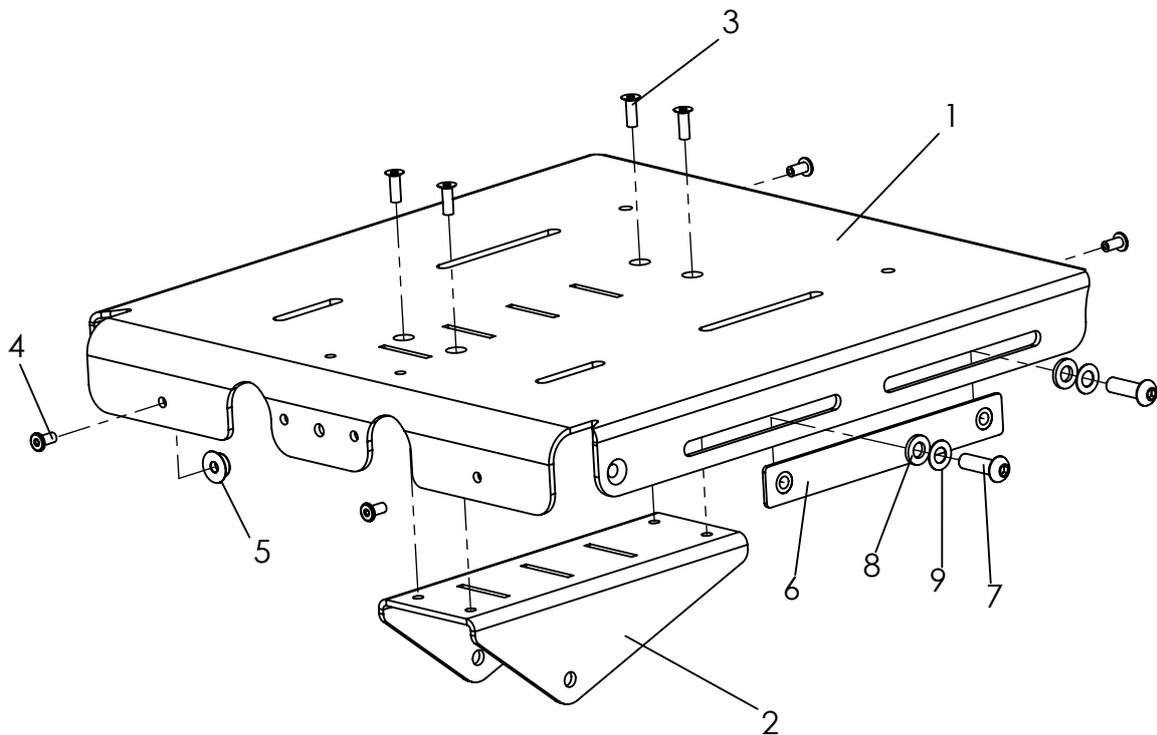


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3230-2200E-032	Sitzfläche Mini, komplett	1	St
1-5	3230-2211E-032	Sitzfläche Mini	1	St
2	3230-2212-032	Aufnahme Kniewinkelstütze	1	St
3	1063-0412	Blindniete Senk S4x12	4	St
4	1061-0406	Blindniete F4x6	4	St
5	1533-0005	Druckknopf Kugelteil	4	St
6	3230-2231	Gewindeplatte M6 x 110	2	St
7	1029-0620-033	Linsenschraube M6x20	4	St
8	1055-0006-033	Scheibe A6,4	4	St
9	1052-0006-033	Federscheibe B6	4	St

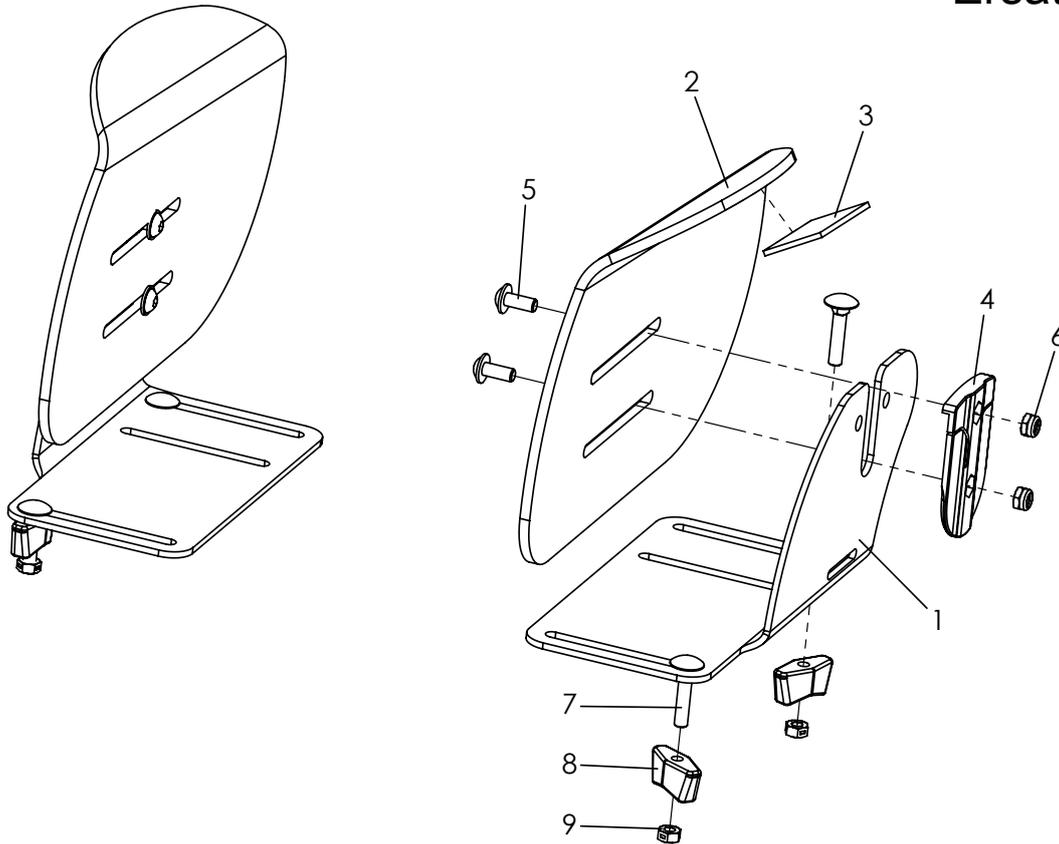


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3230-2602E	Hüftpelotte rechts Mini	1	St
	3230-2601E	Hüftpelotte links Mini	1	St
	3231-2602E	Hüftpelotte rechts Gr. 1	1	St
	3231-2601E	Hüftpelotte links Gr. 1	1	St
	3233-2602E	Hüftpelotte rechts Gr. 2	1	St
	3233-2601E	Hüftpelotte links Gr. 2	1	St
	3235-2602E	Hüftpelotte rechts Gr. 2XL	1	St
	3235-2601E	Hüftpelotte links Gr. 2XL	2	St
1	3230-2612-032	Hüftpelottenhalter rechts Mini	1	St
	3230-2611-032	Hüftpelottenhalter links Mini	1	St
	3231-2612-032	Hüftpelottenhalter rechts Gr. 1	1	St
	3231-2611-032	Hüftpelottenhalter links Gr. 1	1	St
	3233-2612-032	Hüftpelottenhalter rechts Gr. 2 und 2XL	1	St
	3233-2611-032	Hüftpelottenhalter links Gr. 2 und 2XL	1	St
2-3	3230-2625E-032	Hüftpelotte Formteil rechts Mini	1	St
	3230-2624E-032	Hüftpelotte Formteil links Mini	1	St
	3231-2625E-032	Hüftpelotte Formteil rechts Gr. 1	1	St
	3231-2624E-032	Hüftpelotte Formteil links Gr. 1	1	St
	3233-2625E-032	Hüftpelotte Formteil rechts Gr. 2	1	St
	3233-2624E-032	Hüftpelotte Formteil links Gr. 2	1	St
	3235-2625E-032	Hüftpelotte Formteil Alu. rechtsy Gr. 2XL, schwarz	1	St
	3235-2624E-032	Hüftpelotte Formteil Alu. links Gr. 2XL, schwarz	1	St
3	1501-0003	Hakenband schwarz selbstkl. 25mm, 1 st. Ca 10cm	0,2	m
4	3231-2622	Arretierschwert	2	St
5	1030-0512	Linsen - Flanschkopfschraube M5x12	4	St
6	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	4	St
7	1026-0525	Flanschrundschaube M5x25	4	St
8	1123-0500	Flügelmutter	4	St
9	1049-0066	BILOC-Mutter mit Klemmteil M5	4	St

Ersatzteile

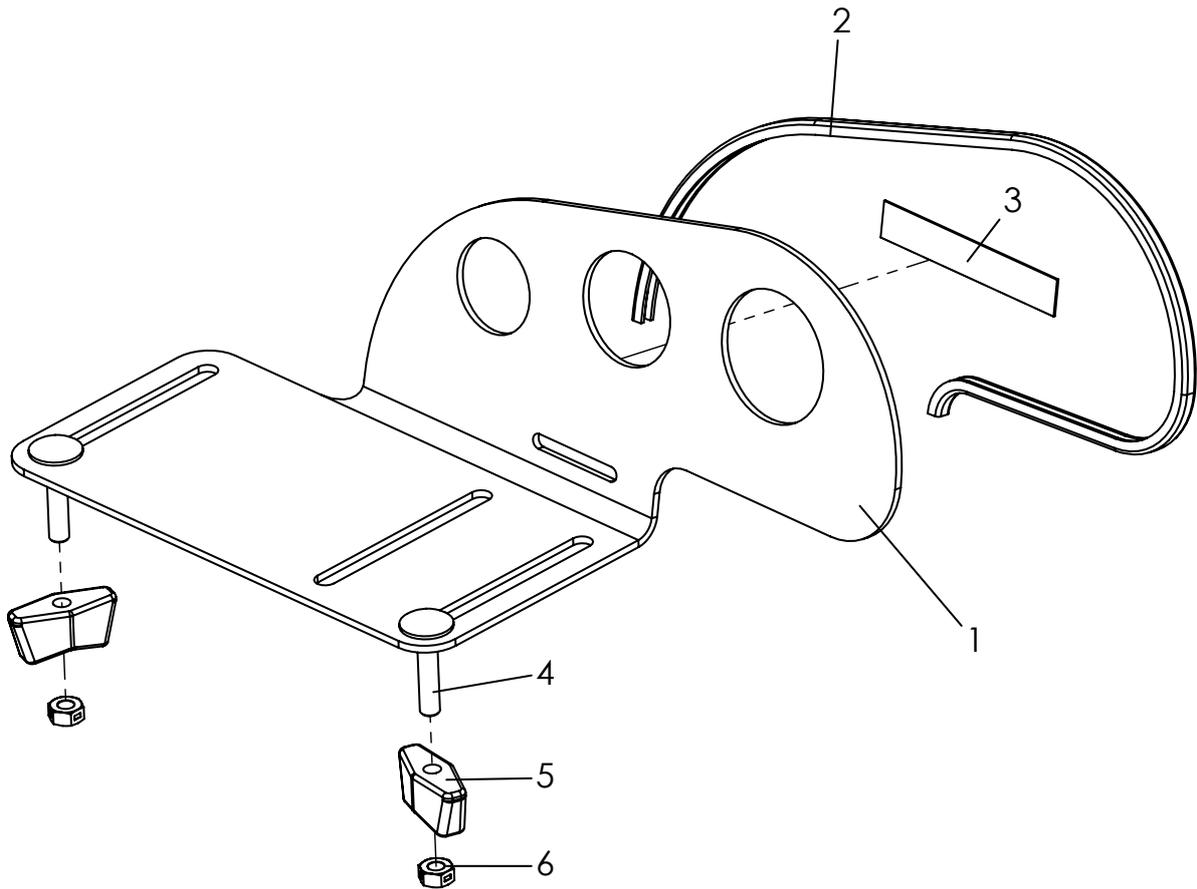


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-6	3230-2901E	Oberschenkelführung, mini, links abgebildet	1	St
	3230-2902E	Oberschenkelführung, mini, rechts	1	St
	3231-2901E	Oberschenkelführung, Gr. 1, links abgebildet	1	St
	3231-2902E	Oberschenkelführung, Gr. 1, rechts	1	St
	3233-2901E	Oberschenkelführung, Gr. 2, links abgebildet	1	St
	3233-2902E	Oberschenkelführung, Gr. 2, rechts	1	St
	3235-2901E	Oberschenkelführung, Gr. 2XL, links	1	St
	3235-2902E	Oberschenkelführung, Gr. 2XL, rechts	1	St
1-3	3230-2911E	Pelotte Oberschenkelführung, mini, links	1	St
	3230-2912E	Pelotte Oberschenkelführung, mini, rechts	1	St
	3231-2911E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 1, links	1	St
	3231-2912E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 1, rechts	1	St
	3233-2911E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2, links	1	St
	3233-2912E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2, rechts	1	St
	3235-2911E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2XL, links	1	St
	3235-2912E	Pelotte Oberschenkelführung, Gr. 2XL, rechts	1	St
2	1144-0001	KS-Profil PVC weich. Gr.1 und Mini 0,36m, Gr.2= 0,43m, Gr.2XL= 0,52m		M
3	1501-0003	Hakenband selbstklebend ca 15cm lang	0,4	m
4	1026-0525	Flachrundschraube M6x25	2	St
5	1123-0500	Flügelmutter	2	St
6	1049-0066	BILOC-Mutter mit Klemmteil M5	2	St

Ersatzteile

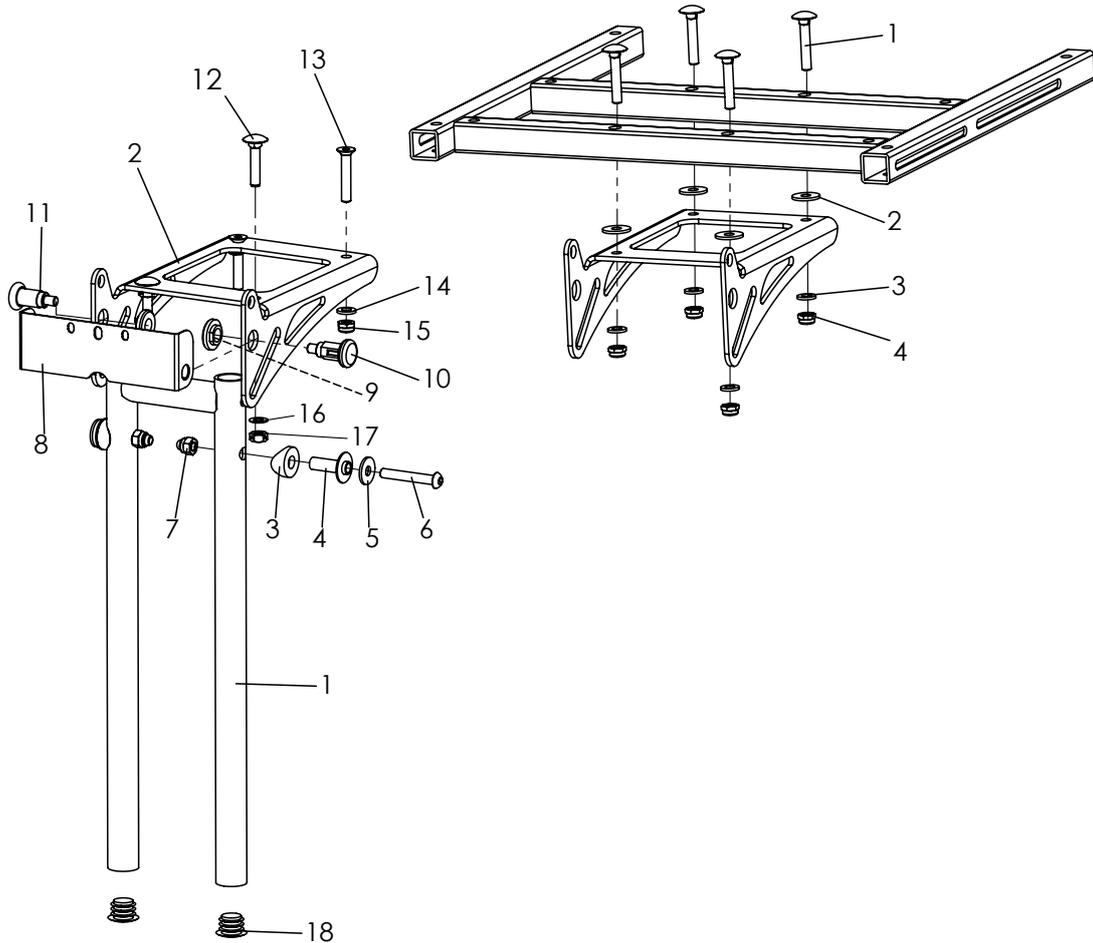

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-18	3231-2501E-xxx	Kniewinkelanlage 90° Gr. 1	1	St
	3233-2501E-xxx	Kniewinkelanlage 90° Gr. 2	1	St
1	3231-2520-xxx	Fußstützaufnahme Gr. 1	1	St
	3233-2520-xxx	Fußstützaufnahme Gr. 2	1	St
2	3231-2411-007	Kniewinkelkonsole	2	St
3	1111-0016	Kehlscheibe 20x8,4x3	2	St
4	3231-2532	Drehlager Fußstützaufnahme	2	St
5	1055-0006	Karoseriescheibe A6,4	2	St
6	1029-0640	Linsenschraube M6x40	2	St
7	1044-0006	Hutmutter selbstsichernd M6	2	St
8	3231-2545	Schwenksperre	1	St
9	3231-2544	Mutter Rastbolzen	2	St
10	1127-0009	Zugschnapper mit Raster M10x1	1	St
11	1127-0010	Zugschnapper M10x1	1	St
12	1026-0630	Flanschrundschaube M6x30	2	St
13	1024-0635	Senkschraube M6x35	2	St
14	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
15	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
16	1052-0006	Federscheibe B6	2	St
17	1049-0068	BILOC-Mutter mit Klemmteil M6	2	St
18	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20x0,8-2,5	2	St
	Bei Gr. 2 und 2XL	<i>Pos. 12-13-14-15-16-17 ersetzen durch 1-2-3-4 Abbildung rechts beachten</i>		
1	1026-0635	Flachrundschaube M6x35	4	St
2	1055-0006	Karoseriescheibe A6,4	4	St
3	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
4	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St


Ersatzteile

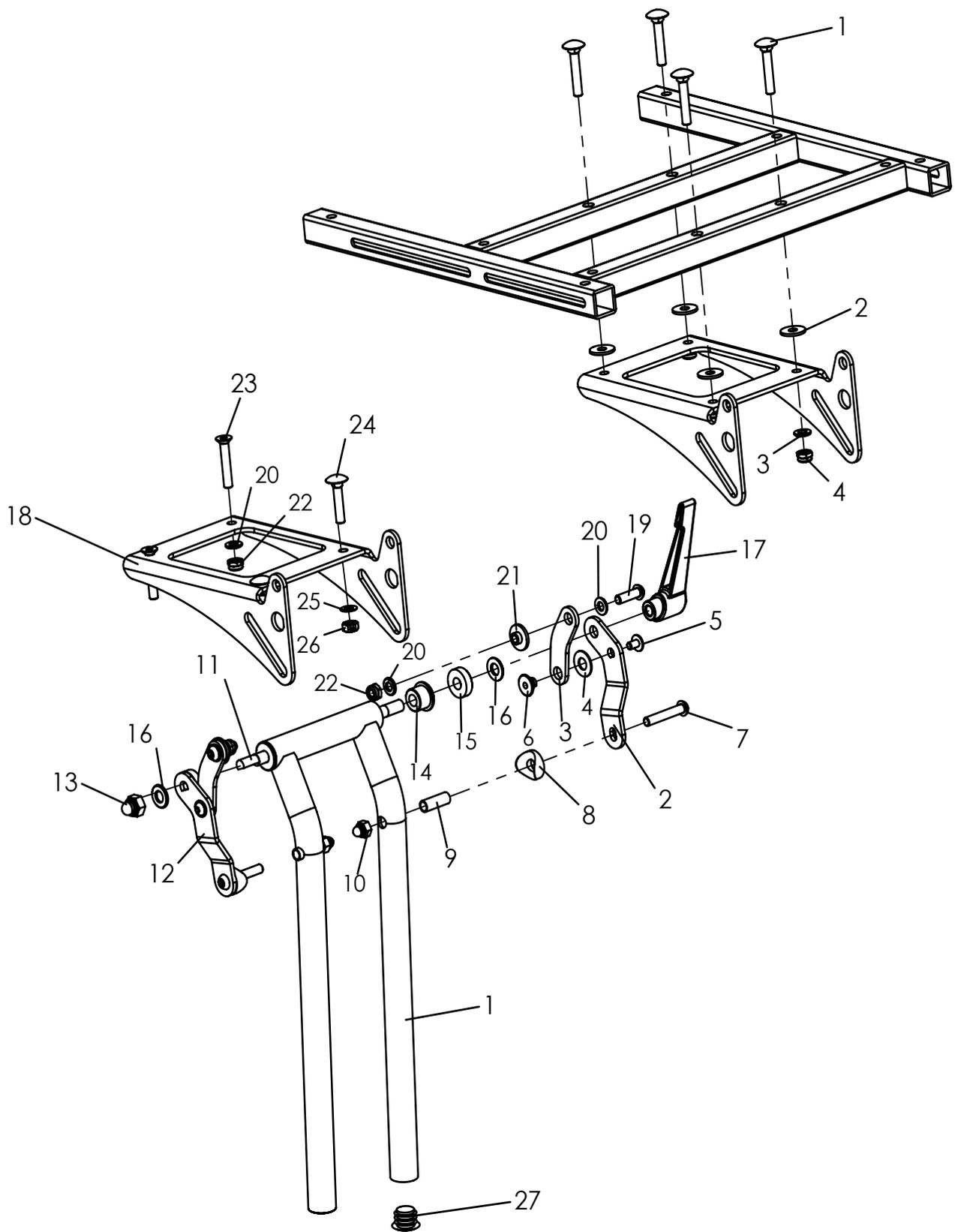

Ersatzteile


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-27	3231-2403E-xxx	Kniewinkelanlage winkelverstellbar Gr. 1, 85°-170°	1	St
	3233-2403E-xxx	Kniewinkelanlage winkelverstellbar Gr. 2, 85°-170°	1	St
1	3240-2870-xxx	Fußstützaufnahme winkelverstellbar, Gr. 1	1	St
	3233-2410-xxx	Fußstützaufnahme winkelverstellbar, Gr. 2	1	St
2	3231-2434-032	Schwenkhebel, links	1	St
3	3231-2433-032	Falthebel kurz	2	St
4	1113-0003	Scheibe PA Natur 18x8,4x0,8	2	St
5	1030-0508	Linsen-Flanschkopfschraube M5x8	2	St
6	3231-2437	Schwenkhebelachse	2	St
7	1029-0635	Linsenschraube M6x35	2	St
8	1111-0016	Kehlscheibe 20x8,4x3	2	St
9	1114-0012	Buchse verz 8x0,8x22,5	2	St
10	1044-0006	Hutmutter M6	2	St
11	3231-2438	Gewindestange	1	St
12	3231-2435-032	Schwenkhebel, rechts	1	St
13	1044-0008	Hutmutter M8	1	St
14	3240-2864	Klemmbuchse	2	St
15	3231-2436	Druckstück	2	St
16	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
17	1121-0800	Klemmhebel PA schwarz M8	1	St
18	3231-2411-007	Kniewinkelkonsole	1	St
19	1029-0620	Linsenkopfschraube M6x20	2	St
20	1051-0006	Scheibe A6,4	6	St
21	3210-1238	Doppelschulterbuchse 2mm	2	St
22	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St
23	1024-0635	Senkschraube M6x35	2	St
24	1026-0630	Flachrundschraube M6x30	2	St
25	1052-0006	Federscheibe B6	2	St
26	1049-0068	BILOC-Mutter mit Klemmteil M6	2	St
27	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20	2	St
	Bei Gr. 2 und 2XL	Pos. 20-22-23-24-25-26, ersetzen durch 1-2-3-4		
		Abbildung rrechts beachten		
1	1026-0635	Flachrundschraube M6x35	4	St
2	1055-0006	Karoseriescheibe A6,4	4	St
3	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
4	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St

Ersatzteile

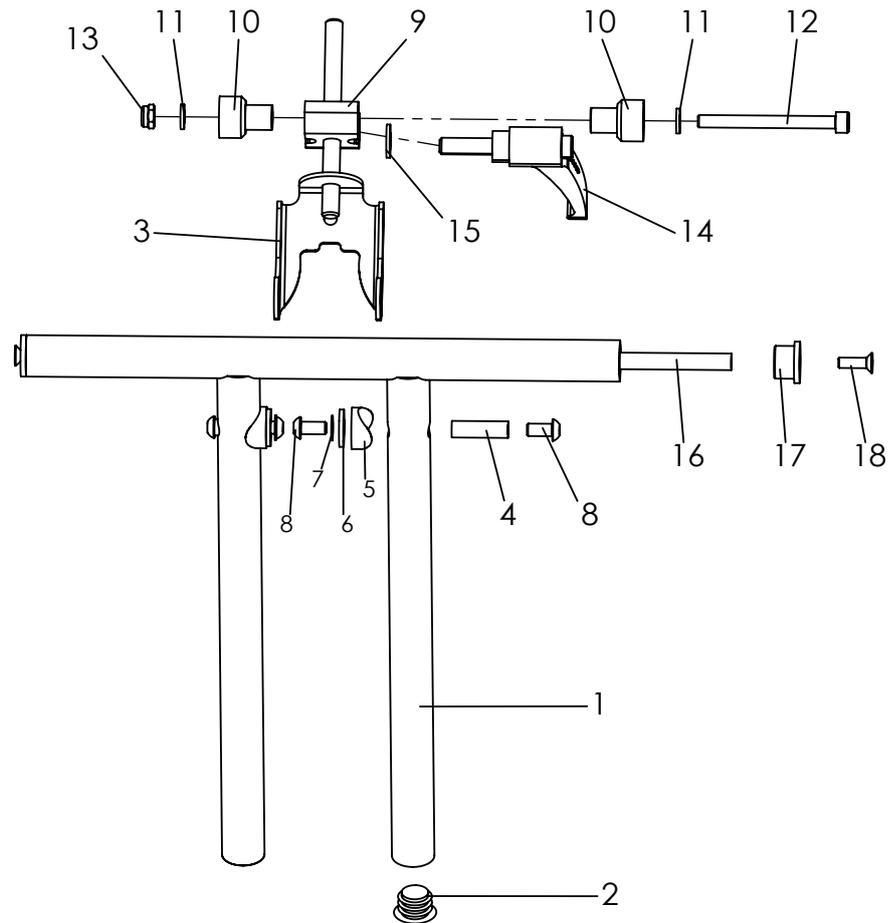


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-18	3230-2400E-032	Kniewinkelanlage winkelverstellbar Mini	1	St
1	3230-2420-032	Fußstützaufnahme Mini	1	St
2	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20	2	St
3	3230-2430-033	Kniewinkelstütze, schwarz	1	St
4	1114-0062	Gewindebuchse 8xM6x26,5	2	St
5	1111-0016	Kehlscheibe 20x8,4x3	2	St
6	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	2	St
7	1052-0006-033	Federscheibe B6	2	St
8	1029-0612-033	Linsenschraube M6x12	4	St
9	3230-2411-007	Klemmblock	1	St
10	3230-2413	Achshälfte	2	St
11	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
12	1021-0665	Zylinderschraube M6x65	1	St
13	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	1	St
14	1121-0825	Klemmhebel PA schwarz M8x25	1	St
15	1051-0008	Scheibe A8,4 verz DIN/ISO 125 A8,4	1	St
16	3230-2441-008	Lagerrohr	1	St
17	3230-2442	Lagerbuchse Kniweinkelanlage	2	St
18	1024-0516	Senkschraube M5x16	2	St

Ersatzteile

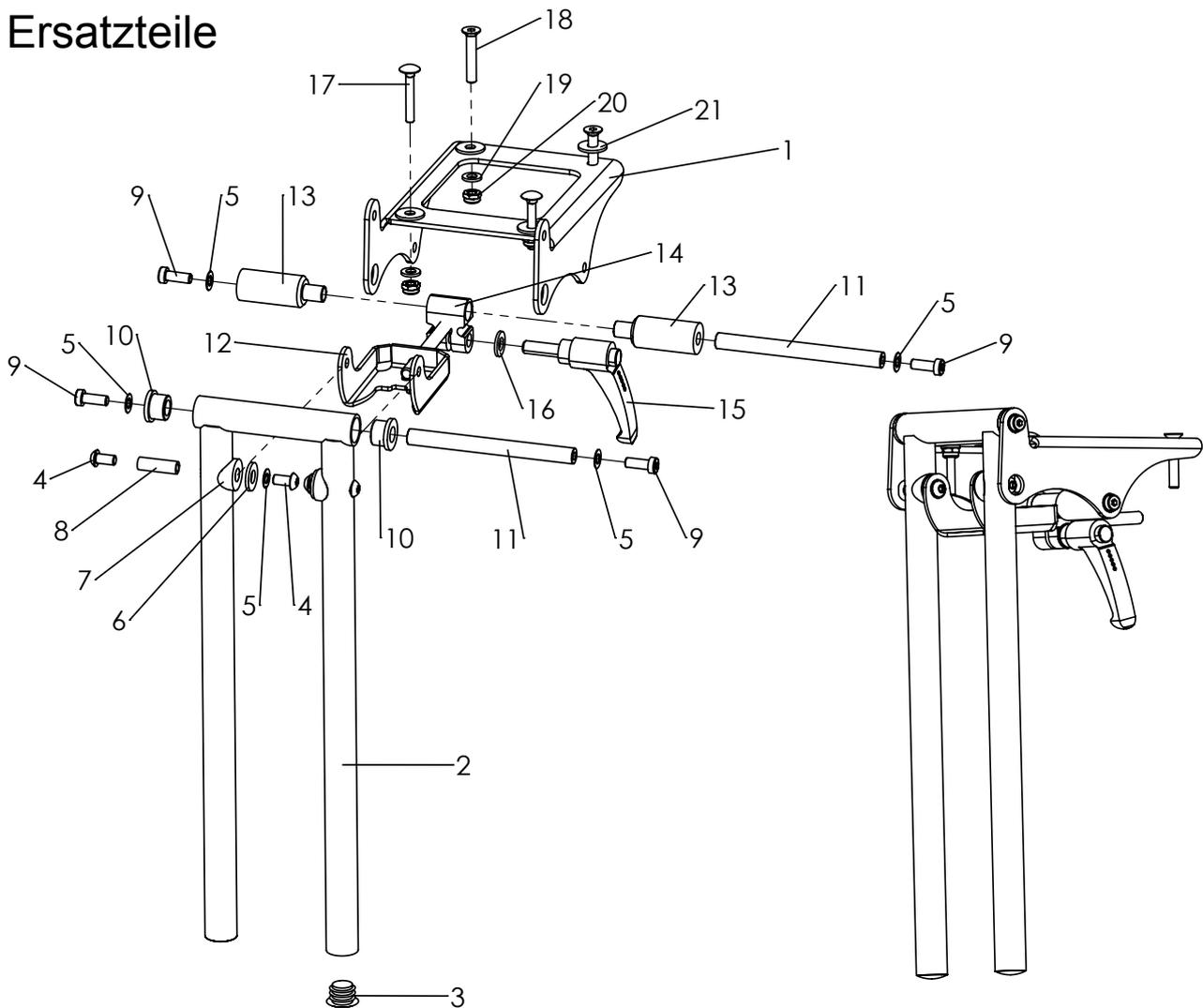


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-21	3232-2403E-xxx	Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85-175°, Gr.1	1	St
	3234-2403E-xxx	Kniewinkelanlage winkelverstellbar 85-175°, Gr.2	1	St
1	3232-2412-007	Kniewinkelkonsole	1	St
2	3232-2420-xxx	Fußstützaufnahme Gr.1	1	St
	3234-2420-xxx	Fußstützaufnahme Gr.2	1	St
3	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20	2	St
4	1029-0612	Linsenschraube M6x12 (bei eisenglimmer 024)	4	St
	1029-0612-033	Linsenschraube M6x12 (bei schwarz 032)	4	St
5	1052-0006	Federscheibe B6	6	St
6	1113-0035	Scheibe PA 18x8,4x2 schwarz	2	St
7	1111-0016	Kehlscheibe 20x8,4x3	2	St
8	1114-0064	Gewindebuchse 8xM6x25,2	2	St
9	1022-0616	Zylinderschraube M6x16	4	St
10	3232-2446	Lagerbuchse Kniewinkelanlage	2	St
11	3232-2444	Lagerachse KWA	2	St
12	3230-2430-033	Kniewinkelstütze, schwarz	1	St
13	3232-2413	Achshälfte Evo	2	St
14	3230-2411-007	Klemmblock	1	St
15	1121-0825	Klemmhebel PA schwarz M8x25	1	St
16	1051-0008	Scheibe A8,4	1	St
17	1026-0530	Flachrundschraube M5x30 (Schrauben für vorne)	2	St
18	1024-0635	Senkschraube M6x35 (Schrauben für hinten)	2	St
19	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
20	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St
21	1055-0006	Scheibe A6,4 (Kommen zwischen Kniewinkelkonsole und Sitzrahmen)	4	St

Ersatzteile

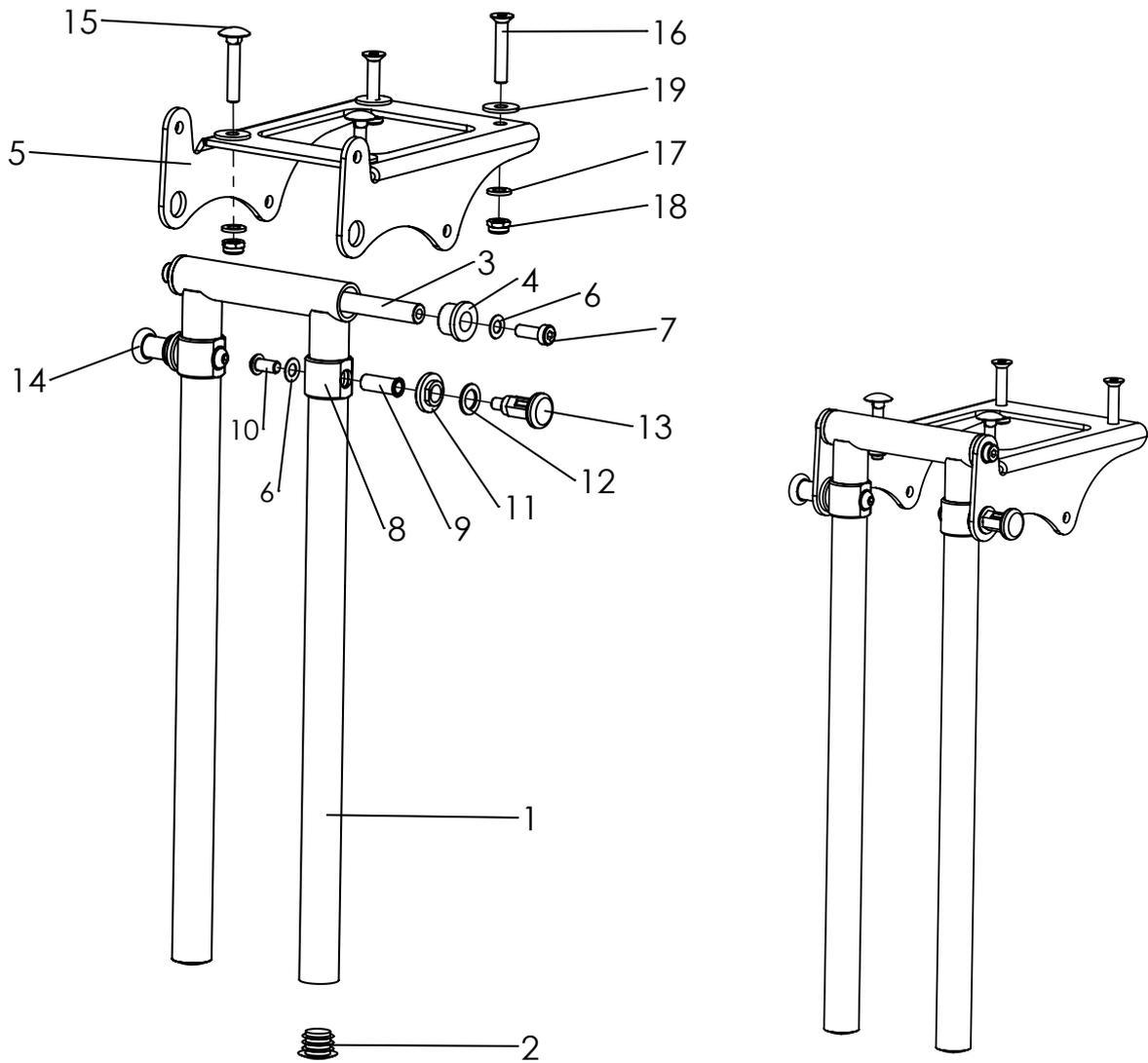


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-19	3232-2501E-xxx	Kniewinkelanlage Gr.1, 90° fest	1	St
	3234-2501E-xxx	Kniewinkelanlage Gr.2, 90° fest	1	St
1	3232-2420-xxx	Fußstützaufnahme universal, Gr.1	1	St
	3234-2420-xxx	Fußstützaufnahme universal, Gr.2	1	St
2	1141-0006	Lamellenstopfen SFL 20	2	St
3	3232-2444	Lagerachse KWA Evo	1	St
4	3232-2446	Lagerbuchse Kniewinkelanlage	2	St
5	3232-2412-007	Kniewinkelkonsole	1	St
6	1052-0006	Federscheibe B6	4	St
7	1022-0616	Zylinderschraube M6x16	2	St
8	3232-2445	Gleitring	2	St
9	3232-2443	Riegelfang	2	St
10	1029-0612	Linsenschraube M6x12	2	St
11	3231-2544	Mutter Rastbolzen	2	St
12	1059-0001	Stützscheibe 10x16x1,2	2	St
13	1127-0011	Zugschnäpper mit Raster M10x1	1	St
14	1127-0010	Zugschnäpper M10x1	1	St
15	1026-0630	Flachrundschrabe M5x30 (Schrauben für vorne)	2	St
16	1024-0635	Senkschraube M6x35 (Schrauben für hinten)	2	St
17	1051-0006	Scheibe A6,4	4	St
18	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St
19	1055-0006	Scheibe A6,4 (Kommen zwischen Kniewinkelkonsole und Sitzrahmen)	4	St

Ersatzteile

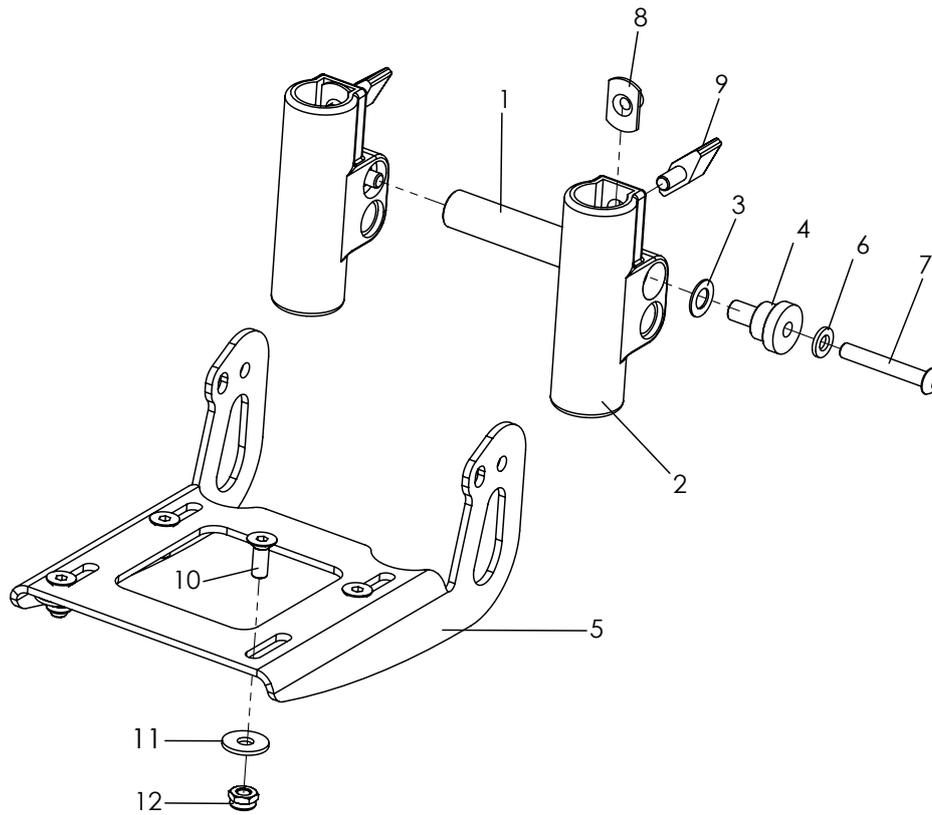



Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3240-2901E-032	Fußbrettträger mit einstellbarem Winkel, hochklappbar	1	St
1	3240-2913	Stabilisator	1	St
2	3201-2520	Fußbankhalter	2	St
3	1052-0008	Federscheibe B8	2	St
4	3201-2530	Lagerbuchse	2	St
5	3240-2911-032	Fußbrettträger, schwarz stumpf matt	1	St
6	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
7	1029-0640	Linsenschraube M6x40	2	St
8	1049-0052	L-Flanschnutter L-769 M6x8,5	2	St
9	1123-0612	Flügelschraube PA M6x12	2	St
10	1024-0616-033	Senkschraube M6x16, schwarz	4	St
11	1055-0006	Sacheibe A 6,4	4	St
12	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	4	St

Ersatzteile

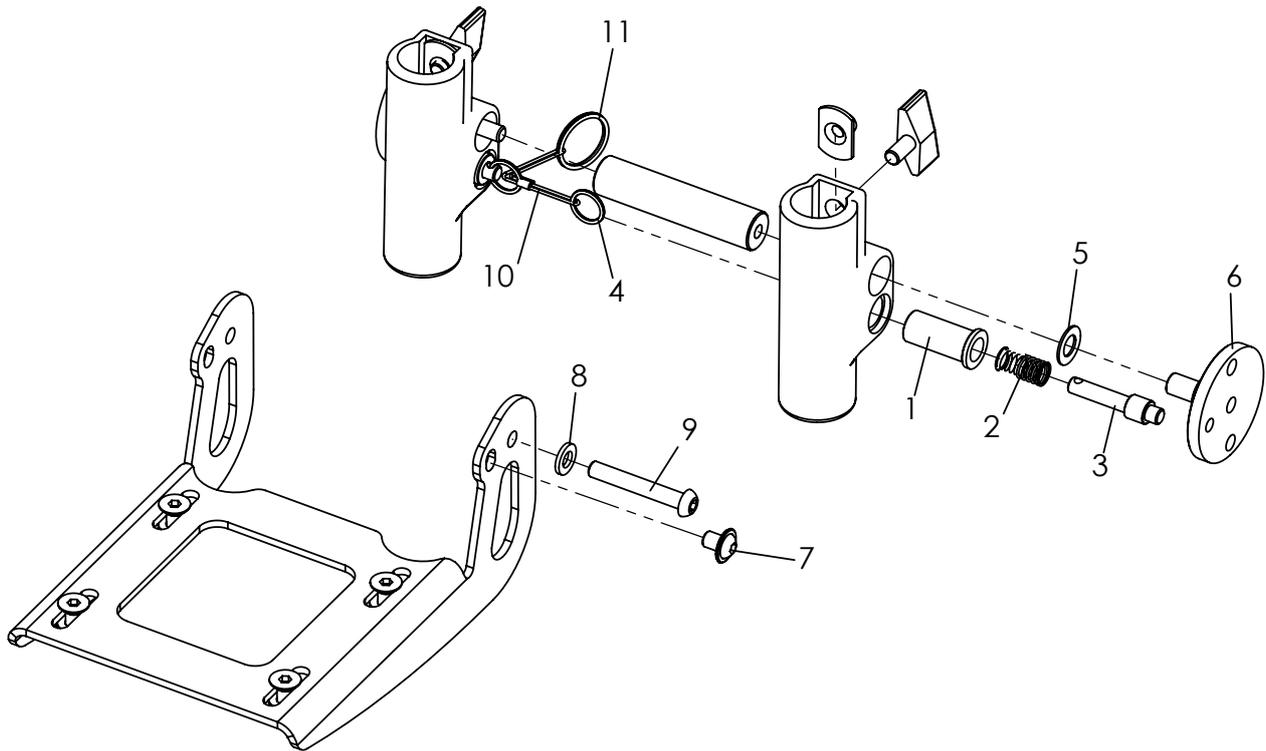


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3240-2950E	Fußbrettaretierung, mit einstellbarem Winkel, Verriegelung	1	St
1	3201-7520	Federgehäuse	2	St
2	1131-0036	Druckfeder D-127D	2	St
3	3201-7530	Sperrriegel	2	St
4	1129-0036	Schlüsselring SP 16x1,6	2	St
5	1052-0008	Federscheibe B8	2	St
6	3201-7510	Sperrlager	2	St
7	1030-0608	Linsen- Flanschkopfschraube M6x8	2	St
8	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
9	1029-0640	Linsenkopfschraube M6x40	2	St
10	3201-7560	Auslöseseil ca 20cm	1	St
11	1129-0003	Schlüsselring SP 24x1,5	1	St

Ersatzteile

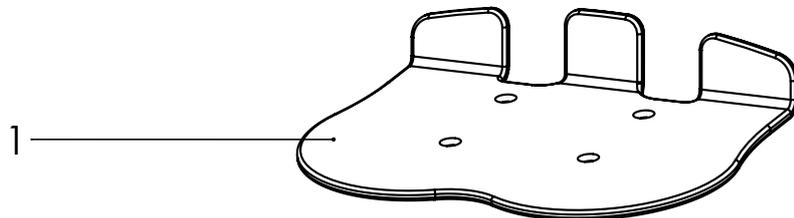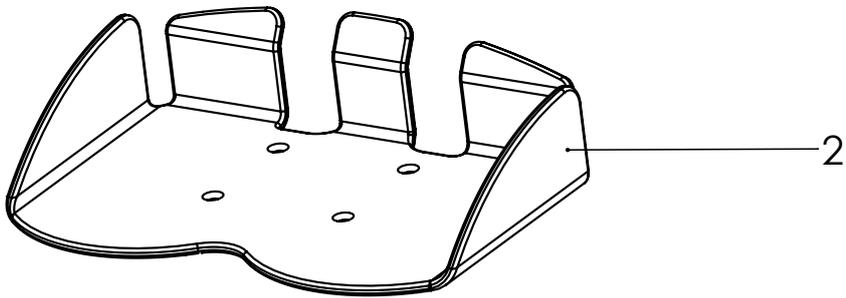

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1	3231-2491E	Fußbrett mit Versenkannte, 27 cm breit	1	St
	3231-2492E	Fußbrett mit Versenkannte, 29 cm breit	1	St
	3231-2493E	Fußbrett mit Versenkannte, 31 cm breit	1	St
	3231-2494E	Fußbrett mit Versenkannte, 33 cm breit	1	St
2	3231-2551E	Fußbrett in Wannenform, Gr. 1, 30cm	1	St
	3233-2551E	Fußbrett in Wannenform, Gr. 2, 35cm	1	St


Ersatzteile

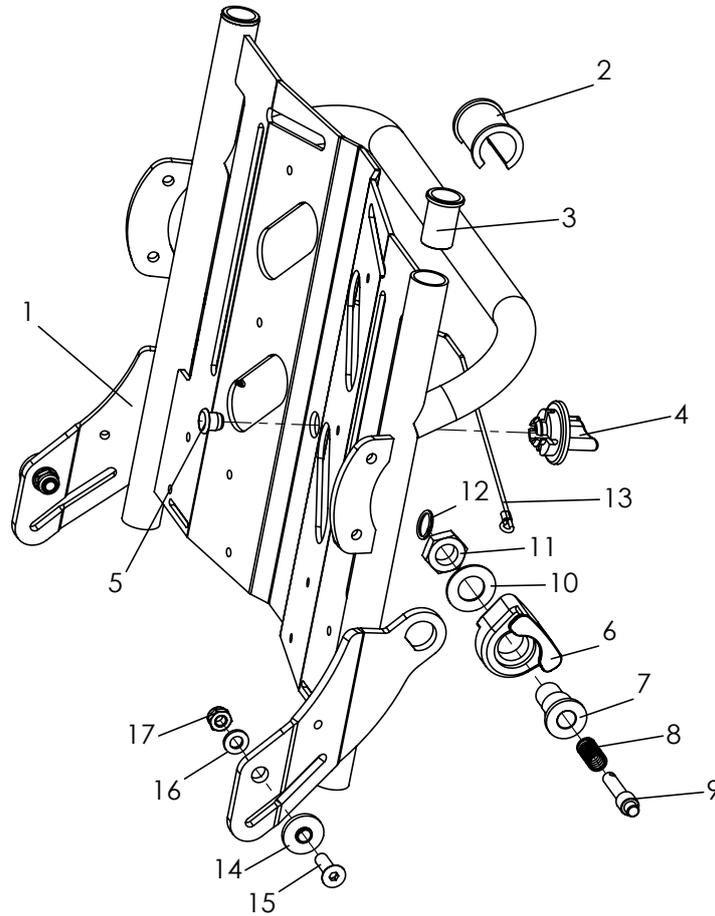

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-17	3231-2300E-xxx	Rückenbasis Gr. 1	1	St
	3233-2300E-xxx	Rückenbasis Gr. 2	1	St
	3235-2300E-xxx	Rückenbasis Gr. 2XL	1	St
1	3231-2310-xxx	Rückenbasis Gr. 1	1	St
	3233-2310-xxx	Rückenbasis Gr. 2	1	St
	3235-2310-xxx	Rückenbasis Gr. 2XL	1	ST
2	3231-2324	Ausgleichsbuchse	1	St
3	3231-2323	Führungsbuchse Rückeneinsch.	2	St
4	3240-2441	Drehknebel	1	St
5	1141-0028	Zierstopfen schwarz 12/8,5x8 mm	1	St
6	3231-2322	Rückenführung	2	St
7	3231-2321	Riegelgehäuse Rücken	2	St
8	1131-0036	Druckfeder D-127D	2	St
9	3201-7530	Sperrriegel	2	St
10	1052-0012	Federscheibe DIN 137 - B12	2	St
11	1040-0012	Sechskantmutter BM12x1,25	2	St
12	1129-0036	Schlüsselring 16x1,6	2	St
13	3231-2325	Auslöseseil-Rückenwinkelverstellung Gr.1	1	St
	3233-2325	Auslöseseil-Rückenwinkelverstellung Gr.2 und 2XL	1	St
14	3231-2131	Lagerbuchse	2	St
15	1024-0620	Senkschraube M6x20, silber <i>bei Rahmenfarbe 024</i>	2	St
	1024-0620-033	Senkschraube M6x20, schwarz <i>bei Rahmenfarbe 032</i>	2	St
16	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
17	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
18	1089-0007	Kabelbinder schwarz, 3,3 x 145 lang	1	St
19	1119-0003	Kabelschelle D6,3 mm PA natur	1	St
20	1062-0410	Blindniet F4x10	1	St

18-20 sind nicht abgebildet, werden lose beigelegt.


Ersatzteile

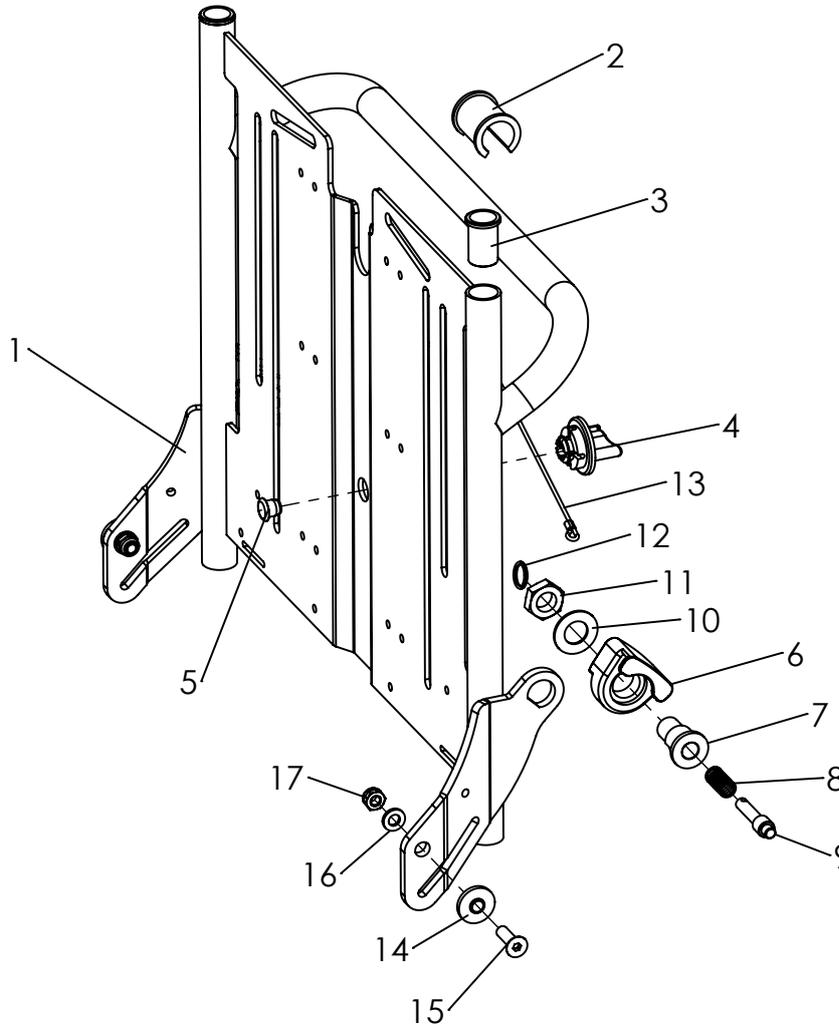

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-17	3231-3300E-xxx	Rückenbasis OT Gr. 1	1	St
	3233-3300E-xxx	Rückenbasis OT Gr. 2	1	St
1	3231-3310-xxx	Rückenbasis OT Gr. 1	1	St
	3233-3310-xxx	Rückenbasis OT Gr. 2	1	St
2	3231-2324	Ausgleichsbuchse	1	St
3	3231-2323	Führungsbuchse Rückeneinsch.	2	St
4	3240-2441	Drehknebel	1	St
5	1141-0028	Zierstopfen schwarz 12/8,5x8 mm	1	St
6	3231-2322	Rückenführung	2	St
7	3231-2321	Riegelgehäuse Rücken	2	St
8	1131-0036	Druckfeder D-127D	2	St
9	3201-7530	Sperrriegel	2	St
10	1052-0012	Federscheibe DIN 137 - B12	2	St
11	1040-0012	Sechskantmutter BM12x1,25	2	St
12	1129-0036	Schlüsselring 16x1,6	2	St
13	3231-2325	Auslöseseil-Rückenwinkelverstellung Gr.1	1	St
	3233-2325	Auslöseseil-Rückenwinkelverstellung Gr.2 und 2XL	1	St
14	3231-2131	Lagerbuchse	2	St
15	1024-0620	Senkschraube M6x20, silber <i>bei Rahmenfarbe 024</i>	2	St
	1024-0620-033	Senkschraube M6x20, schwarz <i>bei Rahmenfarbe 032</i>	2	St
16	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
17	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
18	1089-0007	Kabelbinder schwarz, 3,3 x 145 lang	1	St
19	1119-0003	Kabelschelle D6,3 mm PA natur	1	St
20	1062-0410	Blindniet F4x10	1	St


18-20 sind nicht abgebildet, werden lose beigelegt.

Ersatzteile

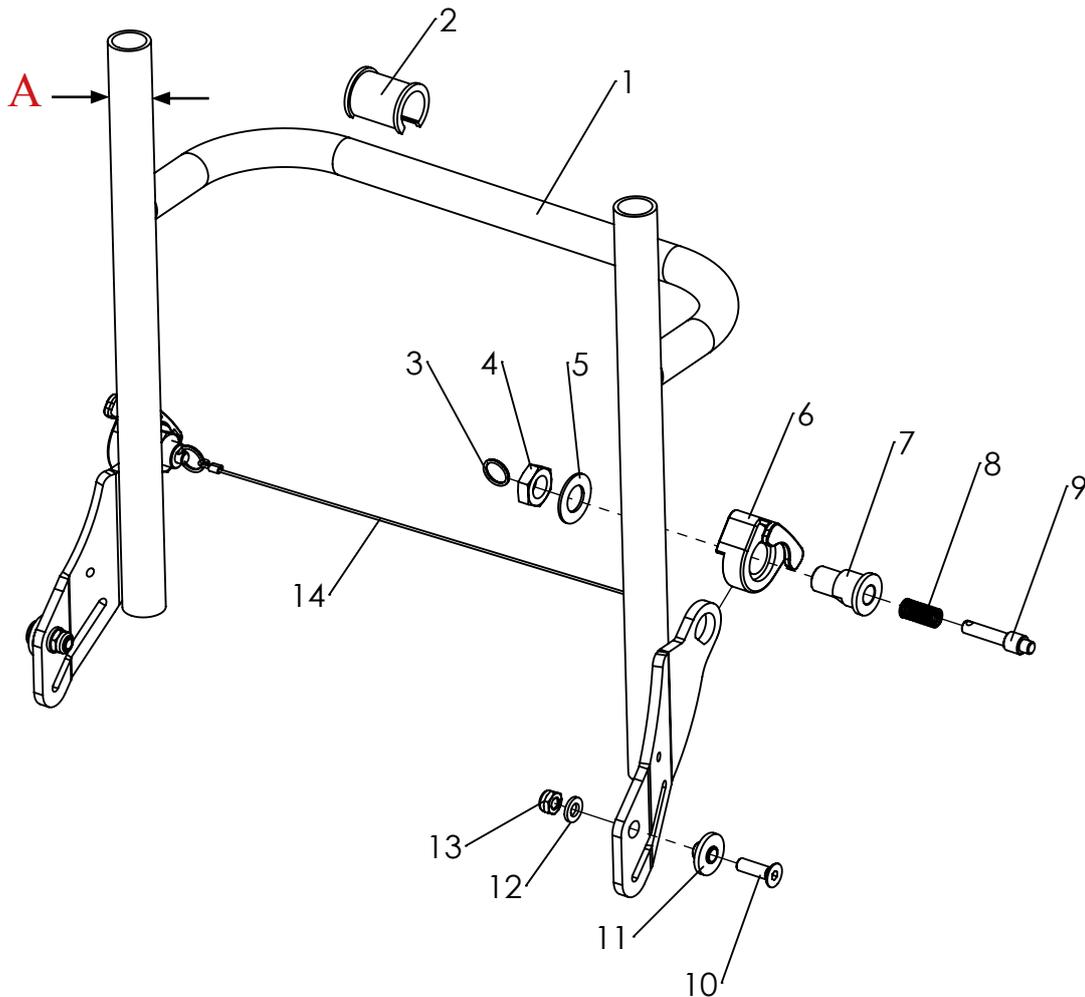


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-14	3231-3600E	Rückenbasis OT Plus Gr. 1 A = Außendurchmesser 25mm	1	St
	3233-3600E	Rückenbasis OT Plus Gr. 2	1	St
	3231-3400E-xxx	Rückenbasis OT Professional Gr. 1 A = Außendurchmesser 25mm	1	St
	3233-3400E-xxx	Rückenbasis OT Professional Gr. 2	1	St
1	3231-3610-xxx	Rückenbasis OT Plus Gr. 1	1	St
	3233-3610-xxx	Rückenbasis OT Plus Gr. 2	1	St
	3231-3410-xxx	Rückenbasis OT Professional Gr. 1	1	St
	3233-3410-xxx	Rückenbasis OT Professional Gr. 2	1	St
2	3231-2324	Ausgleichsbuchse	1	St
3	1129-0036	Schlüsselring 16x1,6	2	St
4	1040-0012	Sechskantmutter M12	2	St
5	1052-0012	Federscheibe B12	2	St
6	3231-2322	Rückenführung	2	St
7	3231-2321	Riegelgehäuse	2	St
8	1131-0036	Druckfeder D-127	2	St
9	3201-7530	Sperrriegel	2	St
10	1024-0620	Senkschraube M6x20	2	St
11	3231-2131	Lagerbuchse	2	St
12	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
13	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
14	3231-3699	Auslöseseil Rückenwinkelverstellung Gr. 1	1	St
	3233-3699	Auslöseseil Rückenwinkelverstellung Gr. 2	1	St

Ersatzteile

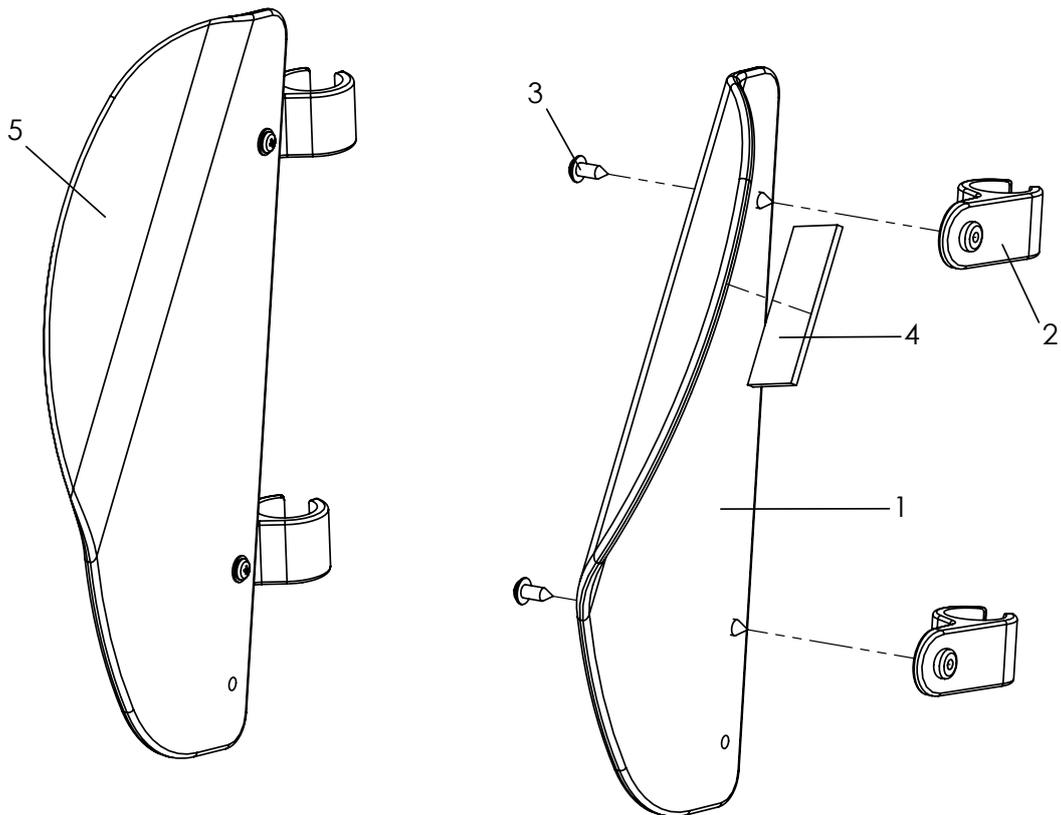

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3231-2710E	Seitenpelotte links, Gr. 1	1	St
	3233-2710E	Seitenpelotte links, Gr. 2	1	St
1	3201-2711	Seitenpelotte, Formteil Gr.1, links	1	St
	3203-2711	Seitenpelotte, Formteil Gr. 2, links	1	St
2-5	3231-2720E	Seitenpelotte rechts, Gr. 1	1	St
	3233-2720E	Seitenpelotte rechts, Gr. 2	1	St
2	3231-2712	Pelottenscharnier	2	St
3	1039-0003	Kunststoffschraube 4x12	2	St
4	1501-0003	Hakenband schwarz selbstkl. 25mm ca. 10cm lang	0,1	m
5	3201-2721	Seitenpelotte, Formteil Gr. 1, rechts	1	St
	3203-2721	Seitenpelotte, Formteil Gr. 2, rechts	1	St


Polster für Seitenpelotte, Seite 58

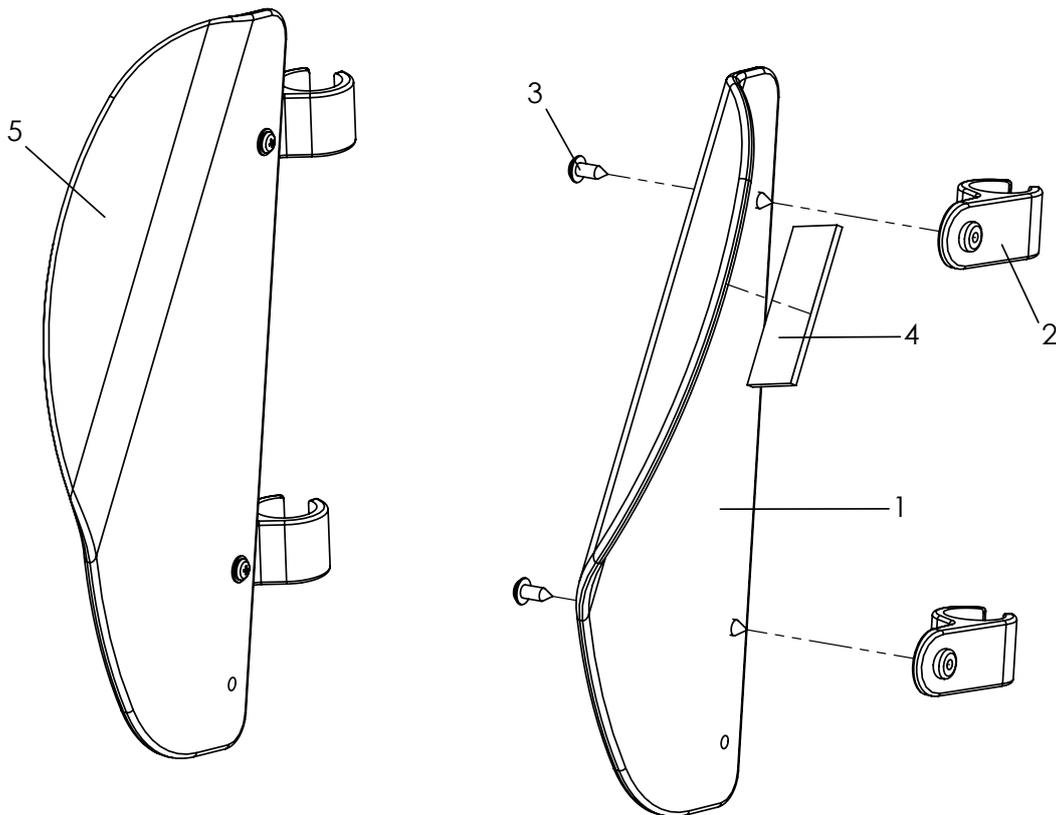

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3231-2730E	Seitenpelotte links, Gr. 1, Alu schwarz	1	St
	3233-2730E	Seitenpelotte links, Gr. 2, Alu schwarz	1	St
	3235-2710E	Seitenpelotte links, Gr. 2XL, Alu schwarz	1	St
1	3201-2714-032	Seitenpelotte, Formteil Gr.1, links, Alu schwarz	1	St
	3203-2714-032	Seitenpelotte, Formteil Gr. 2, links, Alu schwarz	1	St
	3235-2711-032*	Seitenpelotte, Formteil Gr. 2XL, links, Alu schwarz	1	St
2-5	3231-2740E	Seitenpelotte rechts, Gr. 1, Alu schwarz	1	St
	3233-2740E	Seitenpelotte rechts, Gr. 2, Alu schwarz	1	St
	3235-2720E	Seitenpelotte rechts, Gr. 2XL, Alu schwarz	1	St
2	3231-2712	Pelottenscharnier	2	St
3	1039-0001	Kunststoffschraube 4x10	2	St
4	1501-0003	Hakenband schwarz selbstkl. 25mm ca. 10cm lang	0,1	m
5	3201-2724-032	Seitenpelotte, Formteil Gr. 1, rechts, Alu schwarz	1	St
	3203-2724-032	Seitenpelotte, Formteil Gr. 2, rechts, Alu schwarz	1	St
	3235-2721-032*	Seitenpelotte, Formteil Gr. 2XL, rechts, Alu schwarz	1	St
	*1039-0001	bei 2XL Kunststoffschraube 4x10	3	St
	*3231-2712	bei 2XL, Pelottenscharniere, Pos. 2	3	St

Polster für Seitenpelotte, Seite 58


Ersatzteile

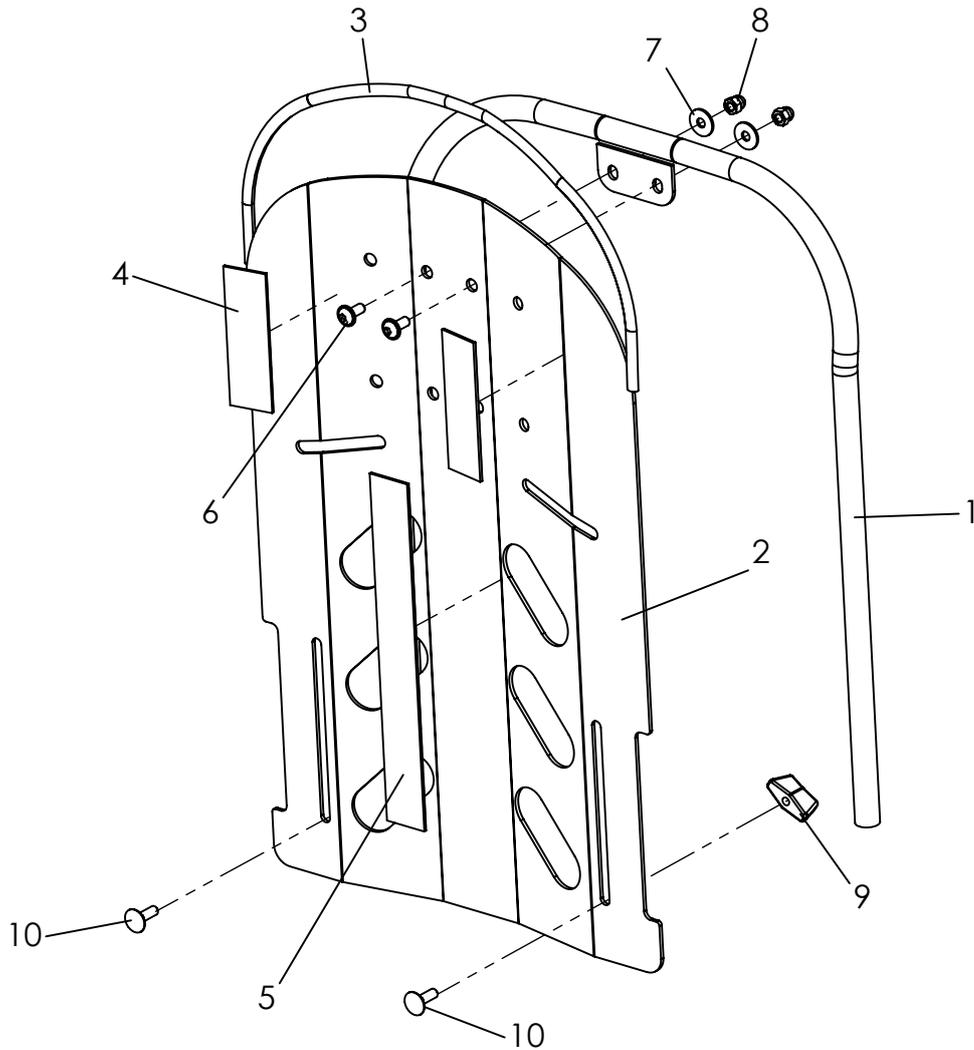

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3201-2800E-xxx	Rückeneinschub Gr.1	1	St
	3203-2800E-xxx	Rückeneinschub Gr.2 und 2XL	1	St
1	3201-2810-xxx	Rückenbügel Gr.1	1	St
	3203-2810-xxx	Rückenbügel Gr.2	1	St
2-5	3201-2822E-xxx	Rückenblech Gr. 1 mit Verbindungselemente	1	St
	3203-2822E-xxx	Rückenblech Gr. 2 mit Verbindungselemente	1	St
2	3201-2822-xxx	Rückenblech Gr.1	1	St
	3203-2822-xxx	Rückenblech Gr.2	1	St
3	1144-0001	KS-Profil PVC weich	0,5	St
4	1501-0003	Hakenband selbstklebend (2x 0,05m, 1x 0,1m)	0,2	m
5	1501-0003	Hakenband selbstklebend (1x 0,2)	0,2	St
6	1030-0512	Linse - Flanschkopfschraube M5x12	2	St
7	1055-0005	Scheibe verz DIN/ISO 9021 A5,3	2	St
8	1044-0005	Hutmutter M5	2	St
9	1123-0500	Flügelmutter PA schwarz	2	St
10	1026-0516	Flachrundschrabe M5x16 bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1026-0516-033	Flachrundschrabe M5x16 schwarz, bei Rahmenfarbe 032	2	St


**Schrauben ändern sich mit der Rahmenfarbe!*

Ersatzteile

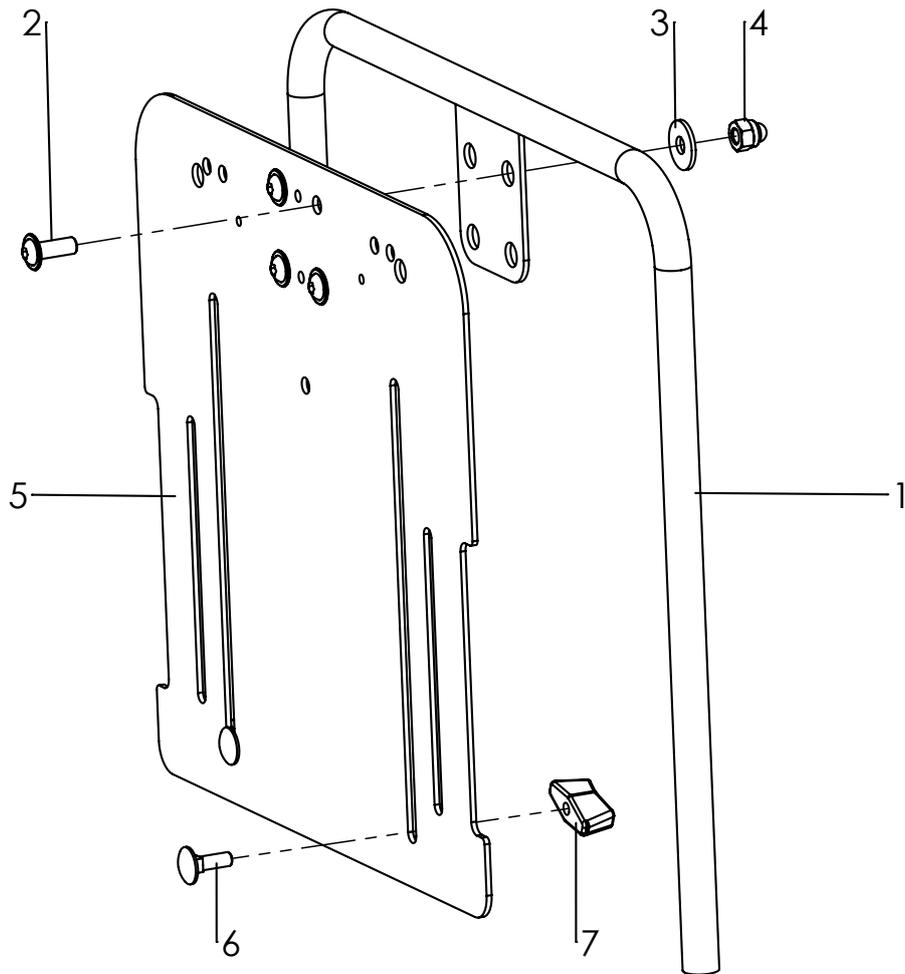


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3201-3800E-xxx	OT Rückeneinschub Gr. 1	1	St
	3203-3800E-xxx	OT Rückeneinschub Gr. 2	1	St
1-4	3201-3810-xxx	OT Rahmen Gr. 1	1	St
	3203-3810-xxx	OT Rahmen Gr. 2	1	St
2	1030-0616	Linsen- Flanschkopfschraube M6x16	4	St
3	1055-0006	Scheibe A6,4	4	St
4	1044-0006	Sechskanthenmutter selbstsichernd M6	4	St
5-7	3201-3822E-xxx	OT Rückenblech Gr. 1 mit Verbindungselementen	1	St
	3203-3822E-xxx	OT Rückenblech Gr. 2 mit Verbindungselementen	1	St
6	1026-0516	Flachrundschraube M5x16 bei Rahmenfarbe 024	2	St
	1026-0516-033	Flachrundschraube M5x16 bei Rahmenfarbe 032	2	St
7	1123-0500	Flügelmutter PA schwarz M5	2	St

Ersatzteile

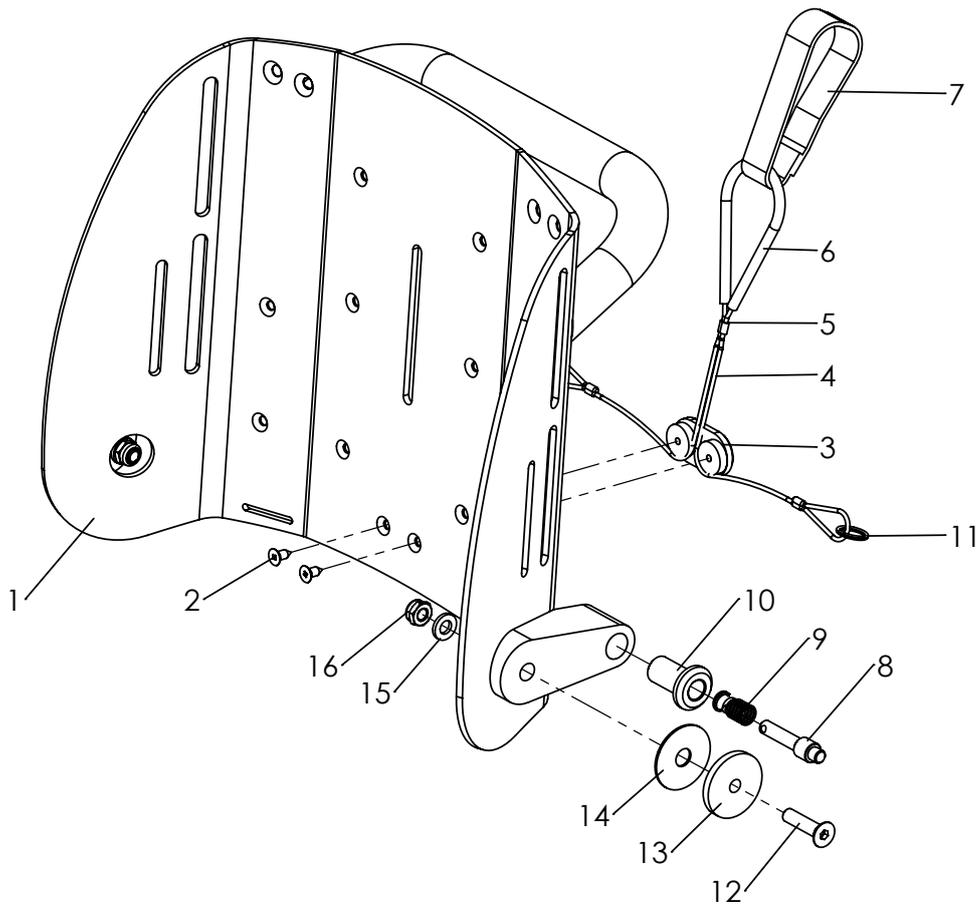

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-16	3230-2301E-032	Rückenbasis komplett Mini	1	St
1	3230-2310-032	Rückenbasis Mini	1	St
2-7	3230-2325	Auslöseseil für Rückenverstellung, Mini	1	Set
8	3201-7530	Sperrriegel	2	St
9	1131-0036	Druckfeder D-127D	2	St
10	3230-2322	Riegelbuchse	2	St
11	1129-0036	Schlüsselring SP 14x1,3	2	St
12	1024-0625-033	Senkschraube M6x25	2	St
13	3230-2321-033	Lagerachse	2	St
14	1113-0065	Scheibe PA 30x8,4x1 natur	2	St
15	1051-0006	Scheibe A6,4	2	St
16	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St

Ersatzteile

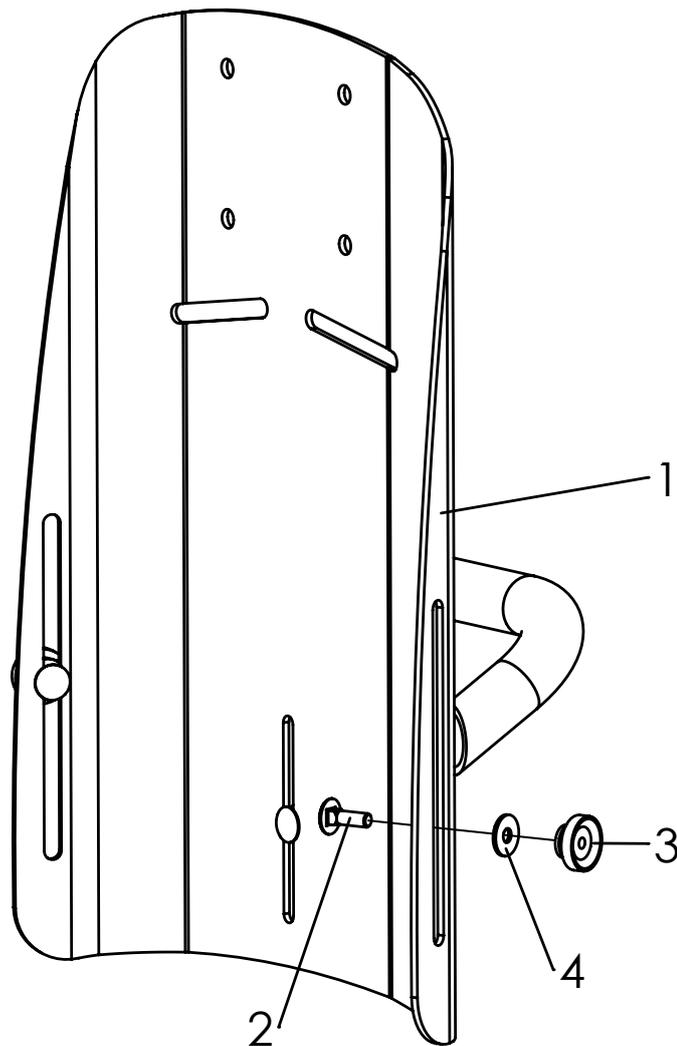

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3230-2302E-032	Rückeneinschub, komplett	1	St
1	3230-2331-032	Rückeneinschub Mini	1	St
2	1026-0516-033	Flanschrundschaube M5x16	3	St
3	1124-0500	Rändelmutter	3	St
4	1055-0005-033	Scheibe A5,3	3	St
5	1501-0003	Hakenband selbstklebend 25mm, ca 6 cm lang, 6 St.	0,36	m
	1501-0003	Hakenband selbstklebend 25mm, ca 10 cm lang, 1 St.	0,12	m

Ersatzteile




Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3230-5200E-xxx	Polsterauflage, Mini	1	St
	3232-5100E-xxx	Polsterauflage, Gr. 1	1	St
	3234-5100E-xxx	Polsterauflage, Gr. 2	1	St
	3235-5200E-xxx	Polsterauflage, Gr. 2XL	2	St
1	3230-5120-xxx	Rückenpolster, Mini	1	St
	3231-5120-xxx	Rückenpolster, Gr. 1	1	St
	3233-5120-xxx	Rückenpolster, Gr. 2	1	St
	3235-5120-xxx	Rückenpolster, Gr. 2XL	1	St
2	3230-5160E-xxx	Seitenpolster, Mini	1	Paar
	3201-5160E-xxx	Seitenpolster, Gr. 1	1	Paar
	3203-5160E-xxx	Seitenpolster, Gr. 2	1	Paar
	3235-5160E-xxx	Seitenpolster, Gr. 2XL	1	Paar
3	3230-5140-xxx	Sitzpolster, Mini	1	St
	3232-5140-xxx	Sitzpolster, Gr 1	1	St
	3234-5140-xxx	Sitzpolster, Gr 2	1	St
	3235-5140-xxx	Sitzpolster, Gr 2XL	1	St
4	3231-9500E-xxx	Seitenblenden passend zur Polsterfarbe	1	Paar
5	3231-2920-323	Polster Oberschenkelführung, Gr. 1 und Mini, eisengrau	1	Paar
	3233-2920-323	Polster Oberschenkelführung, Gr. 2, eisengrau	1	Paar
	3235-2920-323	Polster Oberschenkelführung, Gr. 2XL, eisengrau	1	Paar
6	3230-5150-xxx	Hüftpolster, Mini	1	Paar
	3201-5150E-xxx	Hüftpolster, Gr. 1	1	Paar
	3203-5150E-xxx	Hüftpolster, Gr. 2	1	Paar
	3235-5150E-xxx	Hüftpolster, Gr. 2XL	1	Paar

bei Bestellung **xxx** durch Farbcode ersetzen!


338	339	340	344	345
Sand / Eisengrau	Türkis / Eisengrau	Pink / Eisengrau	Schw arz Karo / Eisengrau	Rot / Eisengrau

Ersatzteile

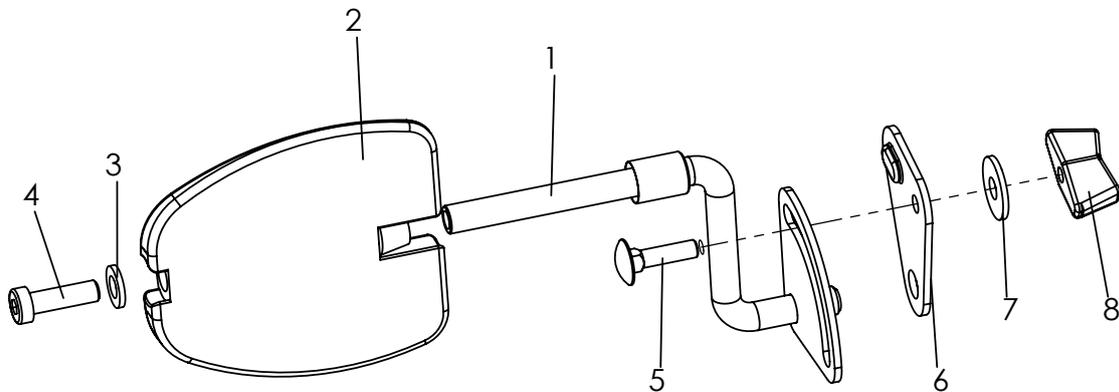


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-8	3231-7700	Thoraxpelotten Gr. 1 ohne Polster	1	Paar
	3233-7700	Thoraxpelotten Gr. 2 ohne Polster	1	Paar
	3235-7700	Thoraxpelotten Gr. 3 ohne Polster	1	Paar
1	3201-7720-008	Pelottenarm rechts, Abbildung	1	St
	3201-7710-008	Pelottenarm links	1	St
2	3231-7730	Pelotte Gr. 1	2	St
	3233-7730	Pelotte Gr. 2	2	St
	3234-7730	Pelotte Gr. 3	2	St
3	1051-0006	Scheibe A6,4 verz DIN/ISO 125 A6,4	2	St
4	1022-0620	Zylinderschraube M6x20 bei Gr. 1	2	St
	1022-0640	Zylinderschraube M6x40 bei Gr. 2	2	St
	1022-0650	Zylinderschraube M6x50 bei Gr. 3	2	St
5	1026-0520	Flachrundschrabe M5x20	2	St
6	3201-7717-008	Pelottenführung rechts	1	St
	3201-7716-008	Pelottenführung links	1	St
7	1055-0006	Scheibe A6,4	2	St
8	1123-0500	Flügelmutter-PA schwarz M5	2	St
9	3231-7760-323	Bezug Gr. 1 eisengrau	2	St
	3233-7760-323	Bezug Gr. 2 eisengrau	2	St
	3203-7760-323	Bezug Gr. 3 eisengrau	2	St

Ersatzteile

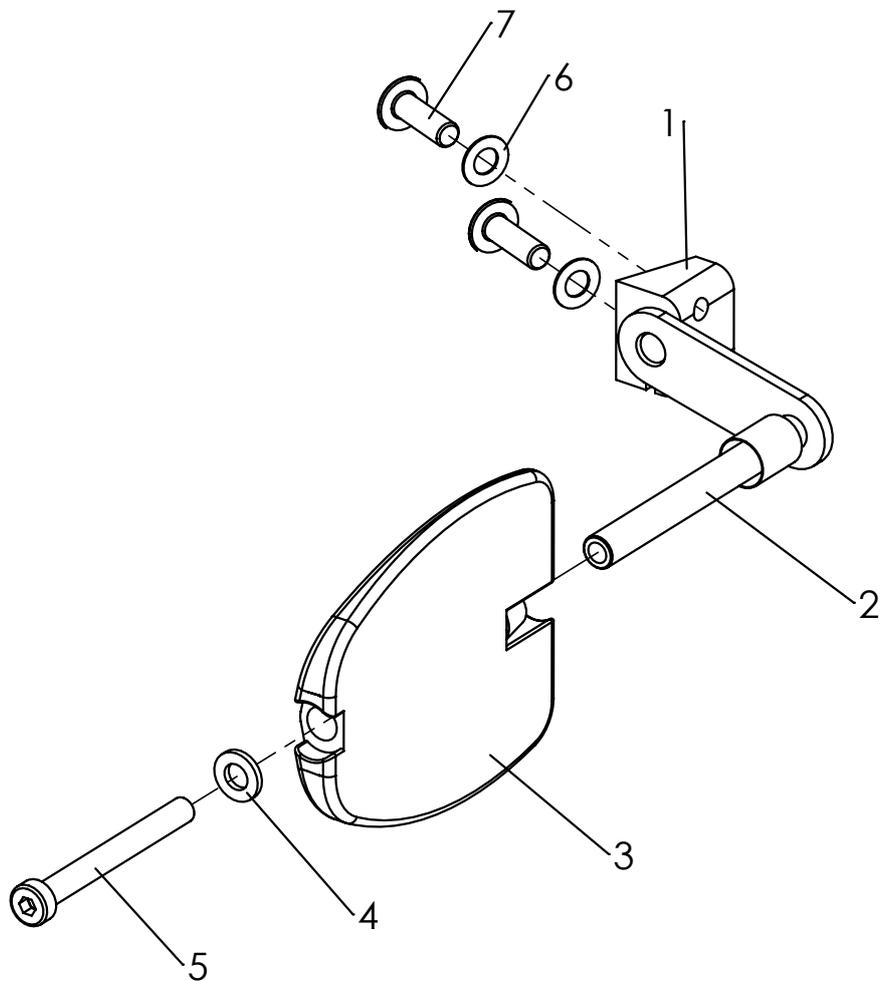


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3230-7700	Thoraxpelotten Mini, eisengrau mit Polster		1 Set
1	3230-7721-007	Klemmbasis Mini	2 St	
2	3230-7710	Schwenkhebel Thoraxpelotte Mini	2 St	
3	3231-7730	Pelotte Gr. 1	2 St	
4	1051-0006	Scheibe A6,4	2 St	
5	1022-0620	Zylinderschraube M6x20	2 St	
6	1052-0006	Federscheibe B6	4 St	
7	1030-0620	Linsen-Flanschkopfschraube M6x21	4 St	
8	3231-7760-323	Bezug Gr 1. eisengrau	2 St	

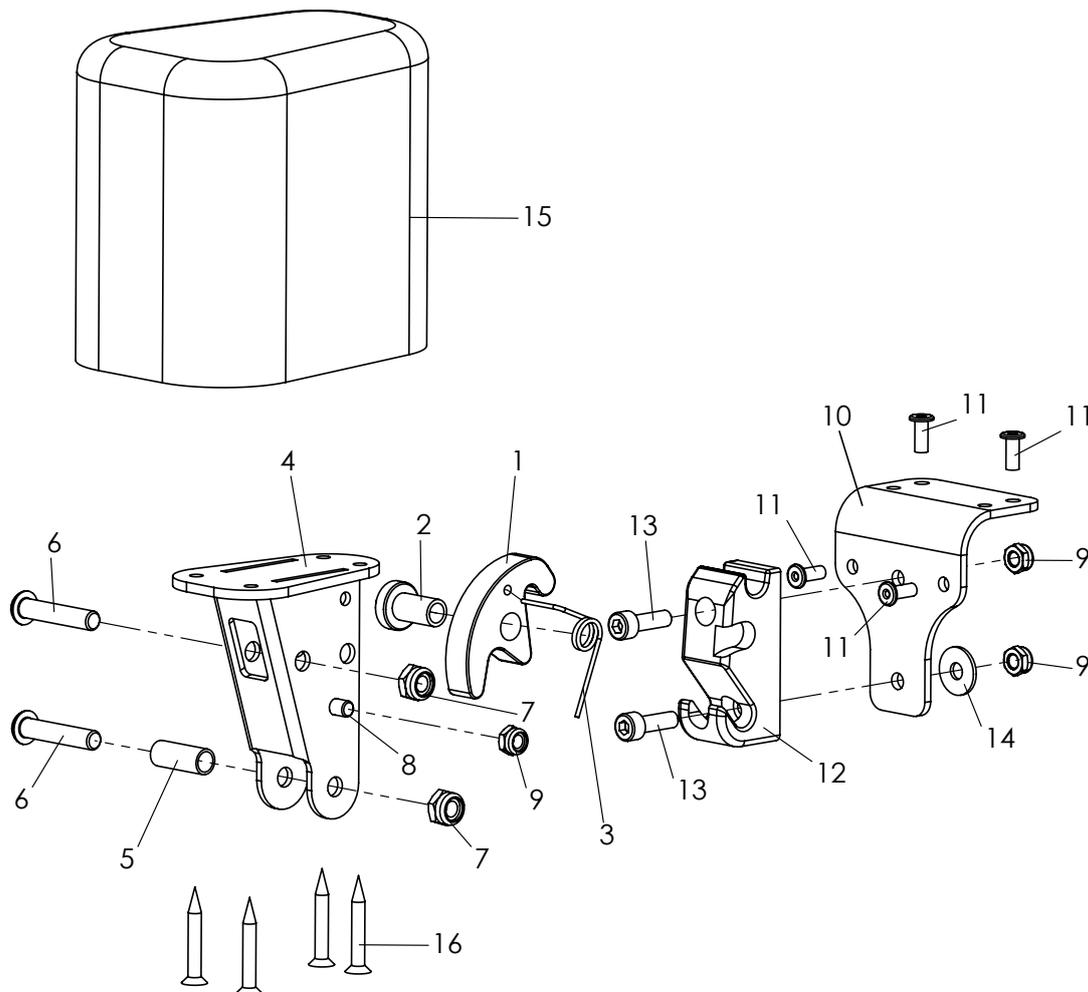


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-16	3231-7800	Abduktionskeil Gr. 1 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug	1	St
	3231-7900	Abduktionskeil Gr. 2 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug	1	St
	3233-7800	Abduktionskeil Gr. 3 abschwenkbar und abnehmbar, ohne Bezug	1	St
1	3231-7841	Arretierhaken	1	St
2	3231-7842	Lager Arretierhaken	1	St
3	1133-0020	Schenkelfeder 1,25 x 9,25 x 2,25	1	St
4	3231-7820-032	A-Keil-Träger, stumpf matt schwarz	1	St
5	1114-0013	Buchse verz 8x0,8x20	1	St
6	1029-0630	Linsenschraube M6x30	2	St
7	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
8	1021-0508	Zylinderschraube M5x8	1	St
9	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	3	St
10	3231-7831-032	Basisblech A-Keilaufnahme schwarz stumpf matt	1	St
11	1062-0410	Blindniet F4x10	4	St
12	3231-7832	Arretierstück A-Keilaufnahme	1	St
13	1021-0516	Zylinderschraube M5x16	2	St
14	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St
15	3201-7810	Holzkeil Gr. 1 mit PU-Schaum	1	St
	3201-7910	Holzkeil Gr. 2 mit PU-Schaum	1	St
	3203-7810	Holzkeil Gr. 3 mit PU-Schaum	1	St
16	1028-0430	ABC-SPAX-S Senkschraube 4x30	4	St
	3201-7840-323	Überzug für A-Keil Gr. 1 eisengrau	1	St
	3201-7940-323	Überzug für A-Keil Gr. 2 eisengrau	1	St
	3203-7840-323	Überzug für A-Keil Gr. 3 eisengrau	1	St

Ersatzteile

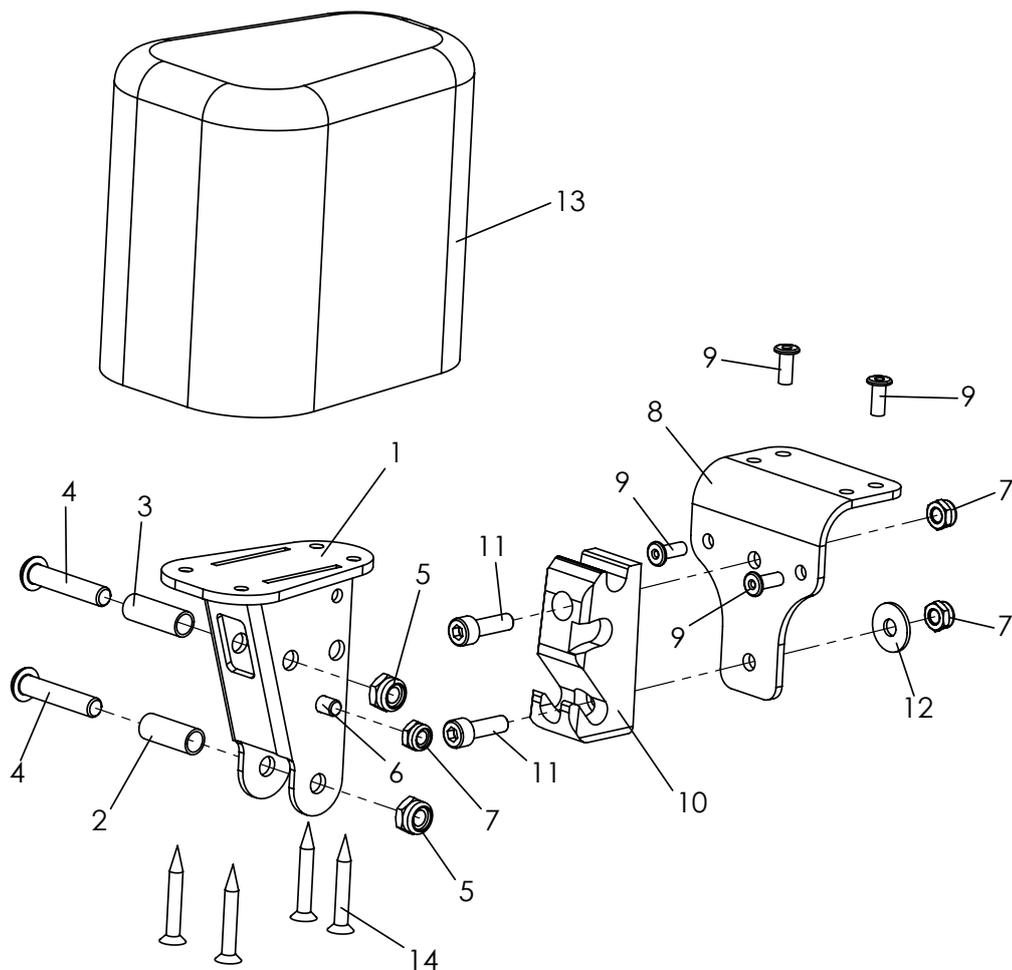


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-14	3231-7801	Abduktionskeil Gr. 1, fest, ohne Polster	1	St
	3231-7901	Abduktionskeil Gr. 2, fest, ohne Polster	1	St
	3233-7801	Abduktionskeil Gr. 3, fest, ohne Polster	1	St
1	3231-7820-032	A-Keil-Träger, schwarz stumpf matt	1	St
2	1114-0013	Buchse verz 8x0,8x20	1	St
3	1114-0012	Buchse verz 8x0,8x22,5	1	St
4	1029-0630	Linsenschraube M6x30	2	St
5	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
6	1021-0508	Zylinderschraube M5x8, <i>von innen einsetzen</i>	1	St
7	1042-0005	Sechskantmutter selbstsichernd M5	3	St
8	3231-7831-032	Basisblech A-Keilaufnahme, schwarz stumpf matt	1	St
9	1062-0410	Blindniet F4x10	4	St
10	3231-7832	Arretierstück A-Keilaufnahme	1	St
11	1021-0516	Zylinderschraube M5x16	2	St
12	1055-0005	Scheibe A5,3	1	St
13	3201-7810	Holzkeil Gr. 1, mit PU-Schaum	1	St
	3201-7910	Holzkeil Gr. 2, mit PU-Schaum	1	St
	3203-7810	Holzkeil Gr. 3, mit PU-Schaum	1	St
14	1028-0430	SPAX-S Senkschraube verz 4x30	4	St
	3201-7840-323	bezug für A-Keil Gr. 1 eisengrau	1	St
	3201-7940-323	bezug für A-Keil Gr. 2 eisengrau	1	St
	3203-7840-323	bezug für A-Keil Gr. 3 eisengrau	1	St

Ersatzteile

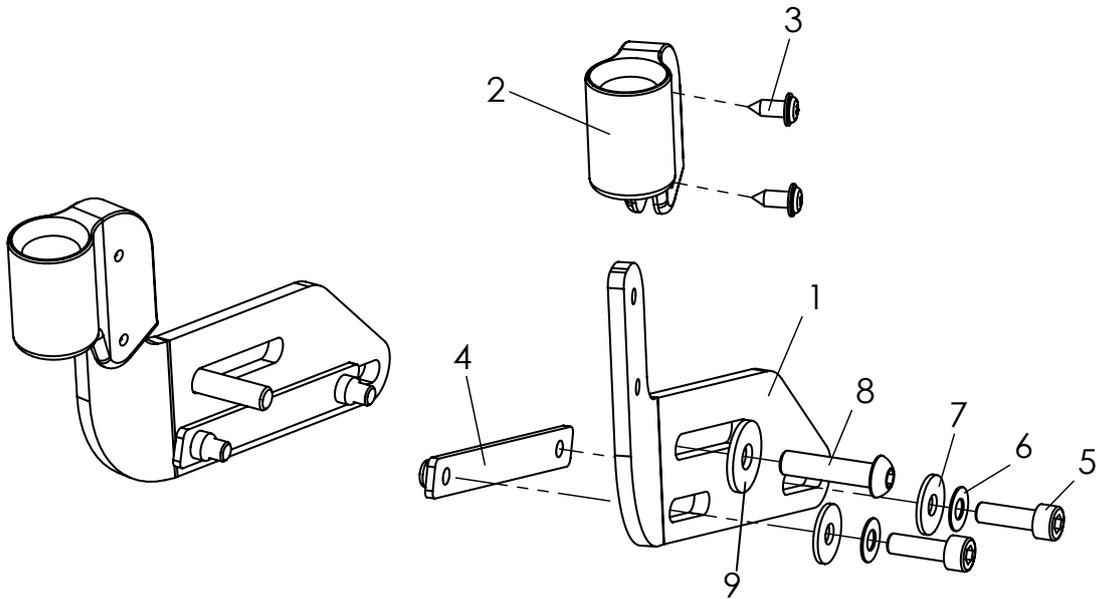


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-9	3232-2203-032	Zubehöraufnahme	1	Paar
	3232-2204-032	Zubehöraufnahme lang	1	Paar
1	3232-2232-032	Träger Zubehöraufnahme verschiebbar, links	1	St
	3232-2242-032	Träger Zubehöraufnahme verschiebbar, rechts	1	St
	3232-2233-032	Träger lang Zubehöraufnahme verschiebbar, links	1	St
	3232-2243-032	Träger lang Zubehöraufnahme verschiebbar, rechts	1	St
2	3231-2232	Zubehöraufnahme	2	St
3	1039-0001	Kunststoffschraube 4x10	2	St
4	3232-2235	Gewindeplatte	2	St
5	1021-0516-033	Zylinderschraube M5x16 schwarz	4	St
6	1052-0005-033	Federscheibe B5 schwarz	4	St
7	1055-0005-033	Scheibe A5,3 schwarz	4	St
8	1029-0625-033	Linsenschraube M6x25 schwarz	2	St
9	1055-0006-033	Scheibe A6,4 schwarz	2	St

Ersatzteile

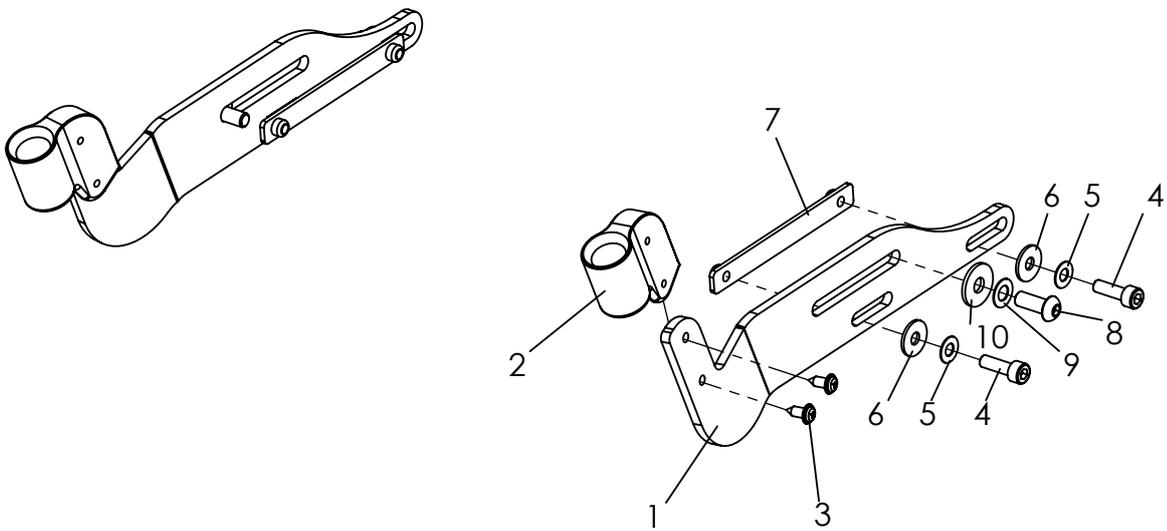


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-10	3230-2201-032	Zubehöraufnahme Mini	1	Set
1	3230-2232-032	Zbehöraufnahme Mini (verschiebbar), links	1	St
	3230-2242-032	Zubehöraufnahme Mini (verschiebbar), rechts	1	St
2	3231-2232	Zubehöraufnahme	2	St
3	1039-0001	Kunststoffschraube Flansch	4	St
4	1021-0516-033	Zylinderschraube M5x16	4	St
5	1052-0005-033	Federscheibe B5	4	St
6	1055-0005-033	Scheibe A5,3	4	St
7	3232-2235	Gewindeplatte	2	St
8	1029-0625-033	Linsenschraube M6x25 schwarz	2	St
9	1052-0006-033	Federscheibe B6 schwarz	2	St
10	1055-0006-033	Scheibe A6,4 schwarz	2	St

Ersatzteile

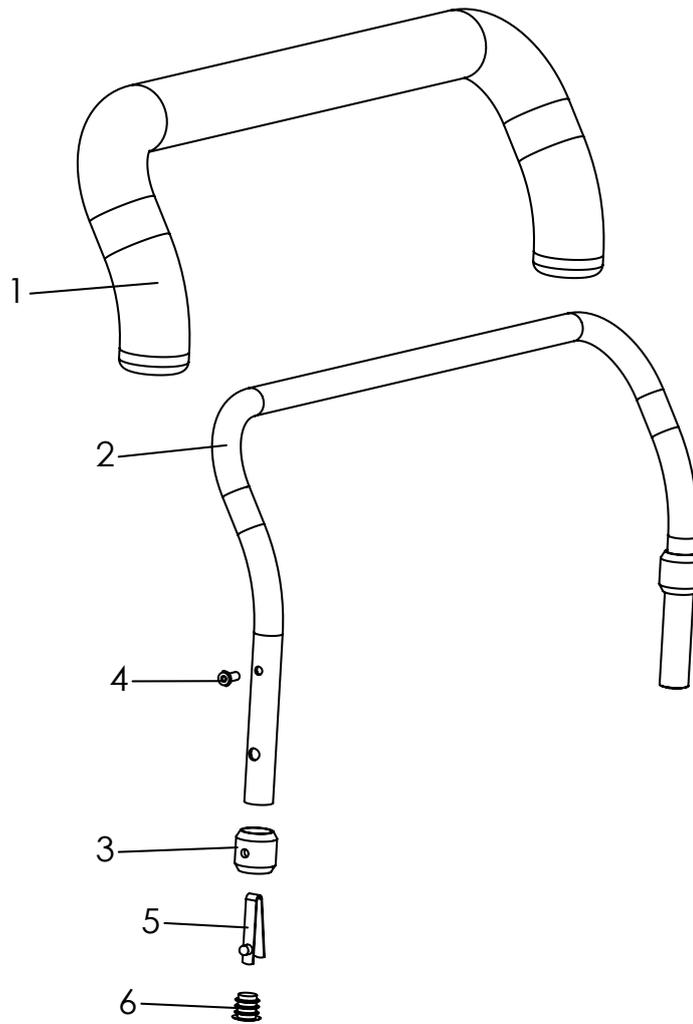


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-7	3230-8100-323	Haltebügel mit Polster Mini	1	St
	3231-8100-323	Haltebügel mit Polster Gr. 1	1	St
	3233-8100-323	Haltebügel mit Polster Gr. 2	1	St
1	3230-8130	Schaumstoffpolster Mini (55 cm)	1	St
	3231-8130	Schaumstoffpolster Gr. 1 (60 cm)	1	St
	3203-8130	Schaumstoffpolster Gr. 2 (70 cm)	1	St
2-4	3230-8110E	Rohrbogen Haltebügel Mini	1	St
	3231-8110E	Rohrbogen Haltebügel Gr.1	1	St
	3233-8110E	Rohrbogen Haltebügel Gr. 2	1	St
3	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
4	1062-0408	Blindniete F4x8	2	St
5	1134-0005	Stativfeder A 102	2	St
6	1141-0001	Lamellenstopfen	2	St
7	3230-8140-323	Überzug für Haltebügel Mini, eisengrau	1	St
	3201-8140-323	Überzug für Haltebügel Gr. 1, eisengrau	1	St
	3203-8140-323	Überzug für Haltebügel Gr. 2, eisengrau	1	St

Ersatzteile

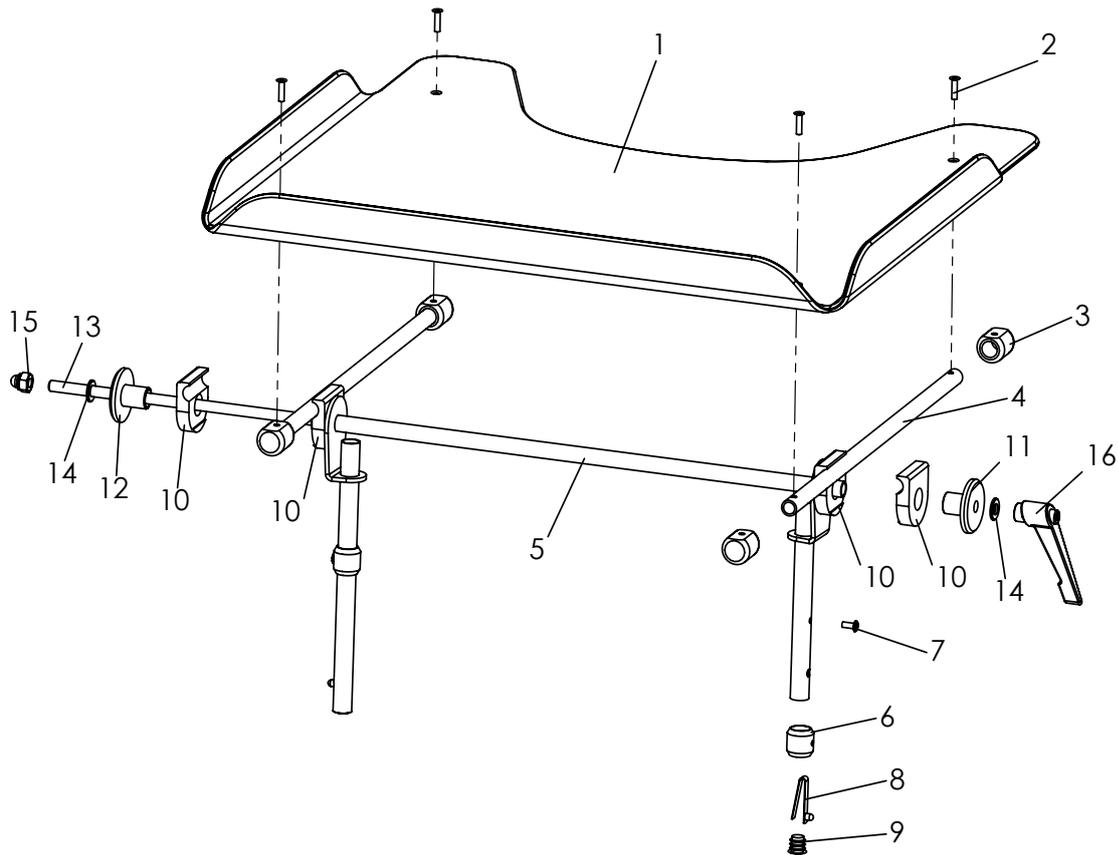


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-16	3230-8200	Therapietisch Mini, transparent	1	St
	3231-8200	Therapietisch Gr. 1, transparent	1	St
	3233-8200	Therapietisch Gr. 2, transparent	1	St
	3230-8201	Therapietisch Mini, grau	1	St
	3231-8201	Therapietisch Gr. 1 grau	1	St
	3233-8201	Therapietisch Gr. 2 grau	1	St
1	3231-8290	Tischplatte transparent	1	St
	3231-8291	Tischplatte grau	1	St
1-4	3231-8280	Tischplatte transparent, mit Schiene	1	St
	3231-8281	Tischplatte grau, mit Schiene	1	St
2	1063-0416	Blindniet S4x16 Senkkopf	4	St
3	3201-8280	Lagerblock	4	St
4	3201-8270-016	Schiene	2	St
5-9	3230-8210E-032	Grundträger Mini	1	St
	3231-8210E-032	Grundträger Gr. 1	1	St
	3233-8210E-032	Grundträger Gr. 2	1	St
6	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
7	1062-0410	Blindniete F4x10	2	St
8	1134-0005	Statiefeder A-102	2	St
9	1141-0001	Lamellenstopfen	2	St
10	3201-8230	Klemmbacke	4	St
11	3201-8240	Druckscheibe D8,5	1	St
12	3201-8250	Druckscheibe mit Gewinde M8	1	St
13	1039-0002	Gewindestange 47,2cm lang	0,47	M
14	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
15	1044-0008	Hutmutter sechskant M8	1	St
16	1121-0800	Klemmhebel PA schwarz M8	1	St

Ersatzteile

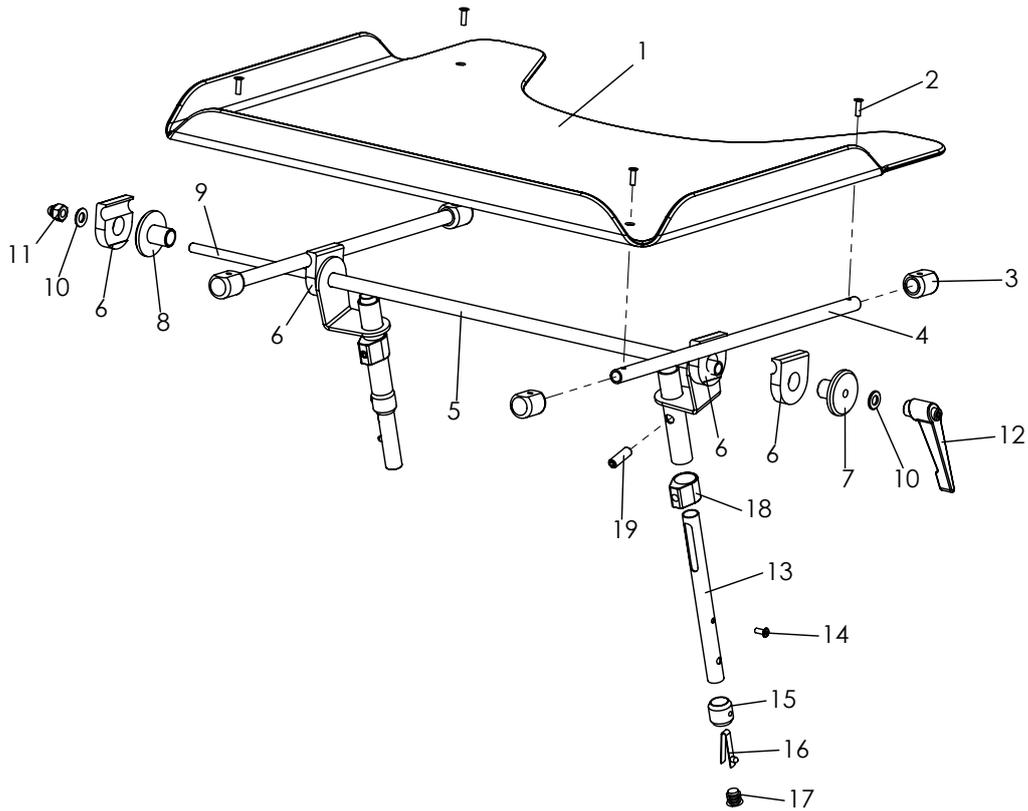


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-16	3230-8202	Therapeutisch Höhenverstellbar, Mini, transparent	1	St
	3231-8202	Therapeutisch Höhenverstellbar, Gr. 1 transparent	1	St
	3233-8202	Therapeutisch Höhenverstellbar, Gr. 1 transparent	1	St
	3230-8203	Therapeutisch Höhenverstellbar, Mini Grau	1	St
	3231-8203	Therapeutisch Höhenverstellbar, Gr. 1 Grau	1	St
	3233-8203	Therapeutisch Höhenverstellbar, Gr. 2 Grau	1	St
1	3231-8290	Tischplatte transparent	1	St
	3231-8291	Tischplatte grau	1	St
1-4	3231-8280	Tischplatte transparent, <i>mit Schiene</i>	1	St
1-4	3231-8281	Tischplatte grau, <i>mit Schiene</i>	1	St
2	1063-0416	Blindniete S4x16 Senkkopf	4	St
3	3201-8280	Lagerblock	4	St
4	3201-8270-016	Schiene	2	St
5	3230-8220-032	Grundträger Höhenverstellbar Mini	1	St
	3231-8220-032	Grundträger Höhenverstellbar Gr. 1	1	St
	3233-8220-032	Grundträger Höhenverstellbar Gr. 2	1	St
6	3201-8230	Klemmblock	4	St
7	3201-8250	Druckscheibe D8,5	1	St
8	3201-8240	Druckscheibe M8 Gewinde	1	St
9	1039-0002	Gewindestange M8 47,2cm lang	0,47	St
10	1051-0008	Scheibe A8,4	2	St
11	1044-0008	Hutmutter Sechskant M8	1	St
12	1121-0800	Klemmhebel PA schwarz M8	1	St
13-17	3231-8215E	Stütze links	1	St
	3231-8216E	Stütze rechts	1	St
14	1062-0408	Blindniet F4x8	2	St
15	3201-8120	Anschlaghülse	2	St
16	1134-0005	Stativfeder A-102	2	St
17	1141-0001	Lamellenstopfen	2	St
18	3201-8221	Klemmring	2	St
19	1031-0825	Gewindestift 8x25	2	St

Ersatzteile

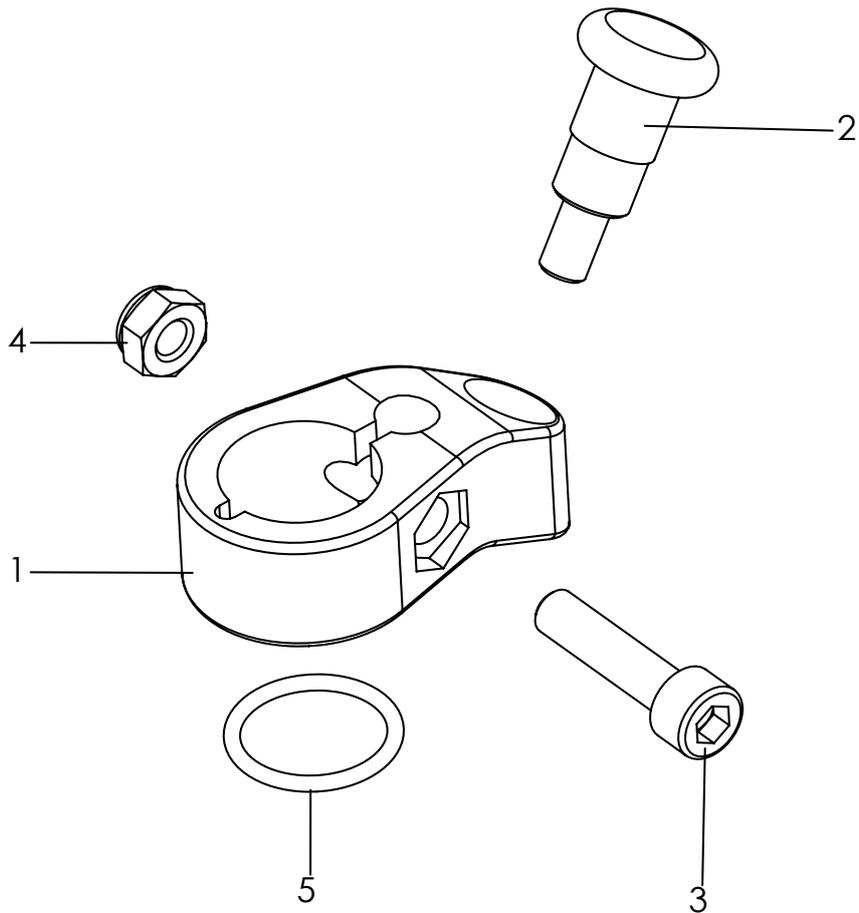


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-5	3202-7100	Lenkstopp komplett, für zwei Radgabeln	1	Set
1	3202-7110	Lenkstoppgehäuse	2	St
2	1127-0009	Zugschnapper mit Aretierung	2	St
3	1021-0625	Zylinderschraube M6x25	2	St
4	1042-0006	Sechskantmutter selbstsichernd M6	2	St
5	1150-0001	O-Ring 18x2	2	St

Ersatzteile

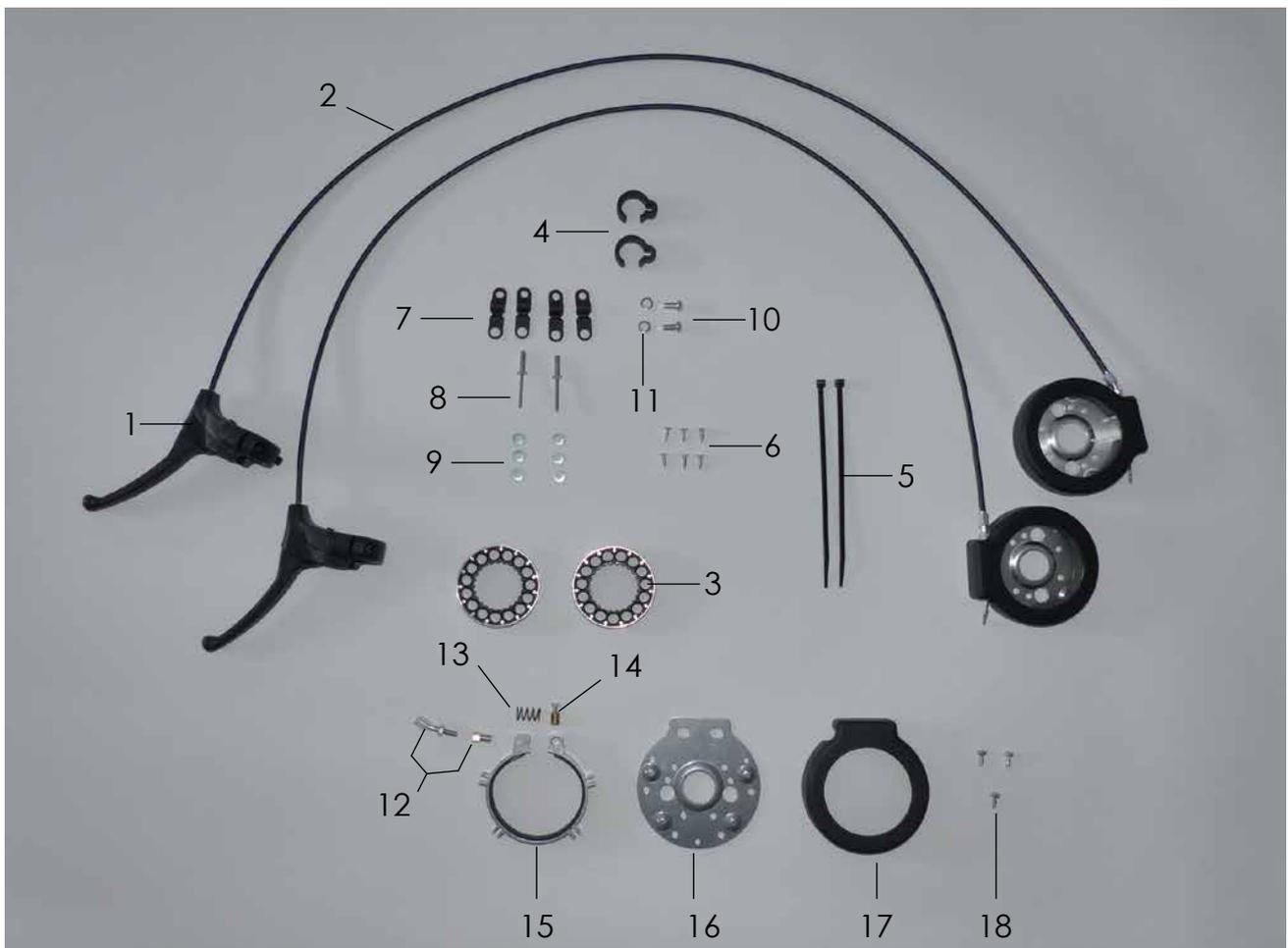


Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-11	3231-7201	Fahrbremse für Begleitperson	1	Set
	3231-7202	Fahrbremse für Begleitperson, Anbau hinter Rastergelenk	1	Set
	3235-7201	Fahrbremse für Begleitperson, Zweihandbedienung 2XL	1	Set
	3235-7202	Fahrbremse für Begleitperson, Anbau hinter Rastergelenk 2XL	1	Set
1	1209-0021	Bremsgriff 80° Abgebildet für Set (323X-7202)	2	St
	1209-0022	Bremsgriff 36° ohne Abgebildet für Set (323X-7201)	2	St
2	1209-0001	Bowdenzug 150cm	2	St
3	1204-0005	Bremsscheibe mit Alu-Ring	2	St
4	1149-0001	Bowdenzugführung D25 Klammer	2	St
5	1089-0004	Kabelbinder schwarz, 4,75x180 lang	2	St
6	1039-0006	Kunststoffschraube Senkkopf, 4x13	6	St
7	1149-0003	Bowdenzugführung df 6,4 / 8mm, schwarz	4	St
8	1062-0516	Blindnute F5x16	2	St
9	1051-0005	Scheibe A5,3	6	St
10	1029-0616	Linsenschraube M6x16	2	St
11	1050-0006	Scheibe A6,4	2	St
12-18		Ersatzteile, Fahrbremse Begleitperson		
12	3231-7217	Einstellschraube für Bowdenzug 160° geknickt	1	St
13	1131-0073	Druckfeder	1	St
14	1099-0015	Klemmschraube	1	St
15	3231-7213	Alu-Profilbügel mit Bremsbelag	1	St
16	3231-7214	Grundplatte für Nabenbremse	1	St
17	3231-7212	Deckel für Nabenbremse	1	St
18	1039-0001	Befestigungsschrauben für Pos. 16 und 17	3	St

Ersatzteile

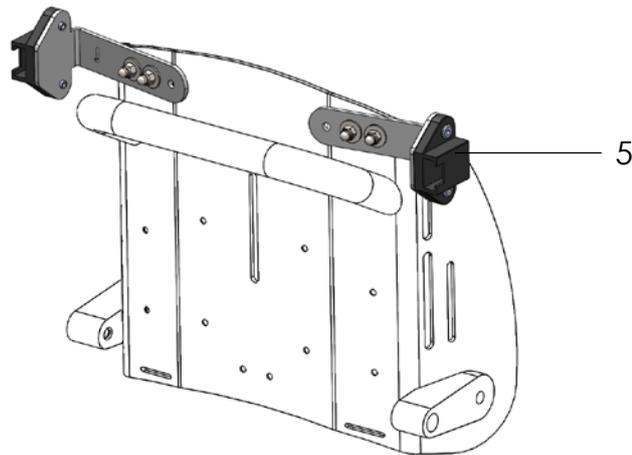

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3201-9300-323	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz Gr. 1 und 2	1	Set
	3235-9300-323	Verdeck inkl. Adapter und Regenschutz, Gr. 2XL	1	Set
1	7000-0007-323	Verdeck	1	St
2	7000-0008	Regenschutz für Verdeck, Mini, Gr. 1 und 2	1	St
	7000-0037	Regenschutz für Verdeck, Gr. 2XL	1	St
3	7000-0004	Verdeckrasterungen am Verdeck kompl. mit Verschraubung	2	St
4	3201-9310E	Verdeckadapter komplett	1	Set
5	3230-9310E	Verdeckadapter für Mini komplett	1	Set

Ersatzteile

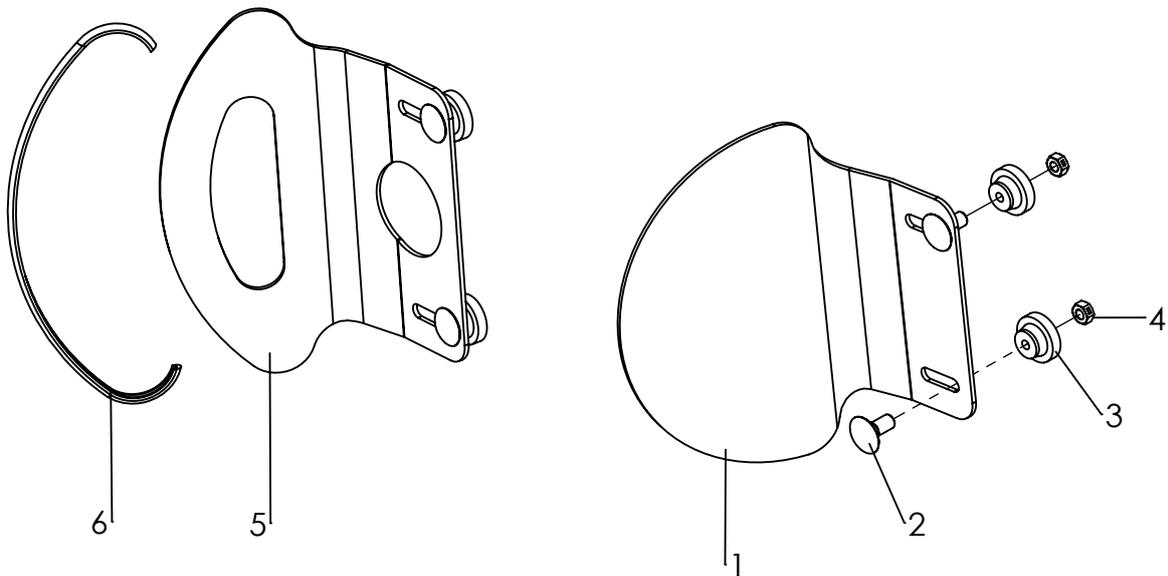

Pos	Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	ME
1-4	3230-7602-323	Kopfstützpelotten Mini mit Polster	1	Paar
	3201-7600-323	Kopfstützpelotten Gr.1 mit Polster	1	Paar
	3203-7600-323	Kopfstützpelotten Gr.2 mit Polster	1	Paar
1	3230-7631-032	Kopfstützpelotte mini, schwarz	2	St
	3201-7610-032	Kopfstützpelotte Gr.1, schwarz	2	St
	3203-7610-032	Kopfstützpelotte Gr.2, schwarz	2	St
2	1026-0520	Flachrundschraube M5x20	4	St
3	1124-0500	Rändelmutter PA schwarz M5	4	St
4	1049-0066	BILOC-Mutter M5	4	St
2-6	3230-7601-323	Kopfstützpelotten niedrige Form, Mini mit Polster	1	Paar
	3231-7600-323	Kopfstützpelotten niedrige Form, Gr.1 mit Polster	1	Paar
	3233-7600-323	Kopfstützpelotten niedrige Form, Gr.2 mit Polster	1	Paar
5	3230-7611-032	Kopfstützpelotte niedrige Form mini, schwarz	2	St
	3231-7611-032	Kopfstützpelotte niedrige Form Gr.1, schwarz	2	St
	3233-7611-032	Kopfstützpelotte niedrige Form Gr.2, schwarz	2	St
6	1144-0001	KS-Profil PVC, Mini 2x 0,19m	0,38	M
		KS-Profil PVC, Gr.1 2x 0,22m	0,44	M
		KS-Profil PVC, Gr.2 2x 0,26	0,52	M
	3230-7640-323	Kopfstützpolster Mini, eisengrau	2	St
	3201-7620-323	Kopfstützpolster Gr. 1 eisengrau	2	St
	3203-7620-323	Kopfstützpolster Gr. 2 eisengrau	2	St
	3230-7620-323	Kopfstützpolster niedrige Version Mini eisengrau	2	St
	3231-7620-323	Kopfstützpolster niedrige Version Gr. 1 eisengrau	2	St
	3233-7620-323	Kopfstützpolster niedrige Version Gr. 2 eisengrau	2	St

HOGGI GmbH
Eulerstraße 27 • 56235 Ransbach-Baumbach • Deutschland
Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0 • Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99
E-mail: info@hoggi.de • www.hoggi.de
