

www.hoggi.de

Made in Germany
by HOGGI 

SWINGBO 2

Aktiver Kinder- & Jugendrollstuhl mit 45° Sitzkantelung.



Konstruiert und handgefertigt in Deutschland.

SWINGBO 2



SWINGBO® 2

Abgebildete Ausstattung:

SWINGBO® 2 mit verlängertem Schiebebügel (abklappbar und winkelverstellbar), Kippschutz, Ankipphilfe, Antriebsräder **HOGGI** light mit Luft-Bereifung, Kniehebelbremse, Lenkräder: PU-Rad mit Design-Alufelge. Fußbrett aus Aluminium, Sitzblech mit konturiertem Sitzkissen, Rückenblech und Rückenkissen in Muldenform, Kopfstütze „Standard“ mit Polster, Rahmenfarbe: „himmelblau“.

SWINGBO 2

Die Weiterentwicklung des innovativen SWINGBO® Versorgungskonzeptes.

Mit dem SWINGBO® 2 wurde das innovative Versorgungskonzept konsequent weiter entwickelt.

Die neue Konstruktion der Sitzkantelung ermöglicht ein komfortables Kanteln im Schwerpunkt. Der Sitzwinkelverstellbereich ermöglicht ein Kanteln im Bereich von -5° bis $+45^\circ$.

Der Rahmen ist als Abduktionsvariante designed und garantiert jederzeit eine abduzierte Sitzpositionierung.

Abduktionsrahmen. Sitzkantelung von -5° bis $+45^\circ$.



Abduktionsrahmen.



45° Sitzkantelung.

Modernes, kompaktes und sportliches Design. Modulares und variables Baukastensystem.

Im Sinne einer möglichst optimalen & individuellen Versorgung wird der SWINGBO® 2 als modulares Baukastensystem angeboten. Fahrgestell, Sitzbleche, Rückenbleche und Kniewinkelanlagen sind separat erhältlich. Daraus resultiert eine große Bandbreite von Versorgungskonzepten: Von komplett „standardisiert“ mit Fahrgestell, Sitz- und Rückenblechen sowie konfektionierten Sitz- und Rückenpolstern, über „teilindividualisiert“ bis hin zu „vollindividualisiert“ mit einem SWINGBO® 2 Fahrgestell.

SWINGBO 2



Elegant und homogen. Leicht und kompakt für den Transport.



Variabel und mitwachsend.



Extrem kompaktes Faltmaß.

Extrem kompaktes Faltmaß. Leichtes Eigengewicht.

Zum Transport oder für die Autofahrt erreicht dein **SWINGBO® 2** mit nur 3 Handgriffen ein extrem kompaktes Faltmaß. Das Aufrichten zum Gebrauch ist genauso leicht. Grundausgestattet kann sich der **SWINGBO® 2** mit 12 kg Gewicht (in SB 24 cm) selbst als mitwachsender, aktiver und kantelbarer Kinder- und Jugendrollstuhl mit reinen Aktiv-Rollstühlen ohne Mitwachsvermögen messen.

SWINGBO 2

Sitzkantelung und Rückenneigung.

Je nach dem Bedürfnis des Kindes ermöglicht der **SWINGBO® 2** einen sanften Wechsel zwischen der aktiven und der passiven Position.

Ob Sitzkantelung oder Rückenwinkelverstellung - beides ist leicht zu bedienen und bietet diverse Winkelpositionen für die perfekte und individuelle Versorgung.

Die perfekte Versorgung und Position - in jeder Situation.



Sitzkantelung.



Rückenneigung.

Sitzkantelung von -5° bis $+45^{\circ}$.

Die Sitzkantelung bietet eine Sitzwinkelverstellung von -5° bis $+45^{\circ}$ (in vierzehn 4° Schritten).

Rückenneigung von 75° bis 120° .

Die Rückenneigung ist von 75° bis 115° oder von 80° bis 120° (in 10° Schritten) verstellbar.


SWINGBO 2

Viele Optionen. Sonderbaulösungen.

Gestalte den **SWINGBO® 2** speziell nach deinen gesundheitlichen Bedürfnissen. Alles ist möglich. **HOGGI** bietet eine Riesenauswahl an Optionen für die perfekte und individuelle Versorgung. Im Bestellformular und in der Zubehörgalerie (www.hoggi.de) sind alle Zubehöre abgebildet.

Tipp: Im Sonderbau konstruieren wir speziell nach eigenen Wünschen angepasste Lösungen.


Innovative Zubehöre. Praktisch und komfortabel.

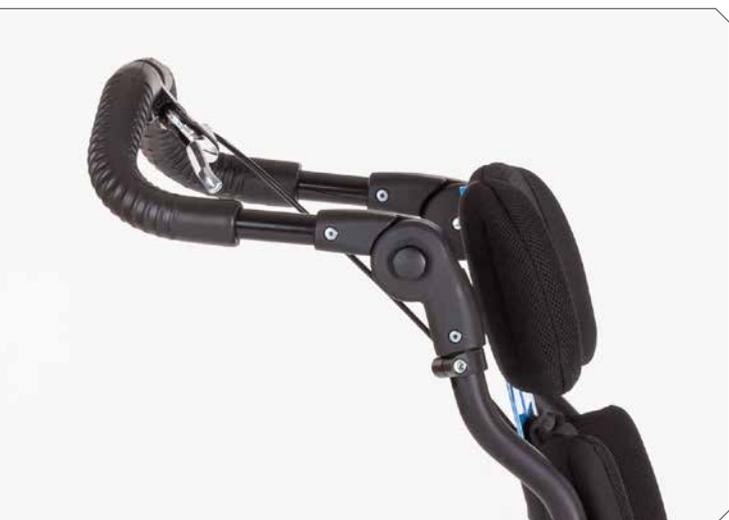

Höhenverstellbarer, verlängerter Schiebebügel.



Kippschutz, wegschwenkbar

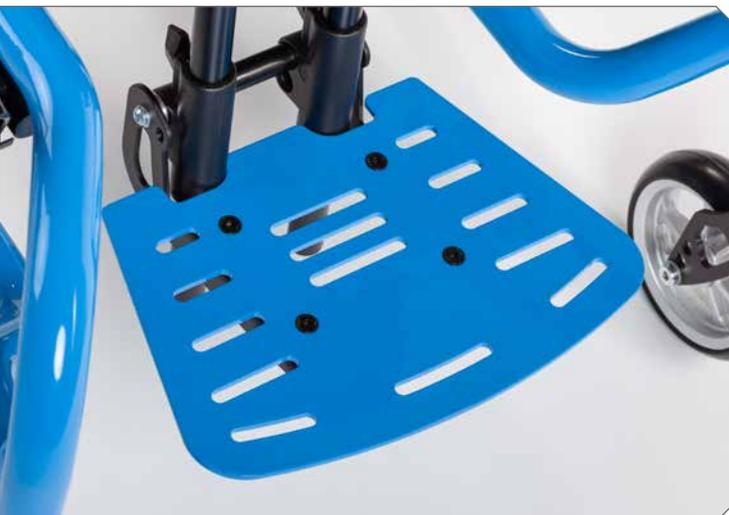

Fußbrettvariante Aluminium.



Ankipphilfe.

SWINGBO 2

Mitwachsend in der Sitztiefe und in der Rückenhöhe.

Das Mitwachsvermögen der Sitztiefe beträgt 8 cm und in der Rückenhöhe sind 9 cm möglich.

Die Aktivgradverstellung.

Durch das Versetzen beider Lagerschienen in Längsrichtung ist eine Aktivgradverstellung beim SWINGBO® 2 in 5 Schritten von jeweils 2,5 cm möglich.

Enormes Mitwachsvermögen. Aktivgradverstellung.



Kniehebelbremse.



Radgabel.



Seitenansicht.

SWINGBO 2 XL



SWINGBO® 2 XL

Abgebildete Ausstattung:

SWINGBO® 2 XL mit verlängertem Schiebebügel (abklappbar und winkelverstellbar), Doppelkippschutz, Ankipphilfe, Antriebsräder **HOGGI** light mit Luft-Bereifung, Bremse integriert in Radabdeckung, Lenkräder: PU-Rad mit Design-Alufelge. Fußbrett aus Kunststoff, Sitzblech mit konturiertem Sitzkissen, Rückenblech und Rückenkissen in Muldenform, Kopfstütze „Standard“, Rahmenfarbe: „ozeanblau“.

SWINGBO 2 XL

SWINGBO® 2 auch als XL Version.

Der aktive Kinder- und Jugendrollstuhl mit 45° Sitzkantelung ist auch als **XL** -Version erhältlich.

Abduzierter Rahmen mit bis zu 100 kg Zuladung.

Der Fahrgestellrahmen ist als Abduktionsvariante designed, und erlaubt eine Zuladung bis 100 kg. Technisch bietet der **SWINGBO® 2 XL** exakt dieselben komfortablen Features wie der **SWINGBO® 2**.

Abduktionsrahmen. Sitzkantelung von -5° bis +45°.



Kompaktes Faltmaß.



45° Sitzkantelung.

Modernes, kompaktes und sportliches Design. Modulares und variables Baukastensystem.

Das Design überzeugt durch ein modernes, sportliches und kompaktes Erscheinungsbild. Umfassende Verstellmöglichkeiten sowie umfangreiche Zubehöre ermöglichen eine optimale und individuelle Versorgung. Dank des modularen Baukastenprinzips sind Fahrgestell, Sitzeinheit und Kniewinkelanlage separat erhältlich. Das ermöglicht eine große Vielfalt an Versorgungskonzepten.

SWINGBO 2

Technische Daten

Sitzbreite	24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
Sitztiefe	26-30 cm	26-32 cm	26-34 cm	28-36 cm	30-38 cm	32-40 cm	34-42 cm
Sitzhöhe	36-47 cm	36-47 cm	36-47 cm	36-47 cm	36-47 cm	36-47 cm	36-47 cm
Sitzwinkel	-5° bis +45° bei allen Sitzbreiten						
Rückenhöhe							
Rücken winkel- und höhenverstellbar	33-42 cm	35-44 cm	37-46 cm	39-48 cm	42-51 cm	43-54 cm	45-55 cm
Schiebebügel/-griffe abklappbar	36-44 cm	37-45 cm	38-48 cm	39-49 cm	40-50 cm	42-54 cm	43-55 cm
Schiebebügel abklappbar u. winkelverstellbar	36-44 cm	37-45 cm	38-48 cm	39-49 cm	40-50 cm	42-54 cm	43-55 cm
Rückenwinkel							
Rücken winkel- und höhenverstellbar	75° bis 115° oder von 80° bis 120° (in 10° Schritten)						
Schiebebügel/-griffe abklappbar	85° bis 105° (in 5° Schritten)						
Unterschenkellänge	16-37 cm						
Fußbrettwinkel	-10° bis +10°						
Antriebsraddurchmesser	20“, 22“, 24“						
Lenkraddurchmesser	4“, 5“, 5,5“						
Radsturz	3°, 6°, 9°						
Maximale Zuladung	50 kg						
Hilfsmittelnummer	18.50.03.2013						

Sicherheitsaspekt: Erfolgreich crashgetestet.

SWINGBO® 2 wurde nach ISO 7176-19 erfolgreich crashgetestet.

SWINGBO® 2 ist für den Gebrauch im BTW (Behindertentransportwagen) geeignet.

SWINGBO 2 XL

Technische Daten

Sitzbreite	32 cm	36 cm	40 cm	44 cm
Sitztiefe	30-42 cm	34-46 cm	38-50 cm	38-50 cm
Sitzhöhe	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Sitzwinkel	-5° bis +45°	-5° bis +45°	-5° bis +45°	-5° bis +45°
Rückenhöhe				
Rücken winkel- und höhenverstellbar	41-50 cm	45-54 cm	50-59 cm	54-63 cm
Schiebebügel/-griffe abklappbar	40-50 cm	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Schiebebügel abklappbar und winkelverstellbar	40-50 cm	43-55 cm	45-57 cm	48-60 cm
Rückenwinkel				
Rücken winkel- und höhenverstellbar	75° bis 115° oder von 80° bis 120° (in 10° Schritten)			
Schiebebügel/-griffe abklappbar	85° bis 105° (in 5° Schritten)			
Unterschenkellänge	20-41 cm	20-41 cm	20-41 cm	
Fußbrettwinkel	-10° bis +10°	-10° bis +10°	-10° bis +10°	
Antriebsraddurchmesser	22", 24"	22", 24"	22", 24"	
Lenkraddurchmesser	5", 5,5"	5", 5,5"	5", 5,5"	
Radsturz	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	3°, 6°, 9°	
Maximale Zuladung	100 kg	100 kg	100 kg	
Hilfsmittelnummer	18.50.03.2012			

Sicherheitsaspekt: Erfolgreich crashgetestet.

SWINGBO® 2 XL wurde nach ISO 7176-19 erfolgreich crashgetestet.

SWINGBO® 2 XL ist für den Gebrauch im BTW (Behindertentransportwagen) geeignet.

SWINGBO 2

HOGGI

Partnerschaft für mobile Kinder.

HOGGI GmbH

 Eulerstraße 27
D-56235 Ransbach-Baumbach

 Telefon: (+49) 2623 / 92 499-0
Telefax: (+49) 2623 / 92 499-99

 info@hoggi.de

www.hoggi.de